

Таблица за съвместимост за хирургичната техника

Феморалните бедрени глави на фирмата Mathys може да се комбинират с множество одобрени стебла и чашки. Този документ съдържа пълен списък на съвместимите протезни системи. Посочените по-долу бедрени глави са включени в тази таблица за съвместимост.

Метални тазобедрени глави

CoCrMo
SS



Керамични тазобедрени глави

ceramys
symarec
Bionit2




Ревизионни тазобедрени глави

ceramys




Комбинация със стебла на фирмата Mathys Ltd Bettlach

Посочените по-долу комбинации на продукти, произведени от фирмата Mathys Ltd Bettlach, са тествани и одобрени:

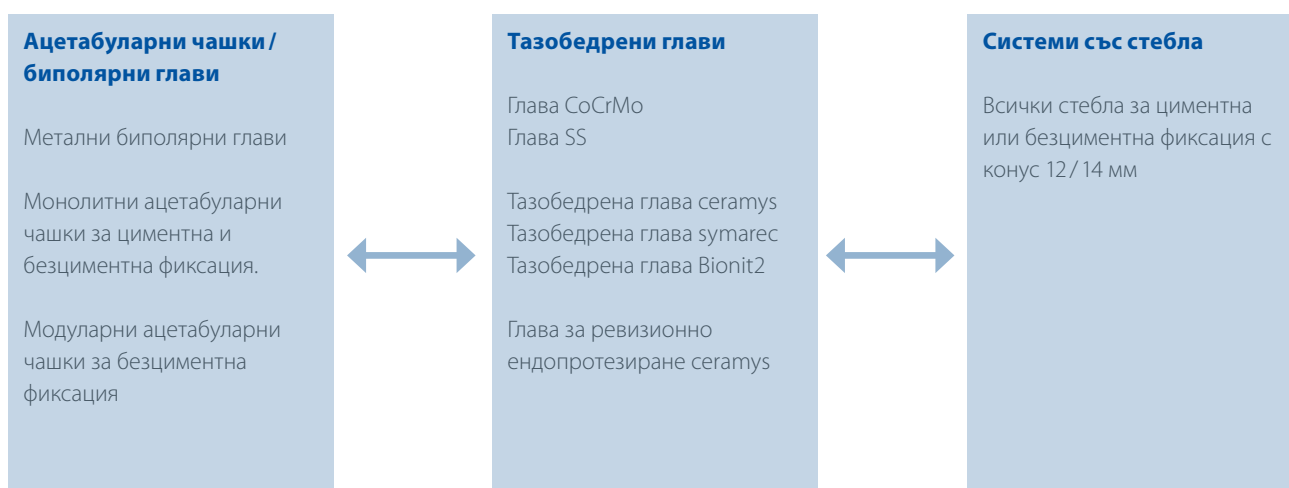

Комбинация със стебла на фирмата Mathys Ltd Bettlach

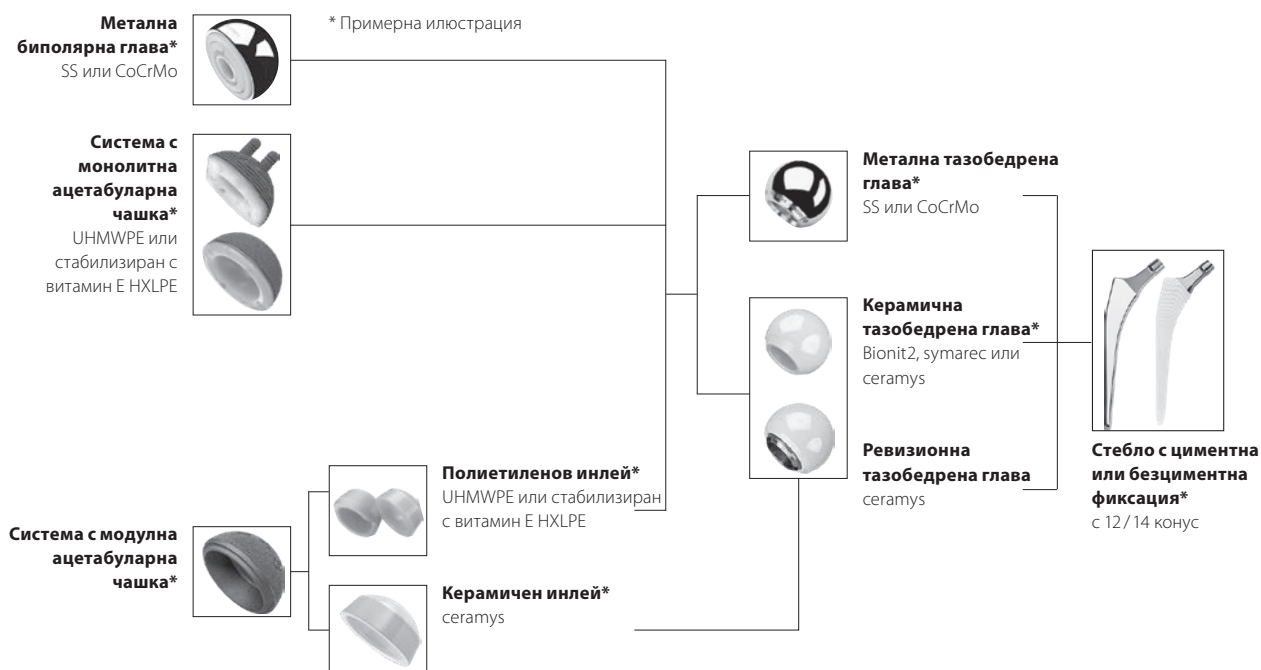

Ограничения

- Феморални глави в комбинация със СВН стебло:
 - СВН стебло размер 0 може да се комбинира само с феморални глави с дължина на шийката до L.
 - СВН стебло размер 1 – 12 може да се комбинира само с феморални глави с дължина на шийката до XL.
- Феморални глави в комбинация с модулно ревизионно стебло:
 - Модулните шийки на модулното ревизионно стебло може да се комбинират само с феморални глави с дължина на шийката S, M и L.
- Метални глави в комбинация с керамични инлеи.

Mathys Ltd Bettlach настоятелно препоръчва продуктите на фирмата да не се комбинират с протезни системи от други производители, с изключение на комбинациите, които вече са тествани и одобрени и които са посочени в таблицата за съвместимост за хирургичната техника. Освен ако имплант на Mathys не е специфично предназначен и изработен за дадена употреба, за която се използва, Mathys Ltd Bettlach не носи никаква отговорност.

Комбинация със стебла на фирмата PETER BREHM GmbH

Кобинирането на определени продукти, произведени от фирмите Mathys Ltd Bettlach и PETER BREHM GmbH, е тествано, като продуктите са с доказана съвместимост. Следните комбинации с глави на фирмата Mathys са одобрени за употреба в контекста на хирургичните техники за посочените по-долу продукти на фирмата PETER BREHM.

Тазобедрена глава CoCrMo

Mathys Тазобедрена глава CoCrMo Кат. №	Размер	PETER BREHM MRP-TITAN
52.34.0125	22,2 S	X
52.34.0126	22,2 M	✓
52.34.0127	22,2 L	✓
2.30.010	28 S	✓
2.30.011	28 M	✓
2.30.012	28 L	✓
2.30.013	28 XL	X
2.30.014	28 XXL	X
2.30.020	32 S	✓
2.30.021	32 M	✓
2.30.022	32 L	✓
2.30.023	32 XL	X
2.30.024	32 XXL	X
52.34.0686	36 S	X
52.34.0687	36 M	X
52.34.0688	36 L	X
52.34.0689	36 XL	X
52.34.0690	36 XXL	X

Тазобедрена глава ceramys

Mathys Тазобедрена глава ceramys Кат. №	Размер	PETER BREHM MRP-TITAN
–	22,2 S	–
–	22,2 M	–
–	22,2 L	–
54.47.0010	28 S	✓
54.47.0011	28 M	✓
54.47.0012	28 L	✓
–	28 XL	–
–	28 XXL	–
54.47.0110	32 S	✓
54.47.0111	32 M	✓
54.47.0112	32 L	✓
54.47.0113	32 XL	X
–	32 XXL	–
54.47.0210	36 S	✓
54.47.0211	36 M	✓
54.47.0212	36 L	✓
54.47.0213	36 XL	X
–	36 XXL	–

Тазобедрена глава сумарес и ревизионна глава ceramys

Mathys Тазобедрени глави сумарес Кат. №	Mathys Ревизионна глава ceramys Кат. №	Размер	PETER BREHM MRP-TITAN
54.48.0010	54.47.2010	28 S	✓
54.48.0011	54.47.2020	28 M	✓
54.48.0012	54.47.2030	28 L	✓
–	54.47.2040	28 XL	X
54.48.0110	54.47.2110	32 S	✓
54.48.0111	54.47.2120	32 M	✓
54.48.0112	54.47.2130	32 L	✓
54.48.0113	54.47.2140	32 XL	X
54.48.0210	54.47.2210	36 S	✓
54.48.0211	54.47.2220	36 M	✓
54.48.0212	54.47.2230	36 L	✓
54.48.0213	54.47.2240	36 XL	X

Условни обозначения



Фирмите Mathys Ltd Bettlach и PETER BREHM GmbH разрешават комбинарането на продуктите.

Тази комбинация на продукта не е официално пусната на пазара от Mathys Ltd Bettlach и PETER BREHM GmbH.