

Πίνακας συμβατότητας για τη χειρουργική τεχνική

Οι μηριαίες κεφαλές ισχίου της Mathys μπορούν να συνδυαστούν με μια ποικιλία εγκεκριμένων στελεχών και κυπελλίων. Αυτό το έγγραφο περιέχει έναν πλήρη κατάλογο των συμβατών συστημάτων εμφυτεύματος. Αυτός ο πίνακας συμβατότητας καλύπτει τους εξής τύπους κεφαλών ισχίου.

Μεταλλικές κεφαλές ισχίου

CoCrMo
SS



Κεραμικές κεφαλές ισχίου

ceramys
symarec
Bionit2




Κεφαλές ισχίου αναθεώρησης

ceramys




Συνδυασμός με συστήματα της Mathys Ltd Bettlach

Έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί οι ακόλουθοι συνδυασμοί προϊόντων κατασκευής της Mathys Ltd Bettlach:

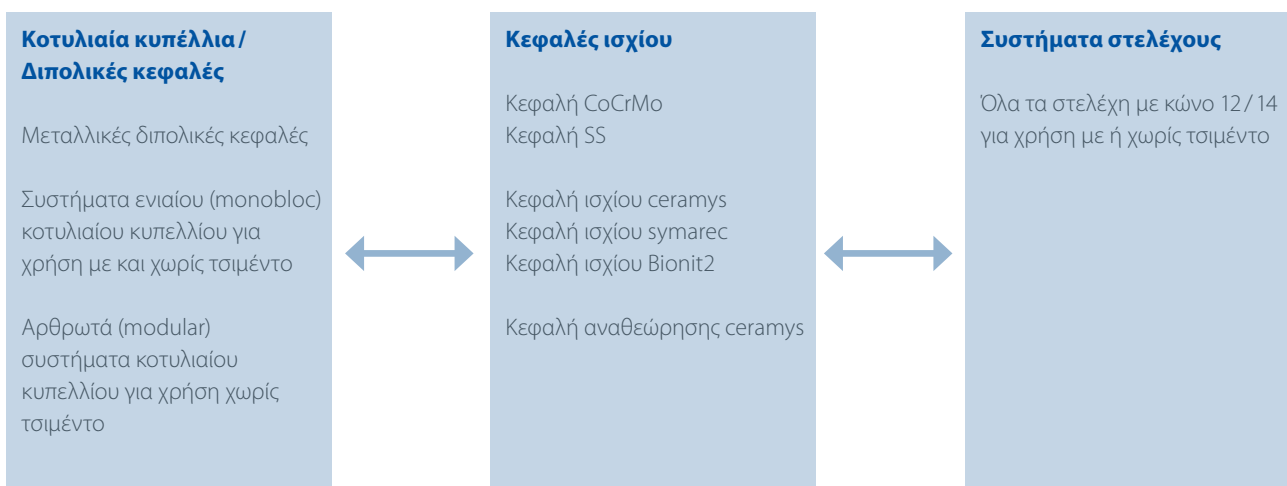

Συνδυασμός με συστήματα της Mathys Ltd Bettlach

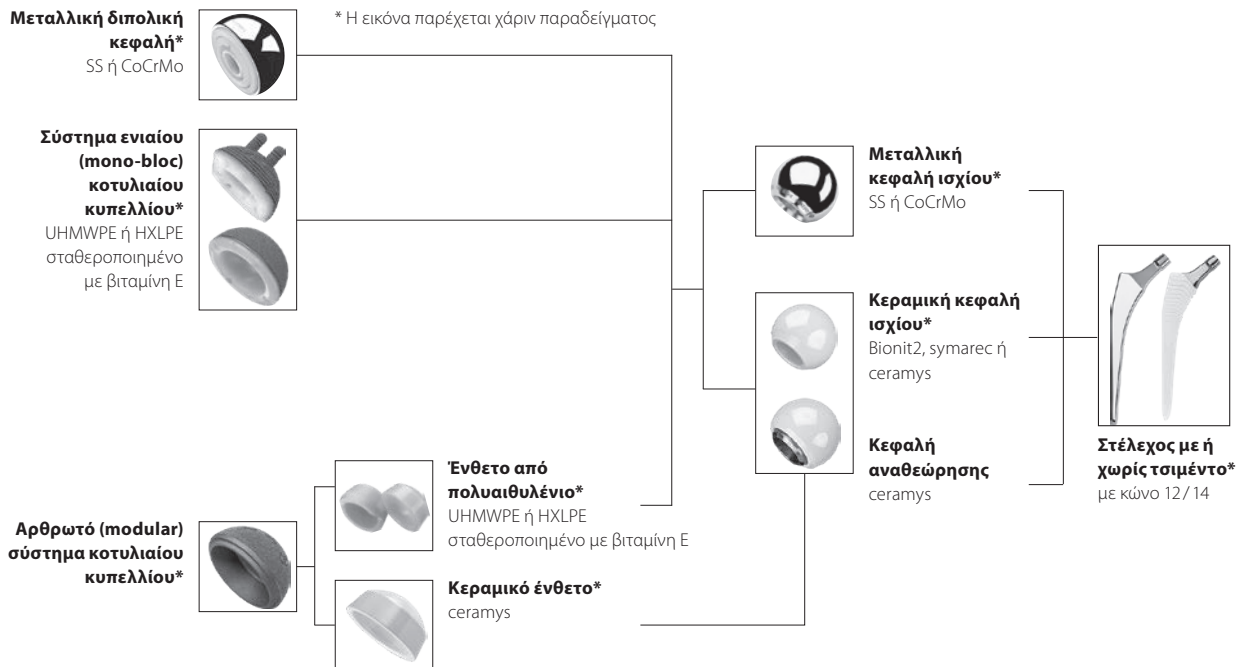

Περιορισμοί

- Μηριαίες κεφαλές σε συνδυασμό με στέλεχος CBH:
 - Το στέλεχος CBH μεγέθους 0 μπορεί να συνδυαστεί μόνο με μηριαίες κεφαλές μήκους αυχένα έως L.
 - Τα στελέχη CBH μεγέθους 1 – 12 μπορούν να συνδυαστούν μόνο με μηριαίες κεφαλές μήκους αυχένα έως XL.
- Μηριαίες κεφαλές σε συνδυασμό με το αρθρωτό στέλεχος αναθεώρησης:
 - Οι αρθρωτοί αυχένες του αρθρωτού στελέχους αναθεώρησης μπορούν να συνδυαστούν μόνο με μηριαίες κεφαλές μήκους αυχένα μεγέθους S, M και L.
- Μεταλλικές κεφαλές σε συνδυασμό με κεραμικά ένθετα

Η Mathys Ltd Bettlach συνιστά ιδιαίτερα να μη συνδυάζονται τα προϊόντα της με συστήματα εμφυτευμάτων άλλων κατασκευαστών, εκτός από τους συνδυασμούς που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί και παρατίθενται στον πίνακα συμβατότητας για τη χειρουργική τεχνική. Η Mathys Ltd Bettlach δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, εκτός και αν το εμφύτευμα της Mathys έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Συνδυασμός με συστήματα της PETER BREHM GmbH

Έχει δοκιμαστεί ο συνδυασμός ορισμένων προϊόντων κατασκευής της Mathys Ltd Bettlach και της PETER BREHM GmbH και έχει αποδειχθεί η συμβατότητά τους. Στο πλαίσιο των χειρουργικών τεχνικών για τα προϊόντα της PETER BREHM που παρατίθενται παρακάτω, έχουν εγκριθεί προς χρήση οι ακόλουθοι συνδυασμοί με κεφαλές της Mathys.

Κεφαλή ισχίου CoCrMo

Mathys Κεφαλή ισχίου CoCrMo Αρ. είδους	Μέγεθος	PETER BREHM MRP-TITAN
52.34.0125	22,2 S	X
52.34.0126	22,2 M	✓
52.34.0127	22,2 L	✓
2.30.010	28 S	✓
2.30.011	28 M	✓
2.30.012	28 L	✓
2.30.013	28 XL	X
2.30.014	28 XXL	X
2.30.020	32 S	✓
2.30.021	32 M	✓
2.30.022	32 L	✓
2.30.023	32 XL	X
2.30.024	32 XXL	X
52.34.0686	36 S	X
52.34.0687	36 M	X
52.34.0688	36 L	X
52.34.0689	36 XL	X
52.34.0690	36 XXL	X

Κεφαλή ισχίου ceramys

Mathys Κεφαλή ισχίου ceramys Αρ. είδους	Μέγεθος	PETER BREHM MRP-TITAN
–	22,2 S	–
–	22,2 M	–
–	22,2 L	–
54.47.0010	28 S	✓
54.47.0011	28 M	✓
54.47.0012	28 L	✓
–	28 XL	–
–	28 XXL	–
54.47.0110	32 S	✓
54.47.0111	32 M	✓
54.47.0112	32 L	✓
54.47.0113	32 XL	X
–	32 XXL	–
54.47.0210	36 S	✓
54.47.0211	36 M	✓
54.47.0212	36 L	✓
54.47.0213	36 XL	X
–	36 XXL	–

Κεφαλή ισχίου symarec και κεφαλή αναθεώρησης ceramys

Mathys Κεφαλή ισχίου symarec Αρ. είδους	Mathys Αναθεώρηση Κεφαλή ceramys Αρ. είδους	Μέγεθος	PETER BREHM MRP-TITAN
54.48.0010	54.47.2010	28 S	✓
54.48.0011	54.47.2020	28 M	✓
54.48.0012	54.47.2030	28 L	✓
–	54.47.2040	28 XL	X
54.48.0110	54.47.2110	32 S	✓
54.48.0111	54.47.2120	32 M	✓
54.48.0112	54.47.2130	32 L	✓
54.48.0113	54.47.2140	32 XL	X
54.48.0210	54.47.2210	36 S	✓
54.48.0211	54.47.2220	36 M	✓
54.48.0212	54.47.2230	36 L	✓
54.48.0213	54.47.2240	36 XL	X

Σύμβολα



Ο συνδυασμός προϊόντων έχει εγκριθεί από την Mathys Ltd Bettlach και την PETER BREHM GmbH.

Ο συνδυασμός προϊόντων δεν έχει εγκριθεί από την Mathys Ltd Bettlach και την PETER BREHM GmbH.