

Tabla de compatibilidad para la técnica quirúrgica

Las cabezas femorales de Mathys se pueden combinar con diferentes vástagos y cotilos aprobados. Este documento contiene una lista completa de los sistemas de implantes compatibles. En esta tabla de compatibilidad se contemplan los siguientes tipos de cabezas femorales.

Cabezas femorales metálicas

CoCrMo
SS



Cabezas femorales cerámicas

ceramys
symarec
Bionit2




Cabezas femorales de revisión

ceramys




Combinación con sistemas de Mathys Ltd Bettlach

Se han comprobado y aprobado las siguientes combinaciones de productos fabricados por Mathys Ltd Bettlach:

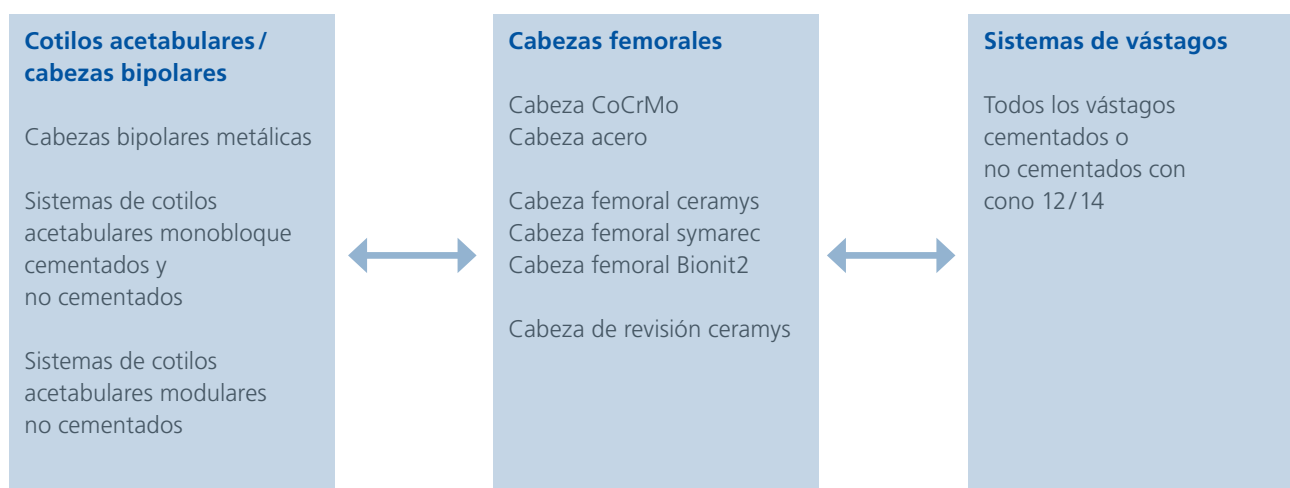

Combinación con sistemas de Mathys Ltd Bettlach

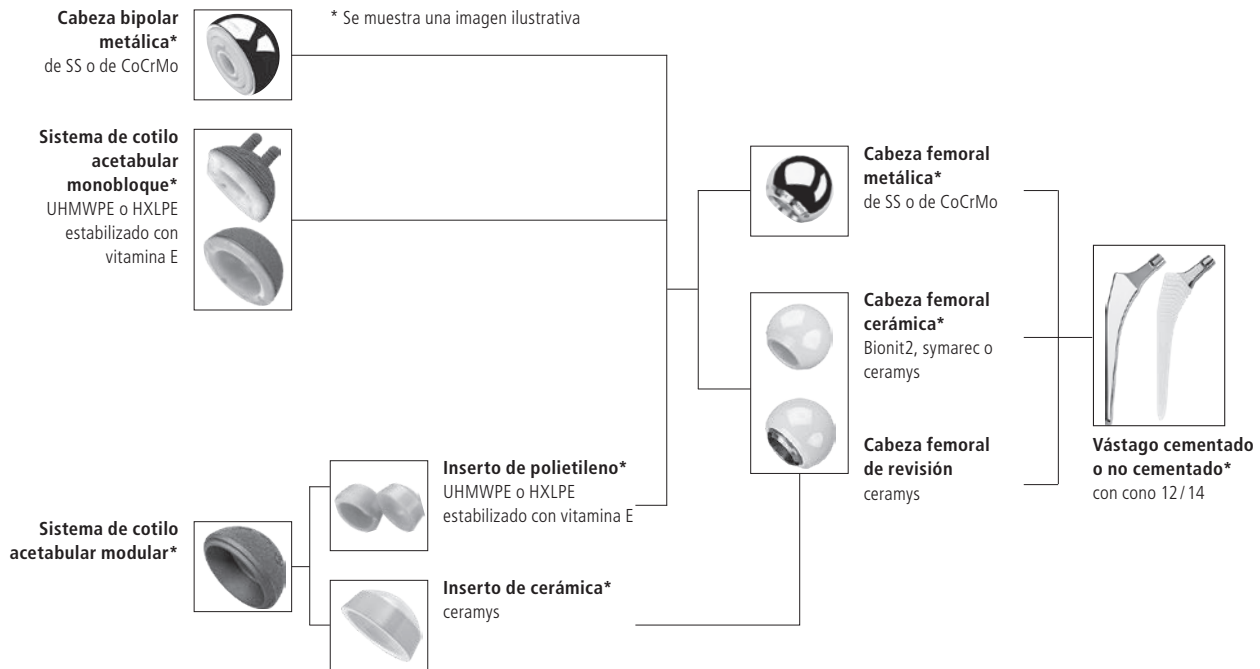

Limitaciones

- Cabezas femorales en combinación con el vástago CBH:
 - El vástago CBH del tamaño 0 solo se puede combinar con las cabezas femorales hasta una longitud de cuello L.
 - Los vástagos CBH de tamaños 1 – 12 solo se pueden combinar con las cabezas femorales hasta una longitud de cuello XL.
- Cabezas femorales en combinación con el vástago de revisión modular:
 - Los cuellos modulares del vástago de revisión modular sólo se deben combinar con cabezas femorales con las longitudes de cuello S, M y L.
- Cabezas metálicas en combinación con insertos cerámicos.

Mathys SA Bettlach recomienda encarecidamente no combinar sus productos con sistemas de implantes de otros fabricantes, excepto cuando las combinaciones se hayan probado y autorizado y estén recogidas en la tabla de compatibilidad para la técnica quirúrgica. Mathys SA Bettlach no asume ninguna responsabilidad a no ser que el implante Mathys se haya diseñado y fabricado específicamente para ser usado de esa forma.

Combinación con sistemas de PETER BREHM GmbH

Se ha comprobado la combinación de determinados productos fabricados por Mathys Ltd Bettlach y PETER BREHM GmbH, demostrándose que son compatibles. Dentro del contexto de las técnicas quirúrgicas para los productos de PETER BREHM listados a continuación, se aprueban para el uso las siguientes combinaciones con cabezas de Mathys.

Cabeza femoral CoCrMo

Mathys Cabeza femoral CoCrMo N° de ref.	Tamaño	PETER BREHM MRP-TITAN
52.34.0125	22,2 S	X
52.34.0126	22,2 M	✓
52.34.0127	22,2 L	✓
2.30.010	28 S	✓
2.30.011	28 M	✓
2.30.012	28 L	✓
2.30.013	28 XL	X
2.30.014	28 XXL	X
2.30.020	32 S	✓
2.30.021	32 M	✓
2.30.022	32 L	✓
2.30.023	32 XL	X
2.30.024	32 XXL	X
52.34.0686	36 S	X
52.34.0687	36 M	X
52.34.0688	36 L	X
52.34.0689	36 XL	X
52.34.0690	36 XXL	X

Cabeza femoral ceramys

Mathys Cabeza femoral ceramys N° de ref.	Tamaño	PETER BREHM MRP-TITAN
–	22,2 S	–
–	22,2 M	–
–	22,2 L	–
54.47.0010	28 S	✓
54.47.0011	28 M	✓
54.47.0012	28 L	✓
–	28 XL	–
–	28 XXL	–
54.47.0110	32 S	✓
54.47.0111	32 M	✓
54.47.0112	32 L	✓
54.47.0113	32 XL	X
–	32 XXL	–
54.47.0210	36 S	✓
54.47.0211	36 M	✓
54.47.0212	36 L	✓
54.47.0213	36 XL	X
–	36 XXL	–

Cabeza femoral symarec y cabeza de revisión ceramys

Mathys Cabeza femoral symarec N° de ref.	Mathys Revisión cabeza ceramys N° de ref.	Tamaño	PETER BREHM MRP-TITAN
54.48.0010	54.47.2010	28 S	✓
54.48.0011	54.47.2020	28 M	✓
54.48.0012	54.47.2030	28 L	✓
–	54.47.2040	28 XL	X
54.48.0110	54.47.2110	32 S	✓
54.48.0111	54.47.2120	32 M	✓
54.48.0112	54.47.2130	32 L	✓
54.48.0113	54.47.2140	32 XL	X
54.48.0210	54.47.2210	36 S	✓
54.48.0211	54.47.2220	36 M	✓
54.48.0212	54.47.2230	36 L	✓
54.48.0213	54.47.2240	36 XL	X

Símbolos



✓ La combinación de los productos está aprobada por Mathys SA Bettlach y PETER BREHM GmbH.

X La combinación de productos no está aprobada por Mathys SA Bettlach ni PETER BREHM GmbH.