

Operačná technika


balanSys BICONDYLAR

LIS 4in1

Nástroje SMarT

Určené len pre zdravotníckych profesionálov. Ilustrovaný obrázok nepredstavuje spojenie medzi použitím opísanej zdravotníckej pomôcky ani jej výkon.

Preservation in motion

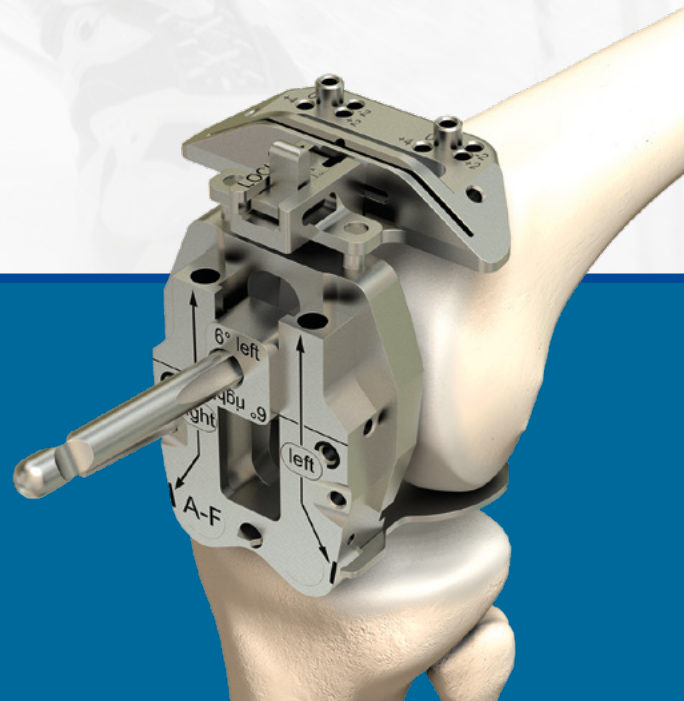

*Vychádzame z nášho dedičstva
Posúvame technológiu dopredu
Krok za krokom s našimi klinickými partnermi
Smerom k cieľu zachovania mobility*

Preservation in motion

Mathys je švajčiarska spoločnosť a zaväzuje sa dodržiavať tento hlavný princíp. Zároveň sa usiluje o portfólio produktov s cieľom ďalšieho rozvoja tradičných filozofií týkajúcich sa materiálov a dizajnu, aby mohla čeliť existujúcim klinickým výzvam. To sa odráža v našom imidži: tradičné švajčiarske aktivity v spojení s neustálym rozvojom športového vybavenia.

Obsah

Úvod	4
Indikácie a kontraindikácie	5
Predoperačné plánovanie	6
Cieľ zákroku a chirurgický prístup	7
Príprava pacienta	7
Prehľad operačnej techniky	8
Operačná technika	10
1. Femorálna osteotómia	10
2. Tibiálna osteotómia	18
3. Preparácia a implantácia	22
3.1 balanSys CR, UC a RP	22
3.2 balanSys PS	27
Príloha	33
1 – Intramedulárna tibiálna osteotómia	33
2 – balanSys 3-kolíková patela	35
3 – Produktové čísla implantátov balanSys	38
4 – Veľkosť a kompatibilita implantátov balanSys	50
5 – Produktové čísla nástrojov balanSys	51
6 – Produktové čísla meracích šablón balanSys	80
Symbody a skratky	81

Poznámka

Pred použitím implantátu vyrobeného spoločnosťou Mathys Ltd Bettlach sa oboznámte s manipuláciou s nástrojmi, s operačnou technikou pre daný výrobok a s upozorneniami, bezpečnostnými pokynmi a odporúčaniami v príbalovom letáku. Využite možnosť používateľského školenia, ktoré ponúka spoločnosť Mathys a postupujte podľa odporúčanej operačnej techniky.

Úvod

Systém balanSys BICONDYLAR je modulárny systém náhrady kolenného kĺbu.

Systém balanSys BICONDYLAR pozostáva z cementovaného alebo necementovaného femorálneho komponentu, cementovaného symetrického tibiálneho plató a tibiálnej vložky. Cementovaný patelárny komponent je voliteľnou možnosťou. Pre kovové femorálne a tibiálne komponenty je k dispozícii možnosť s TiNbN povrchom. Portfólio tibiálnych vložiek zahŕňa jednu konfiguráciu s mobilným ložiskom (rotačná platforma (Rotating Platform, RP) a tri rôzne konfigurácie s pevným ložiskom (zachovávať skrížený väz (Cruciate Retaining, CR), ultra kongruentná (Ultra Congruent, UC) a posteriórne stabilizovaná (PS)).

Pre tibiálne vložky je možný výber z dvoch materiálov: Štandardný UHMWPE alebo vitamys, vitamínom E stabilizovaný PE, ktorý má vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a je dobre chránený pred oxidáciou.¹

Systém balanSys BICONDYLAR dokazuje svoju klinickú hodnotu dobrými klinickými výsledkami už od roku 1997.²

S kolenným systémom balanSys ponúka spoločnosť Mathys Ltd Bettlach široké spektrum komponentov, ktoré zodpovedajú anatomickým podmienkam a funkčným požiadavkám pre kolenný kĺb pacienta.

Implantáty, nástroje a operačné techniky balanSys sú navrhnuté tak, aby vyhovovali požiadavkám chirurgov na kinematiku, vyváženie väzov, stabilitu a dlhodobú životnosť protéz.²

Vysokokvalitné nástroje a implantáty sú vyrobené tak, aby neustále dosahovali vynikajúce klinické výsledky. Kvalita vyrobená vo Švajčiarsku.

¹ Data on file Mathys Ltd Bettlach.

² Superior long-term survival for fixed bearing compared with mobile bearing in ligament-balanced total knee arthroplasty. Heesterbeek, P.J.C., van Houten, A.H., Klenk, J.S. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, online 07 April 2017.

Indikácie a kontraindikácie

Indikácie

- Bolesťivé a/alebo invalidizujúce ochorenie kolena spôsobené osteoartritídou, avaskulárnou nekrózou, zápalovou artritídou alebo posttraumatickou artritídou
- Revízia predchádzajúcej náhrady kolena

Kontraindikácie

- Lokálna alebo celková infekcia
- Akákoľvek nedostatočnosť mäkkého tkaniva, väzov, nervov alebo ciev, ktorá predstavuje neakceptovateľné riziko nestability protézy, zlyhania fixácie protézy a/alebo komplikácií pri pooperačnej starostlivosti
- Ohrozenie množstva kostného materiálu spôsobené stratou kosti alebo kostnými defektmi a/alebo nedostatočné množstvo kostnej hmoty, pri ktorých nie je možná vhodná podpora a/alebo fixácia protézy
- Precitlivosť na použité materiály
- Nevyvinutá kostra
- Genu recurvatum
- Nedostatočnosť extenzorového mechanizmu
- Progresívne neoplastické ochorenie

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie alebo sa spýtajte svojej kontaktnej osoby v spoločnosti Mathys.

Predoperačné plánovanie

Ciele predoperačného plánovania

- Identifikácia a kvantifikácia deformít a kostných defektov ako aj osteofytov
- Určenie uhla medzi anatomicou osou a mechanickou osou
- Predbežné určenie veľkosti femorálnej a tibiálnej protézy pomocou plánovacích šablón

Predoperačné plánovanie zahŕňa

- Antero-posteriórne (AP) a laterálne röntgenové snímky kolenného kĺbu a tangenciálny röntgenový snímok pately
- Série celej nohy
- Celkovú plánovaciu šablónu nohy
- Röntgenovú šablónu

Cieľ zákroku a chirurgický prístup

- Intraoperačná úprava axiálnych odchýlok vo frontálnej rovine nohy pozdĺž mechanickej osi, pričom línia kĺbu má byť v pravom uhle osi
- Rekonštrukcia fyziologických pomerov osi
- Kinematické vlastnosti protézy
 - fyziologická línia kĺbu
 - dostatočná mediálna a laterálna stabilita v extenzii a flexii
 - správne vycentrovaný a vyvážený platelo-femorálny kĺb
 - voľný pohyb: od maximálnej extenzie po maximálnu možnú flexiu

Výber prístupu závisí od axiálnej malpozície (varus/valgus).

Príprava pacienta

Chirurgický zákrok sa vykonáva u pacienta pod celkovou alebo spinálnou anestéziou, pričom sa vyžaduje adekvátne relaxácia svalov.

Preoperačná bolesť sa znižuje bez použitia turniketu. Ak je potrebné použitie turniketu, má sa umiestniť na proximálnej časti stehna a nafúknuť s kolenom v hyperflexii. To udrží maximálnu časť kvadricepsu pod rovinou turniketu.



Uložte pacienta do polohy na chrbte.

Ohnite koleno do 90° polohy.






Na uľahčenie extenzie a flexie nohy použite podporný valček na stole a laterálnu podpornú pomôcku.

Prehľad operačnej techniky




1. Femorálna osteotómia

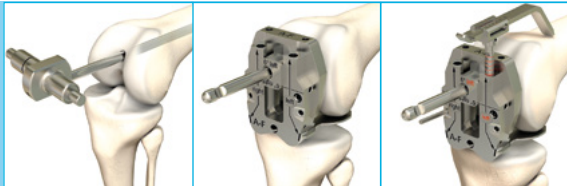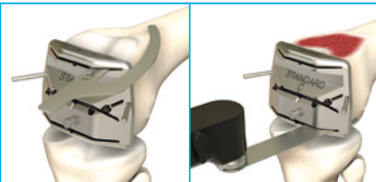	Otvorenie intramedulárneho kanála a vloženie intramedulárnej tyče. Pripojenie femorálnej vodiacej pomôcky na určovanie veľkosti/rotácie LIS. Určenie rotačnej orientácie a femorálnej veľkosti. > Strana 10
	Vyvrtanie dvoch dierok pre rezný blok 4v1. Fixácia distálneho femorálneho rezného bloku. Distálna osteotómia. > Strana 14
	Vloženie rezného bloku 4v1. Kontrola plánovanej hĺbky resekcie. Anteriórna a posteriórna femorálna osteotómia skosenými rezmi. > Strana 16




2. Tibiálna osteotómia

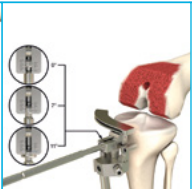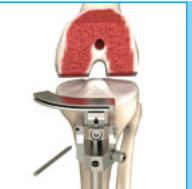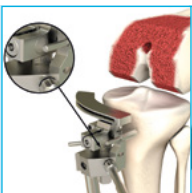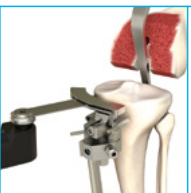				Aplikácia tibiálneho referenčného systému na anteriórny tibiálny kortex a zarovnanie. Nastavenie posteriórneho sklonu. Určenie kĺbovej línie a fixácia tibiálneho referenčného systému. > Strana 18
				Nastavenie hĺbky resekcie. Tibiálna osteotómia. Určenie veľkosti tibiálneho platôe. Poznámka Počas tibiálnej resekcie umiestnite reraktory na ochranu väzov. > Strana 19

3.1 Preparácia a implantácia: balanSys CR, UC a RP

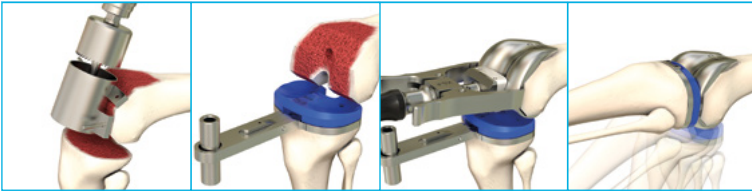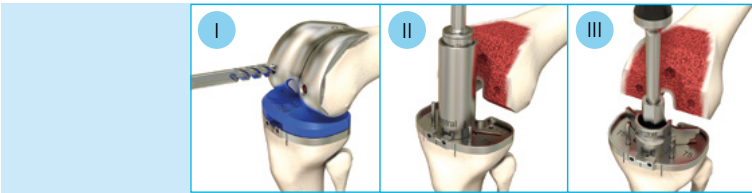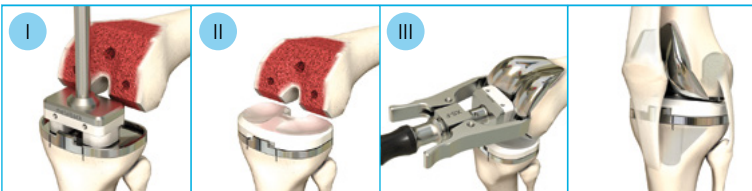				Preparácia trochleárnej drážky. Vloženie tibiálnej šablóny a skúšobnej PE vložky. Vloženie skúšobného femorálneho komponentu. Skúšobná redukcia kolenného kĺbu. > Strana 22
				I. Preparácia femorálnych ukotvovacích kolíkov II. Preparácia tibiálneho medulárneho priestoru III. Preparácia plutvičky > Strana 24
				I. Vloženie tibiálneho platô balanSys II. Vloženie vložky balanSys III. Vloženie femorálneho komponentu balanSys > Strana 25

3.2 Preparácia a implantácia: balanSys PS

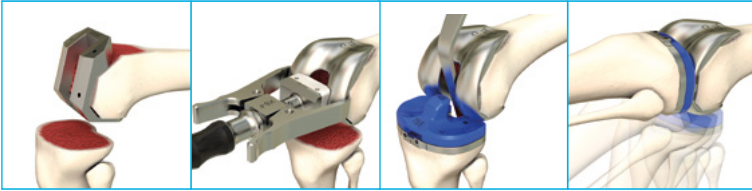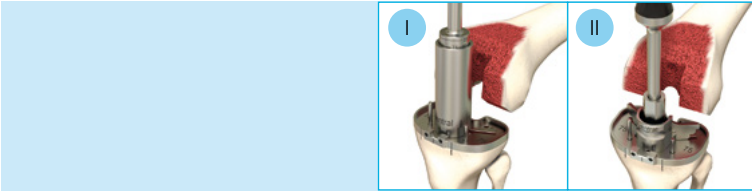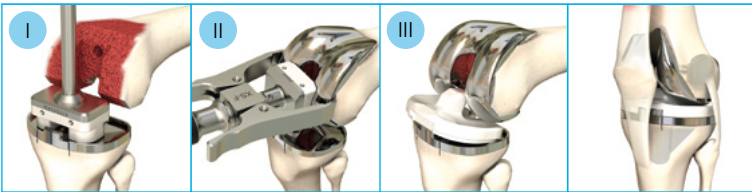
				Preparácia femorálneho boxu. Vloženie skúšobného femorálneho komponentu. Vloženie tibiálnej šablóny a PE skúšobnej vložky. Skúšobná redukcia kolenného kĺbu. > Strana 28
				I. Preparácia tibiálneho medulárneho priestoru II. Preparácia plutvičky > Strana 31
				I. Vloženie PS tibiálneho platô balanSys II. Vloženie PS femorálneho komponentu balanSys III. Vloženie PS vložky balanSys > Strana 32

Poznámka

Pílové čepele 1,27 mm sú kompatibilné s nástrojmi balanSys. Ohľadne pílových čepelí distribuovaných spoločnosťou Mathys si pozrite brožúru 336.030.032 «Sterilné pílové čepele».

Operačná technika

1. Femorálna osteotómia

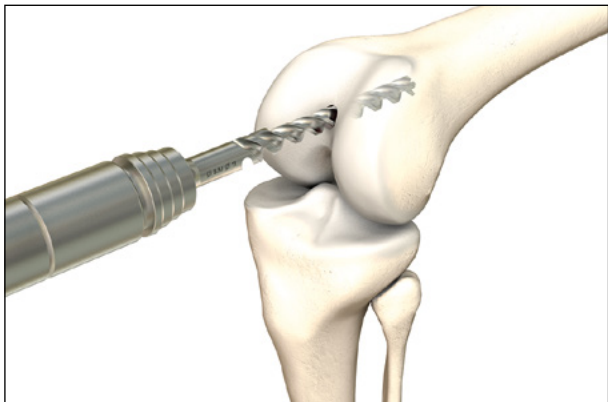


Obr. 1 Otvorenie medulárnej dutiny

Intramedulárne zarovnanie femorálnej resekcie

Otvorte medulárnu dutinu 8,5 mm vrtákom (obr. 1).


Poznámka

Femorálna medulárna dutina sa musí otvoriť v správnom axiálnom predĺžení svojho smeru, aby sa zabránilo nesprávnej implantácii vo flexii a extenzii.

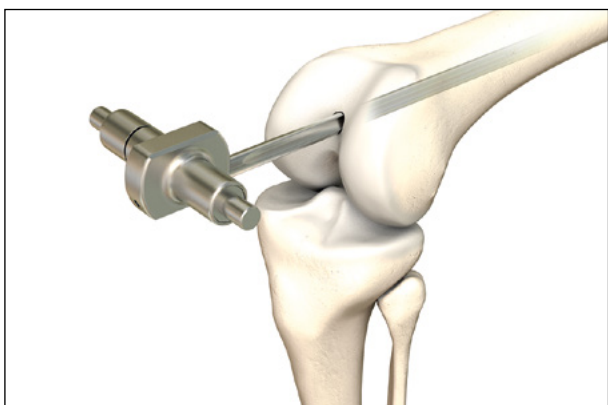

Obr. 2 Zavedenie intramedulárnej tyče

Zavedte intramedulárnu tyč pomocou rukoväte tibiálneho referenčného systému. Najprv sa musia odstrániť existujúce osteofyty (obr. 2).

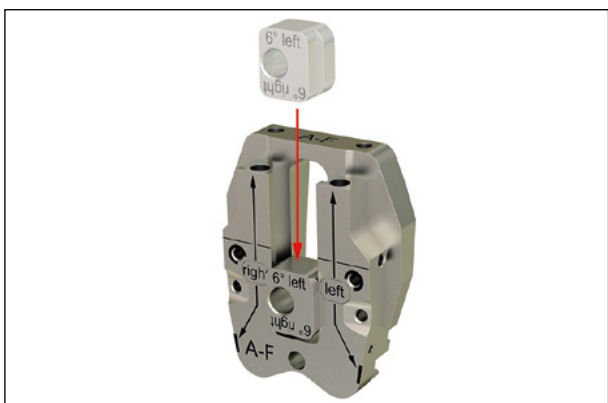


Obr. 3 Zavedenie bloku zarovňavania osi LIS

Umiestnenie femorálnej vodiacej pomôcky na určovanie veľkosti / rotácie

Vyberte femorálnu vodiacu pomôcku na určovanie veľkosti/rotácie (XS–D alebo A–F). Zavedenie bloku zarovňavania osi LIS (3°, 5°, 6°, 7° alebo 9°) do femorálnej vodiacej pomôcky na určovanie veľkosti/rotácie (obr. 3). Uhol bloku zarovňavania osi zodpovedá predoperačne určenému uhlu medzi mechanickou a anatomicou femorálnou osou (uhol femorálnej valgozity).

Poznámka

Zavedte blok zarovňavania osi podľa pravej alebo ľavej nohy. «Left» (ľavá) znamená ľavé koleno, «right» (pravá) znamená pravé koleno. Orientácia písmen na bloku zarovňavania osi musí byť identická s tou na femorálnej vodiacej pomôcke na určovanie veľkosti / rotácie.

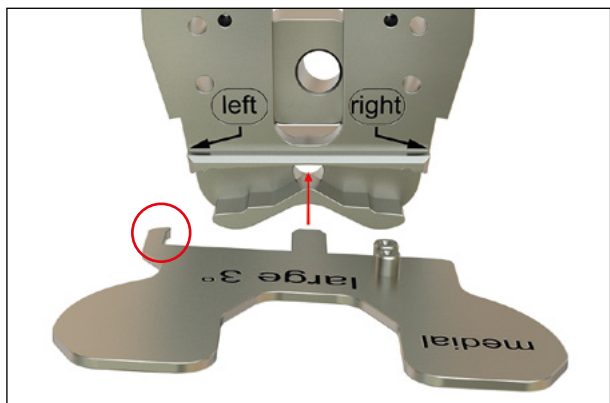


Obr. 4 Zavedenie rotačného ložiska femuru

Na nastavenie rotácie sú k dispozícii 3 uhly. V závislosti od uhla sa môže zvoliť rotačné ložisko femuru 0°, 3° alebo 5°.


Zavedenie želaného rotačného ložiska femuru, malého alebo veľkého (obr. 4).

Poznámka

Indikátor rotačného ložiska femuru musí ukazovať na príslušne špecifikovanú stranu (pravú alebo ľavú) na femorálnej vodiacej pomôcke na určovanie veľkosti/rotácie. Pre ľavé koleno musí indikátor ukazovať na «left» (ľavá), pre pravé koleno na «right» (pravá) (obr. 4 a 5).

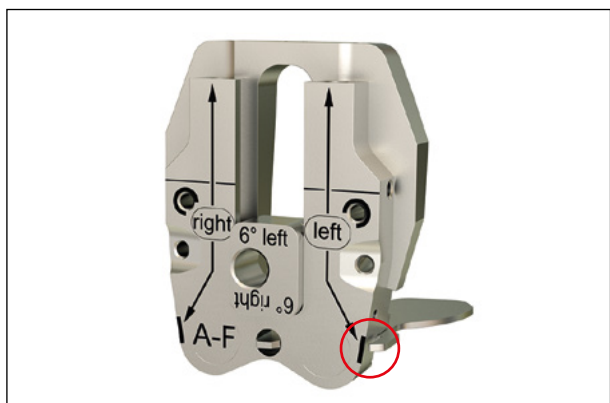


Obr. 5 Nastavte pozíciu indikátora

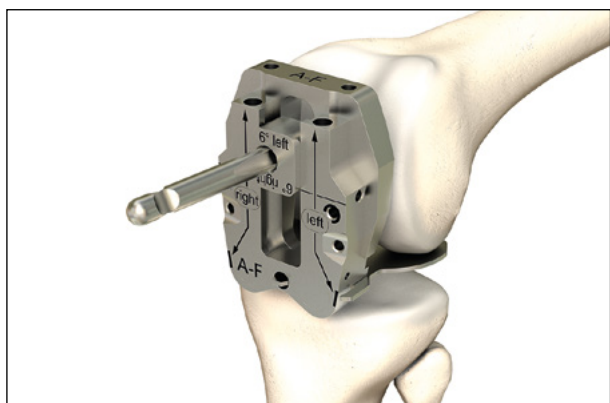



Obr. 6

Tlačte femorálnu vodiacu pomôcku na určovanie veľkosti/rotácie ponad intramedulárnu tyč cez vyvrtanú dierku v bloku zarovnávania osi, až kým sa nástroj nezastaví na distálnej kondyle (obr. 6).

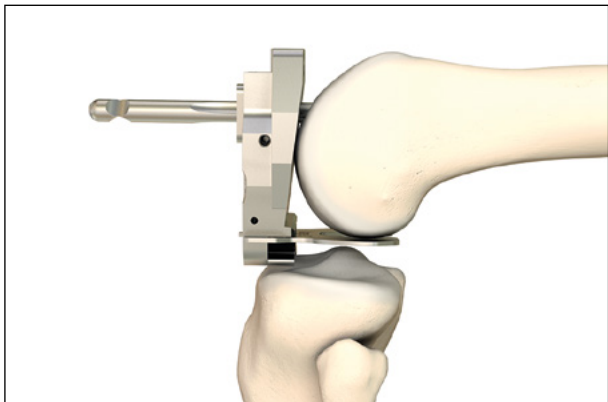


Obr. 7

Tlačte nástroj anteriórnym smerom, až sa kým rotačné ložisko femuru nedotkne posteriórných kondýl na oboch stranách (obr. 7).

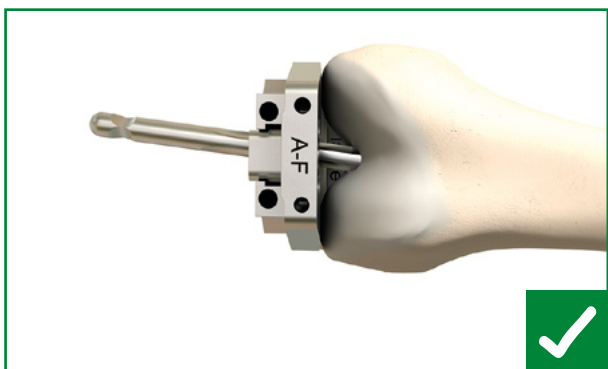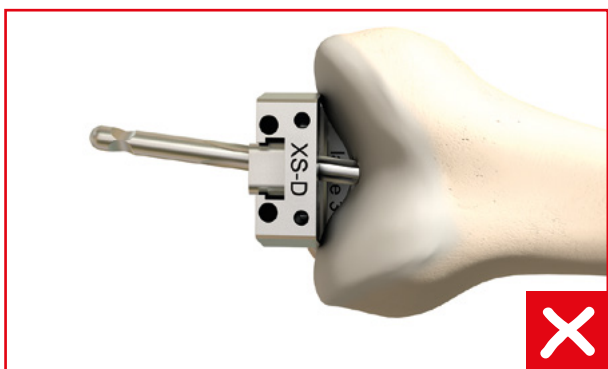

Obr. 8


Ak sa femorálna vodiaca pomôcka na určovanie veľkosti/rotácie XS D prešmykne medzi kondylami v štrbine, musí sa zvoliť pomôcka na určovanie veľkosti/rotácie A F (obr. 8).

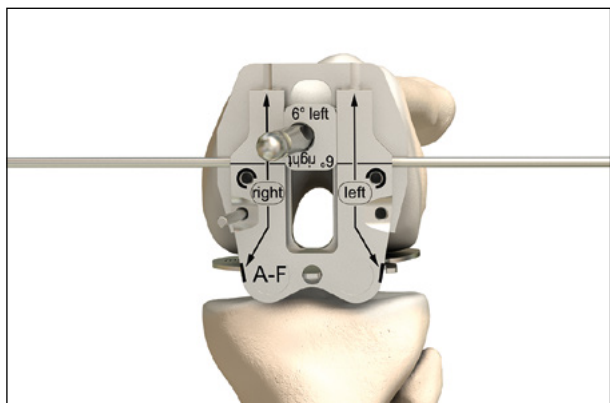

Obr. 9

Femorálna vodiaca pomôcka na určovanie veľkosti/rotácie sa môže príslušne nastaviť pomocou vrysovanej čiary a vložených kolíkov na predĺženie línie k transepikondylárnej osi (obr. 9).

Po nastavení sa femorálna vodiaca pomôcka na určovanie veľkosti/rotácie zafixuje pomocou kolíka cez šikmé dierky v spodnej časti nástroja. Dierka sa predvrtá pomocou 3,2 mm vrtáka.

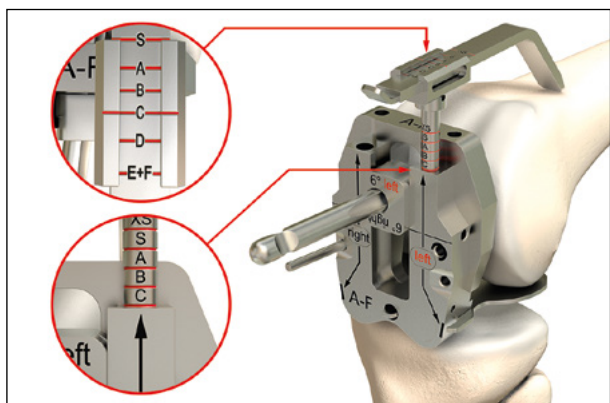

Obr. 10 Stanovenie femorálnych veľkostí

Femorálna veľkosť sa stanoví pomocou mierky veľkosti LIS, ktorá sa umiestni na najvyššom bode femorálnej metafýzy.

Zaved'te mierku veľkosti LIS na príslušnej strane (vpravo/vľavo) femorálnej vodiacej pomôcky na určovanie veľkosti/rotácie (obr. 10).

Veľkosť femuru sa odčíta na anteriórnej a distálnej stupnici mierky veľkosti LIS.


1. Odčítajte značku na distálnej stupnici.
2. Preneste odčítanú hodnotu na anteriórnu stupnicu.
3. Tieto dve veľkosti sa musia zhodovať.

Poznámka

Veľkosť femuru musí zodpovedať veľkosti tibia (príloha 4).

Poznámka

Femorálny palpátor LIS sa proximálne dotýka pozície, na ktorej bude spočívať špička anteriórnej femorálnej platničky po implantácii.

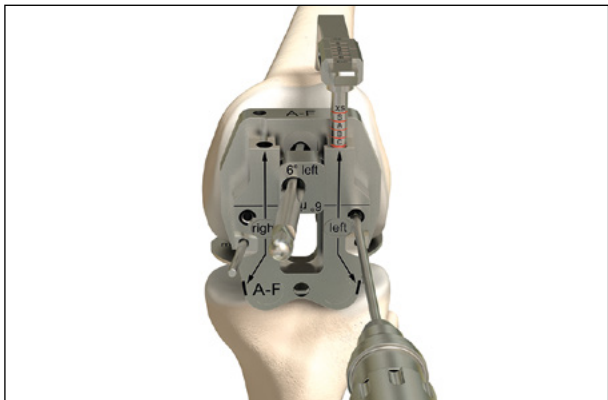


Obr. 11 Vŕtanie dvoch prijímacích dierok pomocou 3,2 mm vŕtáka.

Po určení veľkosti femuru sa vyvŕtajú dierky na prijatie rezného bloku 4in1 (obr. 11).

Poznámka


Dva vývrty prijímacích dierok musia byť dostatočne hlboké, aby ostali viditeľné aj po distálnej femorálnej resekcii.

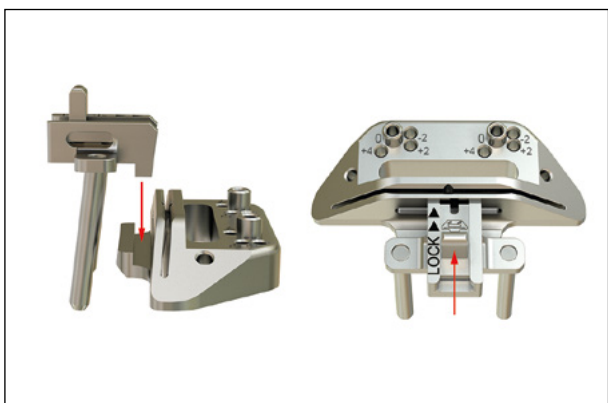

Obr. 12


Umiestnite distálny rezný blok na držiak LIS.

Vtlačte bežec do držiaka LIS smerom dopredu, až kým nezapadne na svoje miesto (obr. 12).

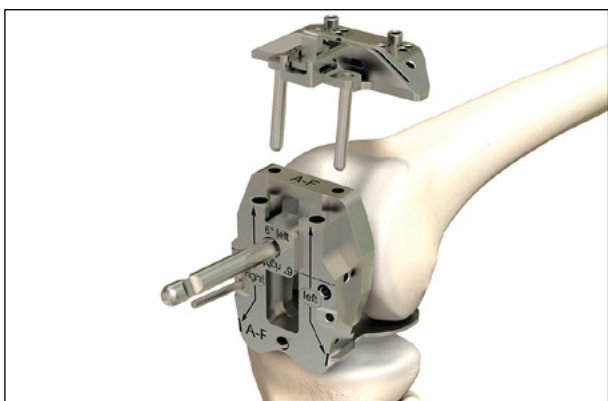

Obr. 13


Zaved'te držiak LIS s distálnym rezným blokom do vŕtacej dierky femorálnej vodiacej pomôcky na určovanie veľkosti/rotácie (obr. 13).

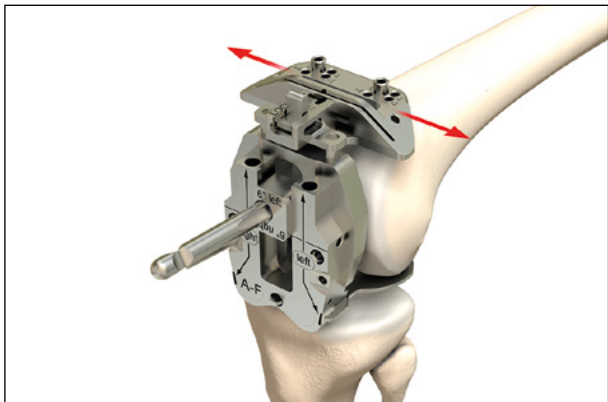

Obr. 14 Umiestnenie distálneho rezného bloku

Distálny rezný blok sa môže posúvať mediolaterálne na základe anatomickej situácie (obr. 14).

Distálny rezný blok sa musí opierať o anteriórnu kondylu.

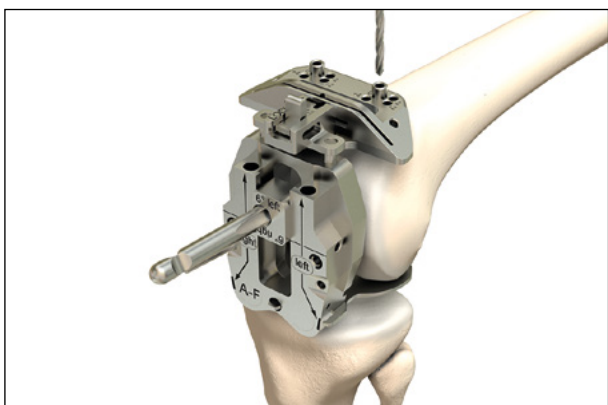

Obr. 15 Predvrtanie a nastavenie 2 kolíkov

Predvrtanie dvoch referenčných dierok pre distálny rezný blok. Treba venovať pozornosť značke 0. Vložte dva kolíky do anteriórne predvrtaných dierok (obr. 15). Odstránenie nástrojov v nasledujúcom poradí:

1. Uvoľnite posúvač na držiaku LIS, potom ťahajte držiak od femorálnej vodiacej pomôcky na určovanie veľkosti/rotácie LIS.
2. Potiahnite fixačné koliesko femorálnej vodiacej pomôcky na určovanie veľkosti/rotácie.
3. Odstráňte femorálnu vodiacu pomôcku na určovanie veľkosti/rotácie a rotačné ložisko femuru.
4. Vytiahnite intramedulárnu tyč.

Skontrolujte plánovanú rovinu distálnej resekcie pomocou meracej platničky (obr. 16).


Ak je to potrebné, posuňte distálny rezný blok o +2/+4/-2 mm.

Poznámka

Distálnym rezným blokom sa môže pohybovať na získanie konštantného napätia väzov vo flexii a extenzii.

Poznámka

Na zaistenie optimálnej stability sa má distálny rezný blok zafixovať dodatočným šikmým kolíkom.

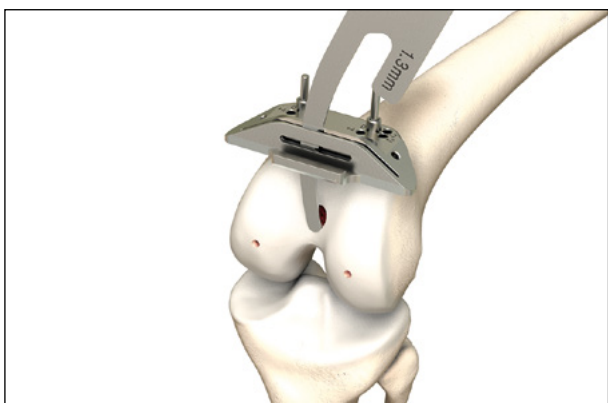


Obr. 16 Kontrola plánovaného povrchu distálnej resekcie



Obr. 17 Vykonanie distálnej femorálnej resekcie

Vykonanie distálnej femorálnej resekcie (obr. 17).


Odstránenie šikmých kolíkov a distálneho rezného bloku.

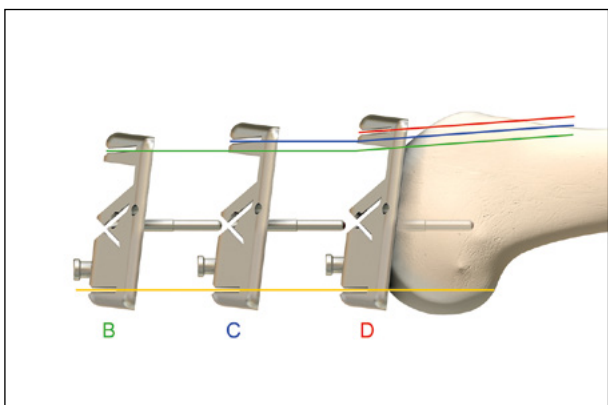

Obr. 18 Nastavenie veľkosti femuru výmenou rezného bloku

Poznámka


Femorálne komponenty balanSys sa od jednej veľkosti k ďalšej **odlišujú o 3 mm v AP dimenzii**. Vzdialenosť medzi posteriorným rezom a fixáciou kolíka je presne rovnaká v celom rozsahu rezných blokov, takže flexná medzera je rovnaká pre všetky veľkosti (obr. 18).

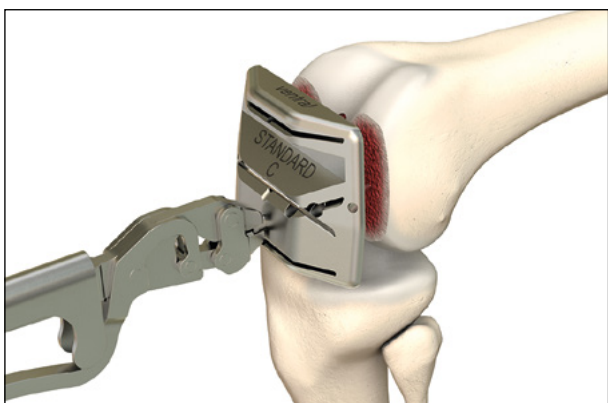

Obr. 19 Vloženie rezného bloku 4v1

Vykonanie anteriórnej a posteriórnej femorálnej osteotómie skosenými rezmi

Umiestnite zvolený rezný blok 4v1 do dvoch predvrtaných dierok pomocou klieští, až kým plocha neprilieha na povrchu distálnej osteotómie (obr. 19).

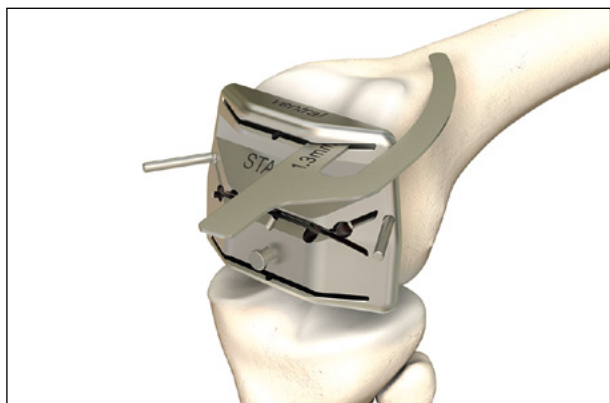


Obr. 20

Skontrolujte plánovanú rovinu resekcie pomocou referenčnej platničky (obr. 20). Mediolaterálna fixácia rezného bloku 4v1 dvoma kolíkmi na stabilizáciu.

Poznámka

Rezný blok 4v1 sa môže posúvať o 1,5 mm anteriórne a 1,5 mm posteriórne. Predvrtajte zodpovedajúce diery cez rezný blok 4v1. Odstráňte rezný blok 4v1 pomocou klieští a umiestnite ho v nových predvrtaných diery, až kým neprilieha na povrchu distálnej osteotómie.

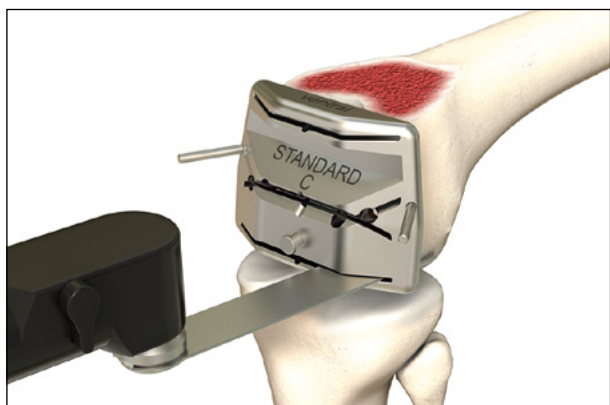

Obr. 21 Vykonalie osteotómií

Vykonalie osteotómií (obr. 21) v nasledujúcom poradí:

1. Anteriórna osteotómia
2. Posteriórna osteotómia
3. Skosené rezy

Poznámka


Posteriórne osteotómie sa majú vykonávať s kolenom v 90° flexii, pretože tým sa zabráni dotýkaniu povrchu tibia pilovým kotúčom a posteriórne mäkké tkanivo sa posunie preč od posteriórnych kondýl

Odstránenie rezného bloku 4v1 pomocou klieští.

Odstránenie všetkých okrajových kostí a osteofytov, hlavne v oblasti posteriórnych kondýl.

Operačná technika


2. Tibiálna osteotómia

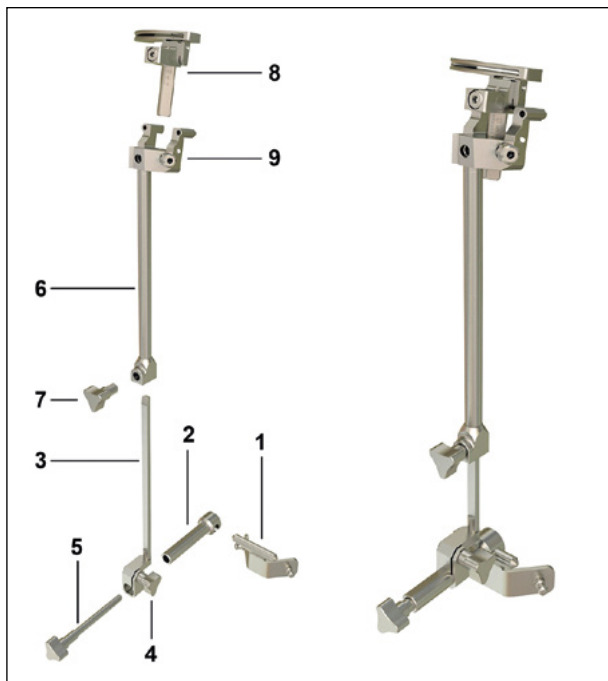

Obr. 22

Montáž extramedulárneho tibiálneho zarovnávacieho referenčného systému (obr. 22)

Nasadte držiak členka (1) na distálny konektor (2). Nasadte distálnu cieľovú pomôcku (3) na distálny konektor (2) a zafixujte držiak členka s tibiálnou uzamykacou skrutkou (5). Nechajte spojovaciu skrutku (4) mierne otvorenú. Spojte distálnu cieľovú pomôcku (3) s proximálnou cieľovou pomôckou (6) a pripevnite spojovaciu skrutku (7). Nasadte vodiacu pomôcku rezania (8) na proximálnu cieľovú pomôcku (6). Nastavte tibiálnu pomôcku rezania na nulu a zatiahnite skrutku (9) hexagonálnym skrutkovačom.

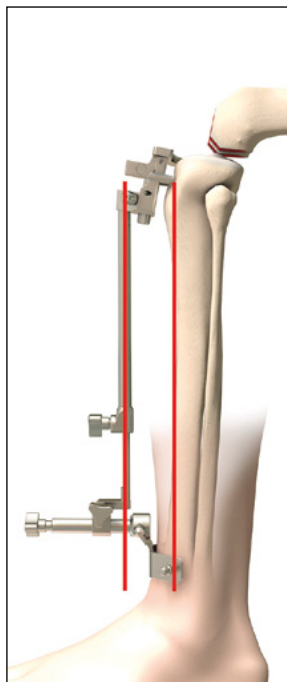


Obr. 23 Aplikácia tibiálneho referenčného systému



Obr. 24 Zarovnanie tibiálneho referenčného systému

Polohovanie extramedulárneho tibiálneho zarovnávacieho referenčného systému

Tibiálny referenčný systém sa umiestni paralelne k anteriórnemu tibiálnemu kortexu (obr. 23). Zarovnajte tibiálny referenčný systém distálne s druhou metatarzofalangeálnou kosťou a zafixujte ho silikónovou páskou (obr. 24). Na správne rotačné zarovnanie musí byť stred tibiálnej vodiacej pomôcky rezania zarovnaný k prechodu mediálnej časti až strednej tretiny tibiálnej tuberozity. Alternatívne sa môže tibiálna vodiaca pomôcka rezania zarovnať paralelne k línii medzi posteriórnymi hranami mediálneho a laterálneho tibiálneho platô.

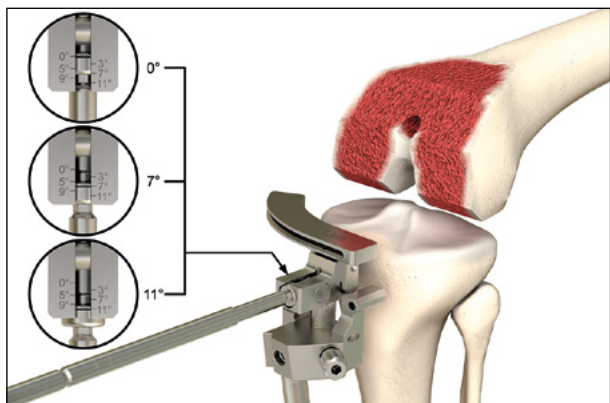


Obr. 25 Prispôsobenie dorzálneho sklonu

Nastavenie posteriórneho sklonu

Na nastavenie posteriórneho sklonu použite hexagonálny skrutkovač podľa anatómie (hmatová platnička paralelne k najlepšie zachovanému povrchu tibiálneho kĺbu) (obr. 25).

Poznámka

Autori odporúčajú posteriórny sklon 7° pre implantát zachovávajúci skrížený väz a až 5° pre implantát nahradzujúci PCL.

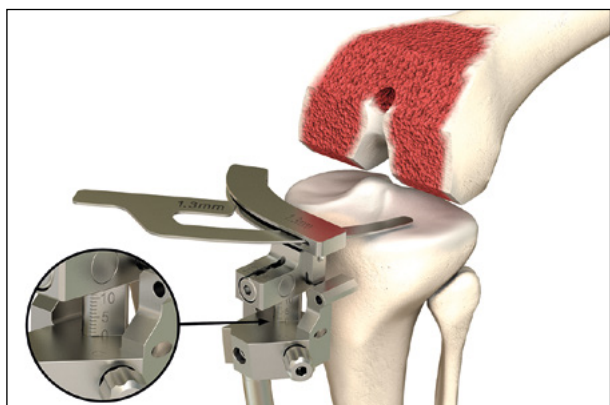


Obr. 26 Nastavenie originálnej línie kĺbu

Určte originálnu líniu kĺbu na úrovni najlepšie zachovaného povrchu tibiálneho kĺbu pomocou referenčnej platničky alebo tibiálneho palpátora (obr. 26).



Obr. 27 Fixácia tibiálneho referenčného systému

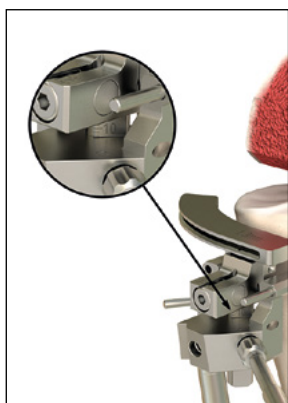

Obr. 28 Nastavenie hĺbky resekcie

Fixácia tibiálneho referenčného systému

Pripevnite tibiálny referenčný systém proximálne s aspoň dvoma kolíkmi v špecifikovaných dierkach (šikmé a rovné) (obr. 27). Dierky sa predvrtávajú 3,2 mm vŕtačkou.

Tibiálna osteotómia

Pohnite tibiálnou vodiacou pomôckou rezania 6–8 mm distálne pomocou hexagonálneho skrutkovača (obr. 28).

Skontrolujte nastavenú úroveň osteotómie pomocou referenčnej platničky.




Obr. 29 Vykonanie tibiálnej osteotómie

Vykonanie tibiálnej osteotómie (obr. 29) a odstránenie zvyšku posteriórneho menisku.t.

Poznámka

Počas tibiálnej resekcie umiestnite reraktory na ochranu väzov.

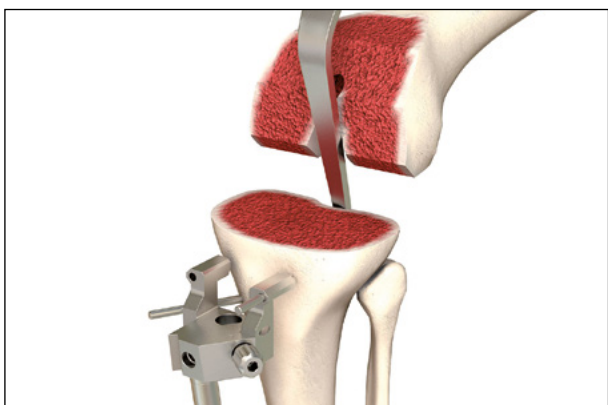


Obr. 30

Odstráňte tibiálnu vodiacu pomôcku rezania (obr. 30).

Poznámka

Ak sa odstráni tibiálny referenčný systém, kolík sa má nechať na mieste pre budúcu referenciu pre prípad, že bude potrebná dodatočná tibiálna osteotómia.

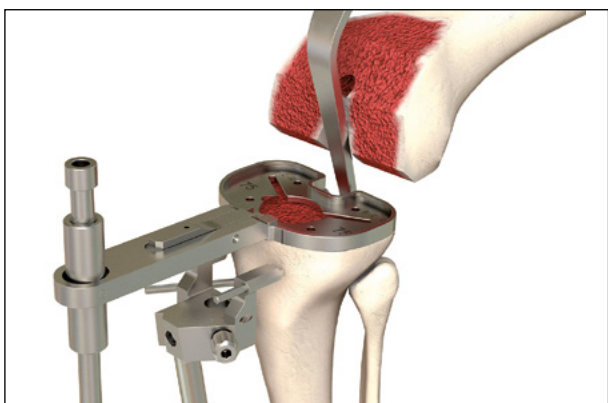


Obr. 31 Určenie veľkosti tibiálnej protézy

Určenie veľkosti tibiálneho implantátu

Určte veľkosť tibiálnej protézy pomocou tibiálnej šablóny s ohľadom na rotačné zarovnanie (obr. 31). Cieľom je poskytnúť maximálne pokrytie povrchu osteotómie. Použite nastavovaciu tyč na kontrolu osi a sklonu reznej roviny.


Okrem extramediálne zarovnanej tibiálnej osteotómie je možné aj intramedulárne zarovnanie (pozri prílohu 1).

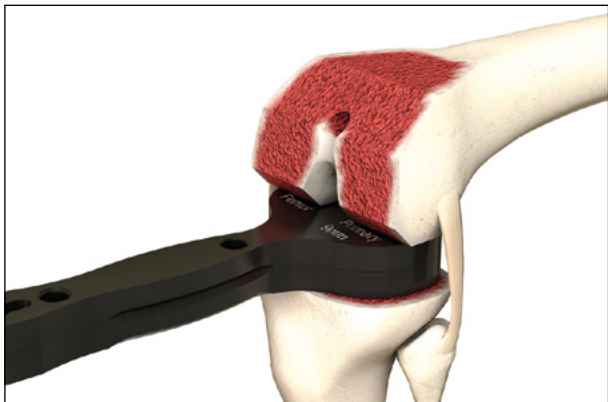

Obr. 32 Kontrola flexnej medzery

Kontrola flexnej medzery


- Vloženie dištančného bloku do flexnej medzery pomocou vložky dištančného bloku, ktorá bola predtým definovaná pri extenzii (obr. 32)
- Vyhodnotenie stability väzov, mediálne a laterálne

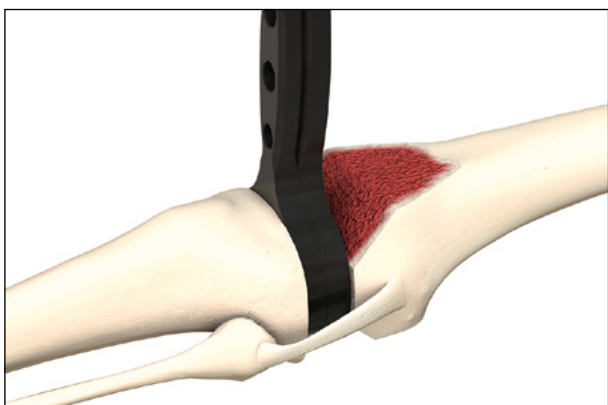

Obr. 33 Kontrola extenznej medzery

Kontrola extenznej medzery

Overenie extenznej medzery vložím dištančného bloku s príslušnou vložkou dištančného bloku (obr. 33).

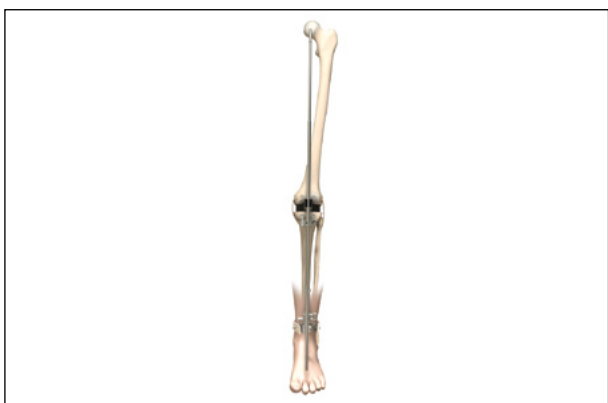


Obr. 34

Skontrolujte mechanickú os (obr. 34), mediálnu a laterálnu stabilitu ako aj schopnosť extenzie. Ak je priestor príliš tesný, môže sa ďalšia osteotómia vykonať na distálnom femure alebo na tibií.

Odstránenie dištančného bloku.

Operačná technika

3. Preparácia a implantácia

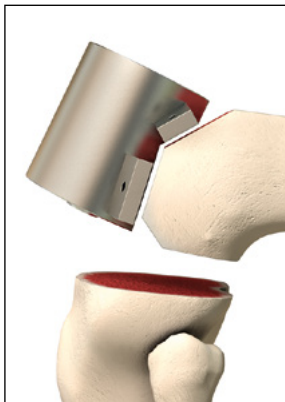

Obr. 35 Polohovanie trochleárnej objímky


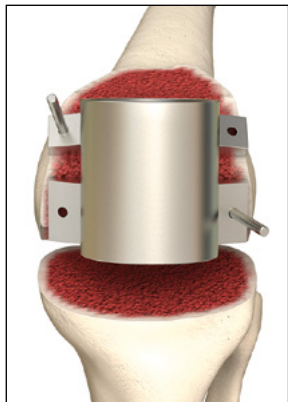


Fig. 36 Fixácia trochleárnej objímky



Obr. 37

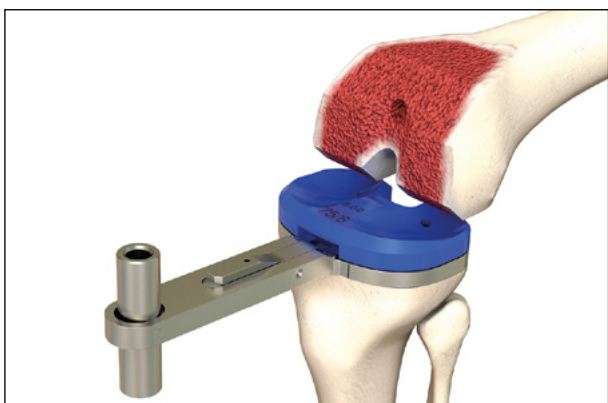

Obr. 38 Vloženie tibiálnej skúšobnej protézy

3.1 balanSys CR, UC a RP

Femorálna preparácia

Trochleárna objímka sa umiestni na femure (obr. 35) a pripevní aspoň dvoma kolíkmi diagonálne (obr. 36).

Poznámka

Autori odporúčajú umiestnenie trochleárnej objímky mierne laterálne pre optimálne sledovanie pately.


Trochlea sa skosí stlačením trochleárneho výstružníka na doraz (obr. 37).

Odstráňte všetky nástroje.

Vloženie určenej tibiálnej šablóny a PE skúšobnej vložky (obr. 38).


Poznámka

Musí byť zaistené, aby zvolená šablóna poskytovala želané pokrytie tíbie a pritom zohľadňovala veľkosť zvoleného femorálneho komponentu.

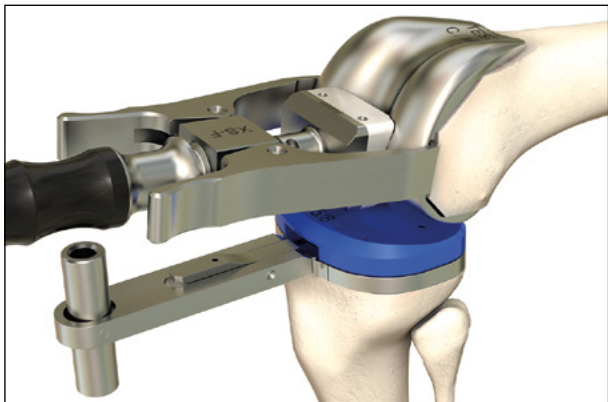


Obr. 39 Vloženie skúšobného femorálneho komponentu

Vloženie skúšobného femorálneho komponentu (obr. 39) pomocou femorálneho držiaka a fixácia femorálnym dorážačom (obr. 40).

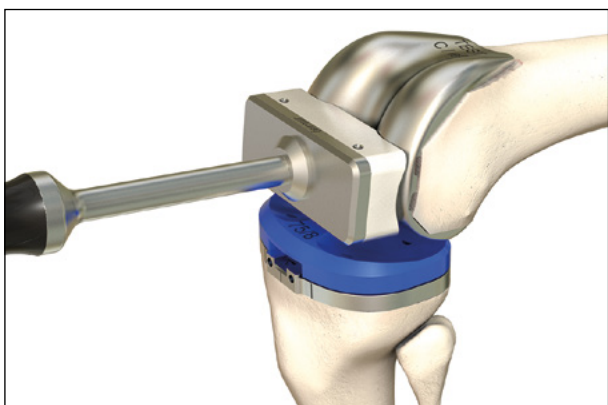

Obr. 40 Umiestnenie s femorálnym dorážačom

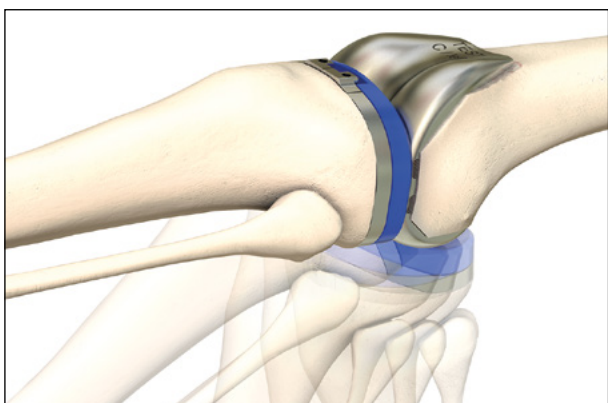

Obr. 41 Test celého pohybového rozsahu kolenného kĺbu


Repozícia extenzného aparátu.

Poznámka

Ak sa vymieňa patela, autori odporúčajú vykonať osteotómiu pately a umiestnenie patelárneho skúšobného komponentu pred testovaním funkcie kolena.

So všetkými provizórnymi komponentami na mieste sa koleno testuje ohľadne maximálneho rozsahu pohybu, stability, kinematických vlastností a mobility (obr. 41).


Anteriórne označenie polohy tibiálnej šablóny elektrochirurgickým nožom na túbii.

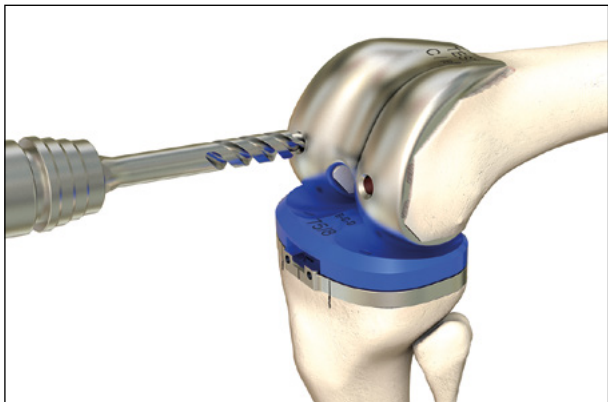

Obr. 42 Vrtanie pre femorálne ukotvovacie kolíky

Vrtanie dvoch dierok na femorálne ukotvovacie kolíky (obr. 42).

Odstránenie skúšobného femorálneho komponentu a PE skúšobnej vložky.

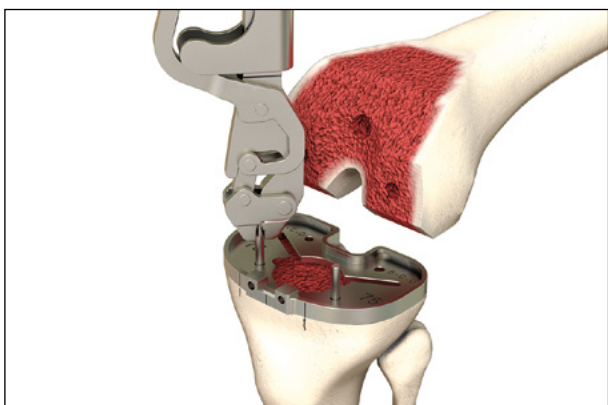


Obr. 43 Fixácia tibiálnej šablóny

Tibiálna preparácia

Fixácia na tibiálnej šablóne dvoma kolíkmi (obr. 43) zodpovedajúca značkám na tibiálnej hlavici.



Obr. 44a

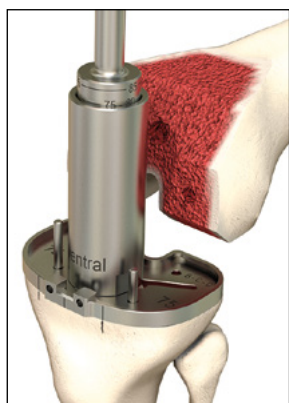


Obr. 44b


Tibiálny výstružník sa musí pripojiť k elektrickej vrtačke. Umiestnite vodiacu pomôcku výstružníka na tibiálnu šablónu. Tri kolíky sa musia umiestniť do otvorov tibiálnej šablóny. Všimnite si označenie **«ventral»**. Uzamknite vodiacu pomôcku výstružníka k tibiálnej šablóne miernym otočením výstružníka v smere hodinových ručičiek až na doraz. V tejto polohe je zostava vodiacej pomôcky výstružníka-tibiálnej šablóny uzamknutá (obr. 44a). Vyvrtajte tibiálny medulárny priestor (obr. 44b).

Hĺbka musí zodpovedať príslušnej dĺžke ukotvovacieho drieru predtým určeného tibiálneho platá balanSys PS. Značky veľkostí sú vyryté do výstružníka.


Odstránenie vodiacej pomôcky výstružníka.

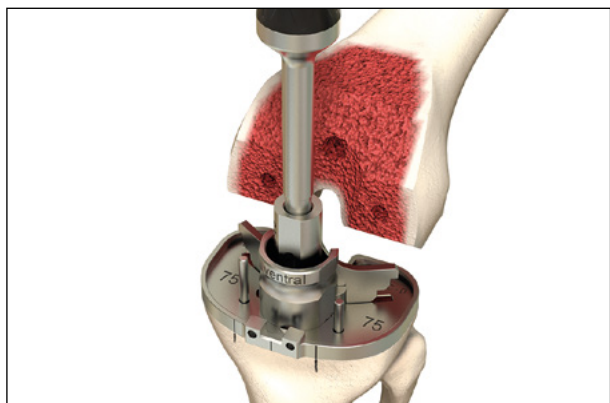

Obr. 45 Zarazenie ukotvovacej skrutky

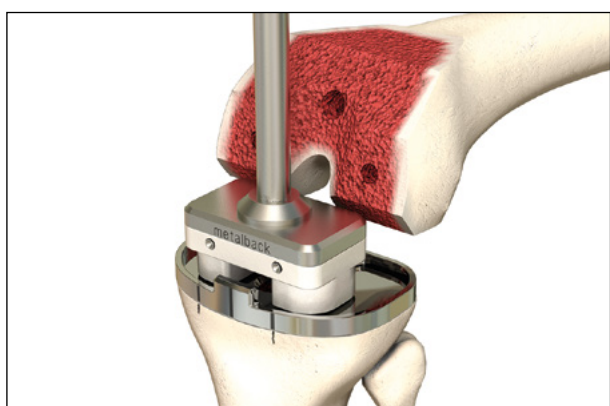

Obr. 46

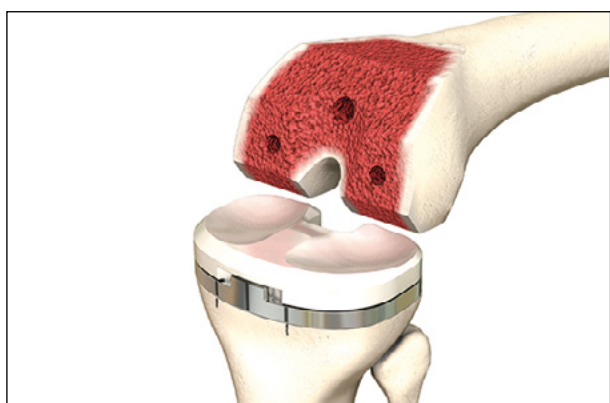

Obr. 47

Montáž dláta s plutvičkou k rukoväti.

Umiestnite vodiacu pomôcku centrovania dláta na tibiálnu šablónu. Tri kolíky sa musia umiestniť do otvorov tibiálnej šablóny. Všimnite si označenie **«ventral»**. Uzamknite vodiacu pomôcku centrovania dláta k tibiálnej šablóne miernym otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz. V tejto polohe je zostava vodiacej pomôcky centrovania dláta-tibiálnej šablóny uzamknutá. Zostavu dláta s plutvičkou dorážajte opatrne, aby sa zabránilo fraktúre na túbii (obr. 45).

Pri používaní chirurgickej techniky s mediálnym prístupom sa počas zavádzania dláta s plutvičkou musí dbať na ochranu laterálneho kolaterálneho väzu a popliteálnej šľachy.

Dorážať, až kým nástroj nedosiahne dno tibiálnej šablóny. Hĺbky plutvičiek sú definované veľkosťou tibiálnej šablóny.

Odstráňte všetky zvyšné nástroje.


Vyžaduje sa dôkladné čistenie povrchov osteotómie (napr. pomocou pulzového vyplachovania).

Konečná implantácia


Cement sa má nanášať v skorej tekutej fáze. Postupujte podľa pokynov pre špecifické kostné cementy.

Na bezpečnú fixáciu tibiálneho platô v kosti je potrebné, aby bola zadná tibiálna strana úplne zacementovaná v tekutej fáze cementu. Driek a plutvičky sa môžu alebo nemusia zacementovať.

Neúplné zacementovanie a zatlačenie tibiálneho platô môžu viesť k predčasnému uvoľneniu protézy. Okrem toho môže aj cementovanie v pokročilých fázach polymerizácie viesť k predčasnému uvoľneniu protézy.

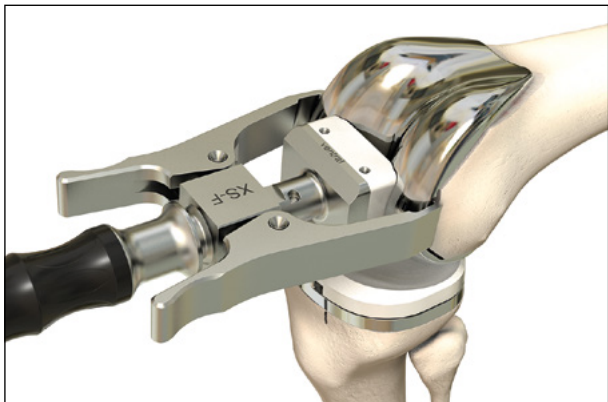

Obr. 48

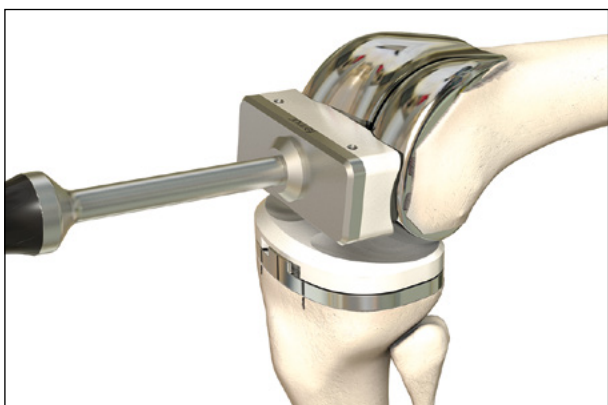

Obr. 49



Obr. 50

Poznámka


Je potrebné zvážiť opatrnú aplikáciu cementu, aby sa zabránilo nadbytočnému množstvu cementu na posteriórnych častiach femuru a femorálnom komponente. Cement, ktorý sa vytláča posteriórne, je ťažké odstrániť.

Vloženie tibiálneho platá balanSys pomocou tibiálneho dorážača (obr. 46).


Vloženie vložky balanSys (obr. 47).

Vloženie femorálneho komponentu balanSys (cementovaný alebo necementovaný) pomocou femorálneho držiaka (obr. 48) a konečné zarazenie femorálnym dorážačom (obr. 49).


Noha má byť počas tvrdnutia kostného cementu v extenzii (obr. 50).

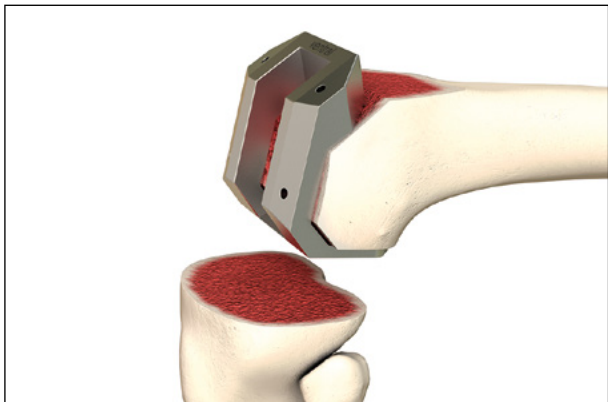

Obr. 51 Polohovanie vodiacej pomôcky rezania femorálneho boxu

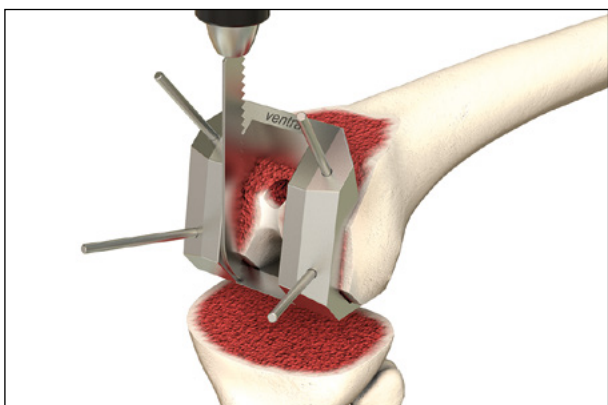

Obr. 52

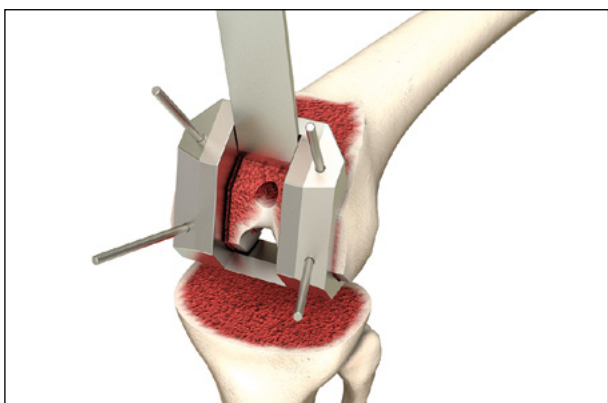

Obr. 53

3.2 balanSys PS

Femorálna preparácia

Približná veľkosť vodiacej pomôcky rezania femorálneho boxu sa umiestni na femure. Musí priliehať na resekované povrchy posteriórneho a distálneho femuru (obr. 51).


Poznámka

Autori odporúčajú umiestnenie vodiacej pomôcky rezania femorálneho boxu mierne laterálne pre optimálne sledovanie pately.

Vodiaca pomôcka sa bude dotýkať resekovaných kostných povrchov a musí sa zaistiť k femuru diagonálne štyrmi kolíkmi. Najviac posteriórne kolíky sa musia zaviesť prvé.

Vratná píla sa má používať a viesť pozdĺž stien otvoreného boxu na rezanie mediálnej a laterálnej strany a bázy interkondylárneho priestoru (obr. 52).


Báza interkondylárneho priestoru sa môže voliteľne vyrezať dlátom balanSys (obr. 53).

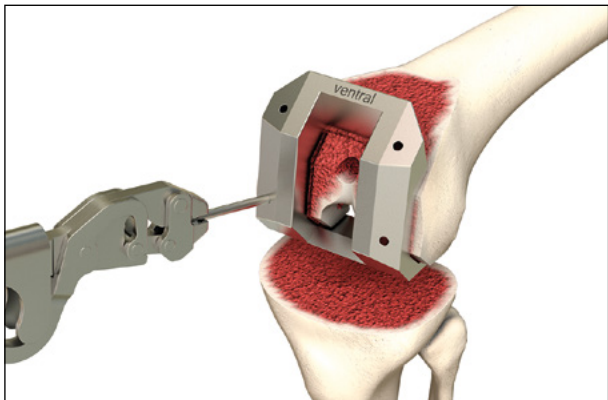

Obr. 54 Odstránenie kolíkov kliešťami

Po rezaní sa vodiaca pomôcka rezania femorálneho boxu a kolíky odstránia (obr. 54) v nasledujúcom poradí:


1. Kolíky
2. Vodiaca pomôcka rezania
3. Blok resekovanej kosti

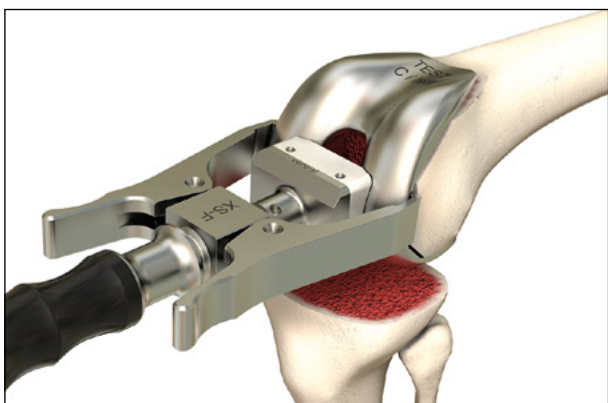

Obr. 55 Vloženie skúšobného femorálneho komponentu

Určenie konečnej pozície implantátu

Vloženie skúšobného femorálneho komponentu s femorálnym držiakom (obr. 55).

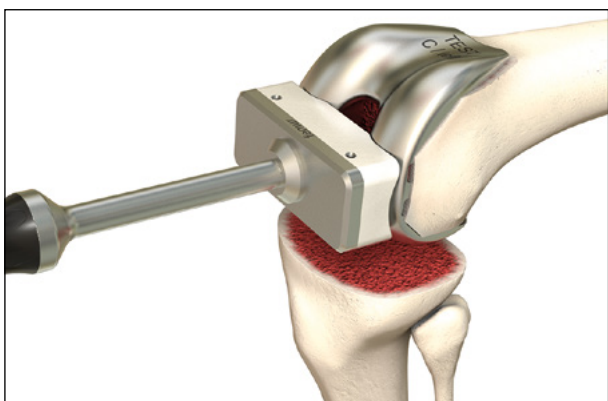

Obr. 56 Fixácia s femorálnym dorážačom

Konečná fixácia sa musí vykonať femorálnym dorážačom (obr. 56).



Obr. 57 Vloženie tibiálnej šablóny a PE skúšobnej vložky

Po zarazení femorálneho komponentu sa musí tibia anteriórne sublúxovať Hohmannovým reaktorom na umiestnenie tibiálnej šablóny a PS PE skúšobnej vložky (obr. 57).

Vloženie tibiálnej šablóny a PS PE skúšobnej vložky v predtým určenej veľkosti a polohe na resekovanú tibiú.

Poznámka


Musí byť zaistené, aby zvolená šablóna poskytovala želané pokrytie tíbie a pritom zohľadňovala veľkosť zvoleného femorálneho komponentu.

Repozícia extenzného aparátu.

Poznámka

Ak sa vymieňa patela, autori odporúčajú vykonať osteotómiu pately a umiestnenie patelárneho skúšobného komponentu pred testovaním funkcie kolena.

So všetkými provizórnymi PS komponentami na mieste sa koleno testuje ohľadne maximálneho rozsahu pohybu, stability, kinematických vlastností a mobility (obr. 58).

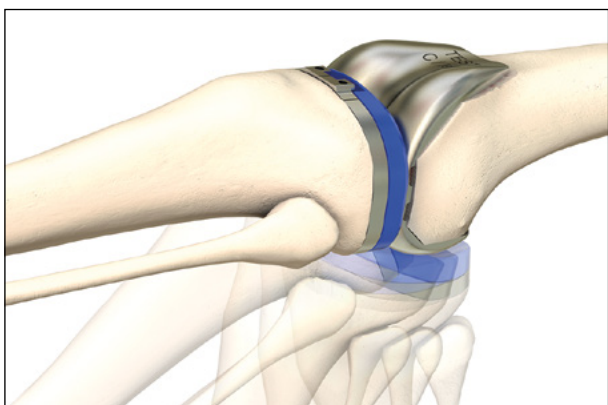

Obr. 58 Test celého pohybového rozsahu kolenného kĺbu

Tibiálny komponent má tendenciu sa ukladať do polohy, kde najlepšie artikuluje s femurom. Akékoľvek požadované úpravy je potrebné vykonať pred označením konečnej polohy.

Po určení konečnej polohy sa použije kauter na označenie polohy línií vyrytých laserom na anteriórnom okraji tibiálnej šablóny.


Odstránenie PE skúšobnej vložky a skúšobného femorálneho komponentu.




Obr. 59 Fixácia kolíkmí



Obr. 60 Poloha vodiacej pomôcky výstružníka

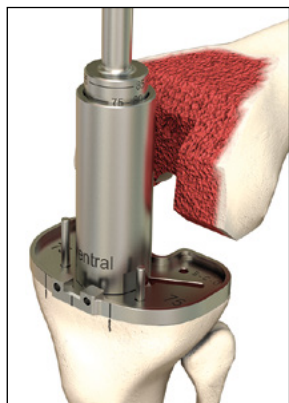

Obr. 61 Vyvrtajte tibiálny medulárny priestor

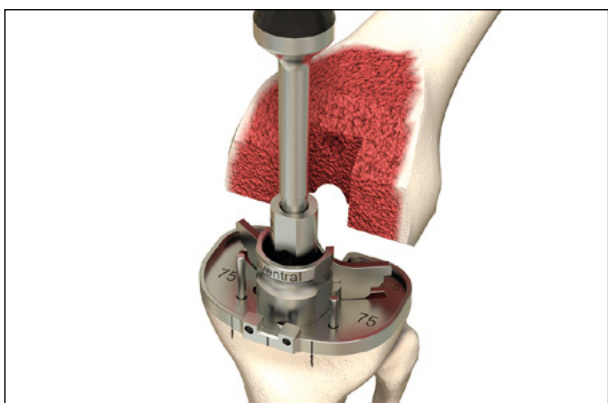

Obr. 62 Preparácia plutvičky

Tibiálna preparácia

Repozícia tibiálnej šablóny podľa značky kautera a fixácia dvoma anteriórnymi kolíkmi (obr. 59).

Tibiálny výstružník sa musí pripojiť k elektrickej vrtačke.

Umiestnite vodiacu pomôcku výstružníka na tibiálnu šablónu. Tri kolíky sa musia umiestniť do otvorov tibiálnej šablóny. Všimnite si označenie **«ventral»**. Uzamknite vodiacu pomôcku výstružníka k tibiálnej šablóne miernym otočením výstružníka v smere hodinových ručičiek až na doraz. V tejto polohe je zostava vodiacej pomôcky výstružníka-tibiálnej šablóny uzamknutá (obr. 60). Vyvrtajte tibiálny medulárny priestor (obr. 61).

Hĺbka musí zodpovedať príslušnej dĺžke ukotvovacieho drieru predtým určeného PS tibiálneho platô balanSys. Značky veľkostí sú vyryté na výstružníku.

Odstránenie vodiacej pomôcky výstružníka.


Montáž dláta s plutvičkou k rukoväti.

Umiestnite vodiacu pomôcku centrovania dláta na tibiálnu šablónu. Tri kolíky sa musia umiestniť do otvorov tibiálnej šablóny. Všimnite si označenie **«ventral»**. Uzamknite vodiacu pomôcku centrovania dláta k tibiálnej šablóne miernym otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz. V tejto polohe je zostava vodiacej pomôcky centrovania dláta-tibiálnej šablóny uzamknutá. Zostavu dláta s plutvičkou zarážajte opatrne, aby sa zabránilo fraktúre na túbii (obr. 62).


Pri používaní chirurgickej techniky s mediálnym prístupom sa počas zavádzania dláta s plutvičkou musí dbať na ochranu laterálneho kolaterálneho väzu a popliteálnej šľachy.

Dorážať, až kým nástroj nedosiahne dno tibiálnej šablóny. Hĺbky plutvičiek sú definované veľkosťou tibiálnej šablóny.


Odstráňte všetky zvyšné nástroje.

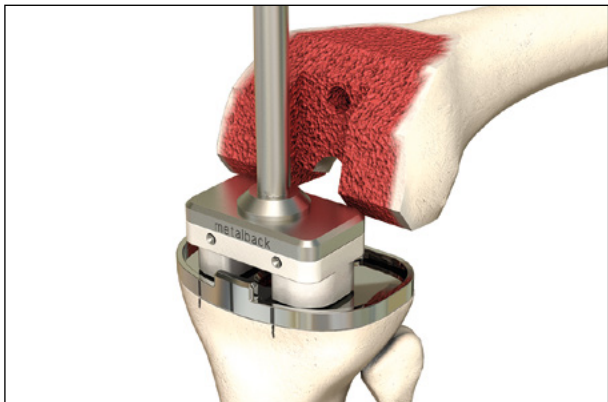

Obr. 63 Vložte tibiálny komponent a zarazte ho

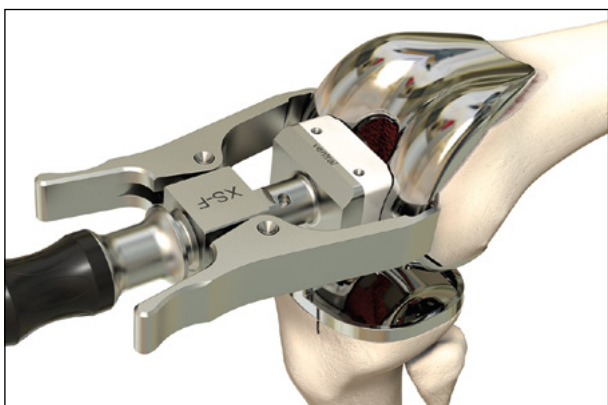

Obr. 64 Vloženie femorálneho komponentu

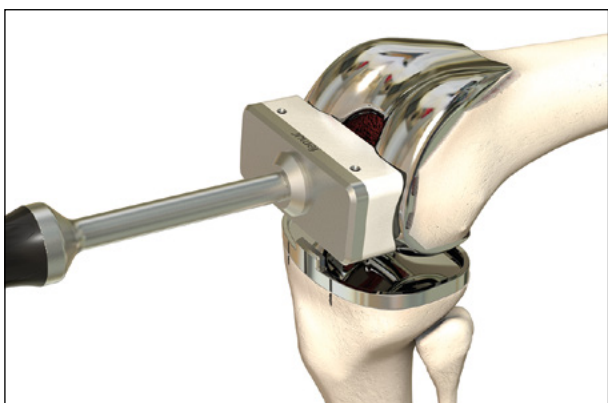

Obr. 65 Záverečné zarazenie femorálnym dorážačom

Konečná implantácia balanSys PS

Po zvolení implantátov sa odporúča jedna posledná kontrola na zaistenie toho, že femorálne komponenty, tibiálne komponenty a vložky sa zhodujú.

Cement sa má nanášať v skorej tekutej fáze. Postupujte podľa pokynov pre špecifické kostné cemeny.

Na bezpečnú fixáciu tibiálneho platô v kosti je potrebné, aby bola zadná tibiálna strana úplne zacementovaná v tekutej fáze cementu. Driek a plutvičky sa môžu alebo nemusia zacementovať.

Neúplné zacementovanie a zatlačenie tibiálneho platô môžu viesť k predčasnemu uvoľneniu protézy. Okrem toho môže aj cementovanie v pokročilých fázach polymerizácie viesť k predčasnemu uvoľneniu protézy.

Poznámka


Je potrebné zvážiť opatrnú aplikáciu cementu, aby sa zabránilo nadbytočnému množstvu cementu na posteriórnych častiach femuru a femorálnom komponente. Cement, ktorý sa vytláča posteriórne, je ťažké odstrániť.

Pri konečnej implantácii má byť koleno vo flexii.

Vložte PS tibiálne platô balanSys a zarazte ho pomocou tibiálneho dorážača (obr. 63).

PS femorálny komponent balanSys sa umiestni na femur pomocou femorálneho držiaka (obr. 64). Femorálne kondyly PS femorálneho komponentu balanSys sa musia chrániť, aby sa zabránilo poškriabaniu.

Záverečné zarazenie femorálnym dorážačom (obr. 65).

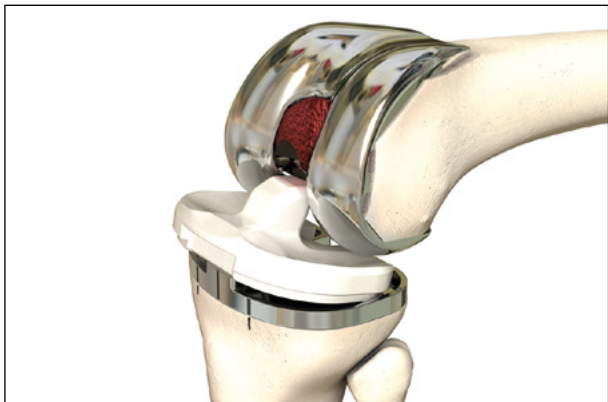

Obr. 66

Poznámka

Odstránenie nadbytočného cementu. Dôrazne sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť odstráneniu cementu pozdĺž proximálnej časti femorálneho komponentu a femorálneho boxu. Povrch tibiálneho plató sa musí očistiť.

Vloženie PS vložky balanSys (obr. 66).



Obr. 67


Noha má byť počas tvrdnutia kostného cementu v extenzii (obr. 67).

Poznámka

Po vložení vložky a stvrdnutí kostného cementu sa má venovať zvýšená pozornosť odstráneniu akéhokoľvek zvyšného cementu vo vnútri femorálneho boxu.

Príloha


1 – Intramedulárna tibiálna osteotómia

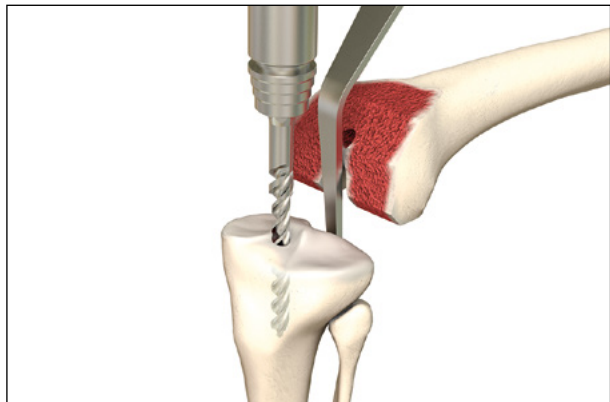

Obr. 68 Otvorenie medulárneho kanála


Tibiálna osteotómia sa môže vykonať aj použitím intramedulárneho zarovnanie.

Medulárny kanál sa otvorí v pozdĺžnej osi na eminentii 8,5 mm vŕtačkou (obr. 68).

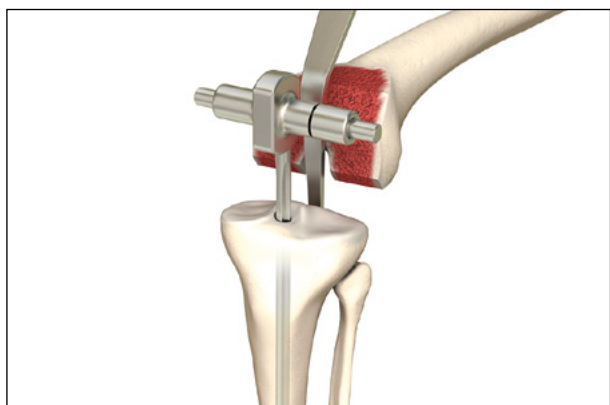

Obr. 69

Pomalé vkladanie Trs. intramedulárnej tyče (obr. 69).

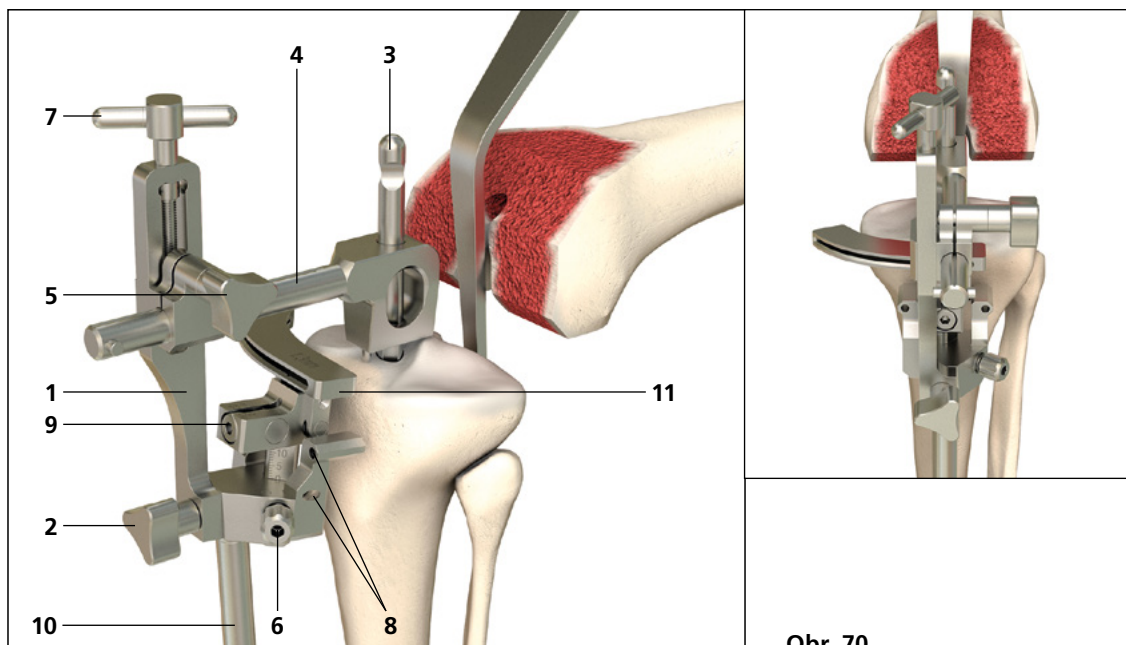

Obr. 70

Montáž intramedulárne zarovnaného tibiálneho referenčného systému (obr. 70)

- Spojte intramedulárny tibiálny referenčný systém (1) s Trs. proximálnou zameriavacou pomôckou (10)
- Zafixujte ho skrutkou (2)
- Zasúvajte predmontované zariadenie na Trs. intramedulárnu tyč (3)
- Distálne zarovnanie tibiálneho referenčného systému s druhou metatarzofalangeálnou kosťou a proximálne k prechodu od mediálnej časti k strednej tretine tibiálnej tuberozity
- Zarazenie na svorku (4)
- Nastavenie uhla pre varus-valgus pomocou nastavovacej skrutky (5)
- Najprv nastavte tibiálnu vodiacu pomôcku rezania (11) na nulu a zafixujte ju skrutkou (6). Určite sklon. Použite hexagonálny skrutkovač na nastavenie posteriórneho sklonu podľa anatómie, ako sa to vyžaduje od 0° – 11° (9)
- Určte originálnu líniu kĺbu na úrovni najlepšie zachovaného povrchu tibiálneho kĺbu pomocou referenčnej platničky alebo tibiálneho palpátora
- Nastavenie línie kĺbu sa vykoná pomocou T-skrutky (7)
- Zafixujte referenčný systém proximálne s aspoň dvoma kolíkmi v špecifikovaných dierkach (šikmé a rovné) (8)
- Dierky sa predvrtávajú 3,2 mm vŕtačkou
- Nastavte tibiálnu vodiacu pomôcku rezania 6–8 mm distálne pomocou hexagonálneho skrutkovača (6)
- Skontrolujte plánovanú tibiálnu osteotómiu pomocou referenčnej platničky
- Odstránenie skrutky intramedulárneho zadržiavača (2) a intramedulárne zarovnaného tibiálneho resekčného nástroja (1, 3, 4)


Poznámka

Naši autori odporúčajú posteriórny sklon 7° pre implantát zachovávajúci skrížený väz a až 5° pre implantát nahradzujúci PCL.


Pokračovanie pozri časť «Tibiálna osteotómia», (obr. 29).

Príloha


2 – balanSys 3-kolíková patela

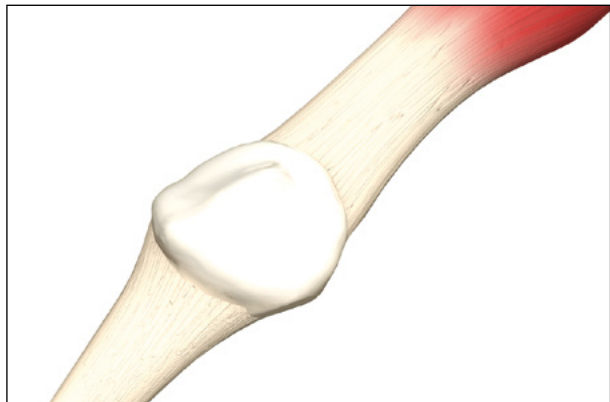

Obr. 71

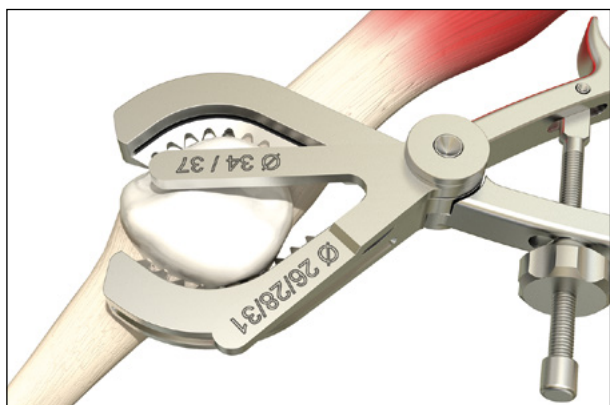

Obr. 72

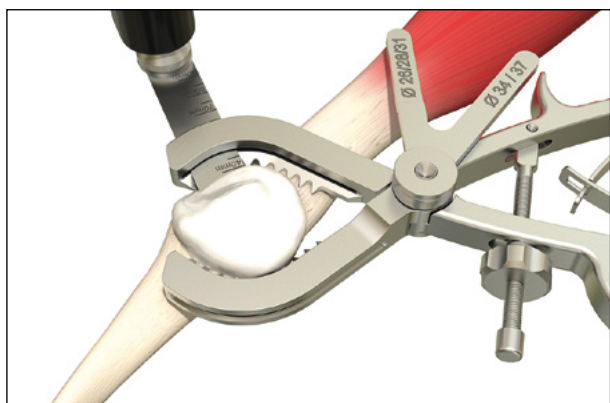

Obr. 73

Odstráňte všetky okrajové osteofyty.

Na základe anatomickej situácie určite veľkosť pately.

Dia	3-kolíková PLOCHÁ	3-kolíková
26	8 mm	–
28	8 mm	10,2 mm
31	8 mm	11,4 mm
34	9 mm	12,3 mm
37	9 mm	13,0 mm


Vyvráťte patelu a centricky ju uchopte pomocou patelových klieští.

Nastavte výšku resekcie s obmedzovačom výšky na zvolené nastavenie patelárnej veľkosti.

Poznámka

Zaistite používanie plochých patelových resekčných klieští pre 3 kolíkovú plochú patelu (označených veľkosťami **26–37**) a štandardných patelových resekčných klieští pre 3 kolíkovú patelu (označených veľkosťami **28–37**).

Vykonajte patelárnu osteotómiu cez vodiacu pomôcku pílenia na laterálnej strane patelových klieští.

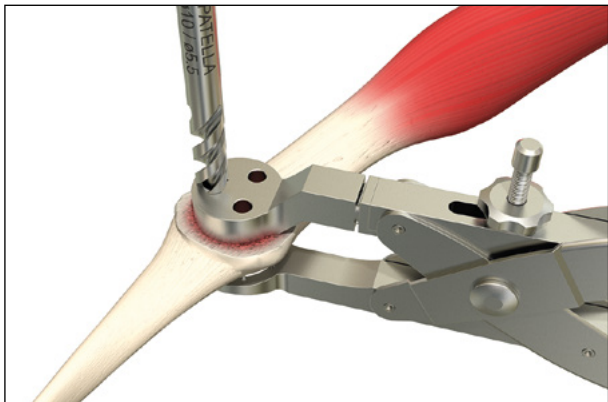

Obr. 74

Umiestnite vodiacu pomôcku vŕtania na určenie konečnej polohy patelového implantátu s ohľadom na predurčenú klznú dráhu femorálneho plášťa.

Vyvrťajte tri dierky na patelové kolíky 5,5mm vrtačkou.



Obr. 75

Retropatelárny povrch preparovaný na implantáciu.




Obr. 76

Vložte skúšobný patelárny implantát predurčenej veľkosti (PLOCHÝ alebo štandardný).

Skoste mediálne a laterálne okraje zadného povrchu pately.

Skontrolujte klzný pohyb vo femuro-patelárnom kĺbe s ohľadom na centrovanie.

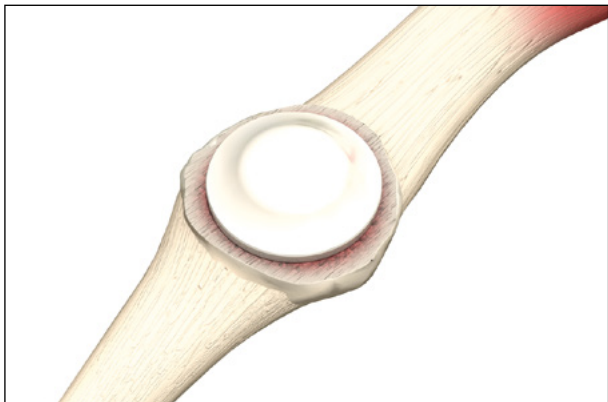


Obr. 77

Dôkladne očistite povrch osteotómie.

Vloženie cementovanej 3-kolíkovkej pately balanSys použitím cementovacej svorky.

Odstráňte všetky okrajové zvyšky cementu.

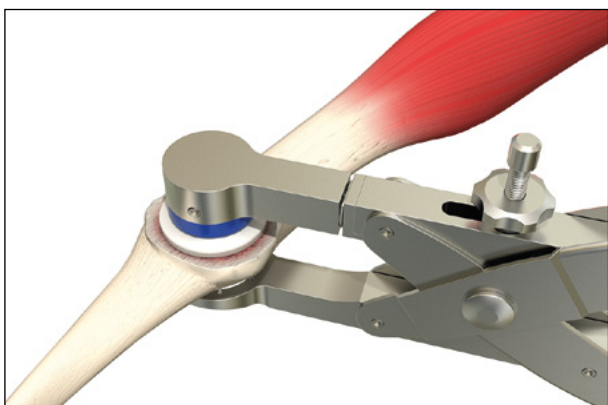

Obr. 78

Po zatvrdnutí cementu odoberte cementovaciú svorku.

Po uzavretí kĺbového puzdra vykonajte posledný funkčný test a skontrolujte centrováný beh pately.

Príloha

3 – Produktové čísla implantátov balanSys

balanSys femorálne komponenty pre CR/UC/RP

balanSys femur, cementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.15.3401	56 mm	XS ľavý
72.15.3701	58 mm	S ľavý
72.15.4001	60 mm	A ľavý
72.15.4301	64 mm	B ľavý
72.15.4601	68 mm	C ľavý
72.15.4901	72 mm	D ľavý
72.15.5201	76 mm	E ľavý
72.15.5501	80 mm	F ľavý
72.15.3402	56 mm	XS pravý
72.15.3702	58 mm	S pravý
72.15.4002	60 mm	A pravý
72.15.4302	64 mm	B pravý
72.15.4602	68 mm	C pravý
72.15.4902	72 mm	D pravý
72.15.5202	76 mm	E pravý
72.15.5502	80 mm	F pravý

Materiál: CoCrMo

balanSys femur, necementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
73.15.3401TPS	56 mm	XS ľavý
73.15.3701TPS	58 mm	S ľavý
73.15.4001TPS	60 mm	A ľavý
73.15.4301TPS	64 mm	B ľavý
73.15.4601TPS	68 mm	C ľavý
73.15.4901TPS	72 mm	D ľavý
73.15.5201TPS	76 mm	E ľavý
73.15.5501TPS	80 mm	F ľavý
73.15.3402TPS	56 mm	XS pravý
73.15.3702TPS	58 mm	S pravý
73.15.4002TPS	60 mm	A pravý
73.15.4302TPS	64 mm	B pravý
73.15.4602TPS	68 mm	C pravý
73.15.4902TPS	72 mm	D pravý
73.15.5202TPS	76 mm	E pravý
73.15.5502TPS	80 mm	F pravý

Materiál: CoCrMo, TiCP povrch

Komponenty balanSys Fixed Bearing

balanSys CR PE vložka



Kat. č.	Mediolat.	Vel'kosť
74.30.5908	59mm	8,0mm
74.30.5910	59mm	10,5mm
74.30.5913	59mm	13,0mm
74.30.5915	59mm	15,5mm
74.30.6208	62mm	8,0mm
74.30.6210	62mm	10,5mm
74.30.6213	62mm	13,0mm
74.30.6215	62mm	15,5mm
74.30.6408	64mm	8,0mm
74.30.6410	64mm	10,5mm
74.30.6413	64mm	13,0mm
74.30.6415	64mm	15,5mm
74.30.6708	67mm	8,0mm
74.30.6710	67mm	10,5mm
74.30.6713	67mm	13,0mm
74.30.6715	67mm	15,5mm

Kat. č.	Mediolat.	Vel'kosť
74.30.7008	70mm	8,0mm
74.30.7010	70mm	10,5mm
74.30.7013	70mm	13,0mm
74.30.7015	70mm	15,5mm
74.30.7508	75mm	8,0mm
74.30.7510	75mm	10,5mm
74.30.7513	75mm	13,0mm
74.30.7515	75mm	15,5mm
72.34.0170	80mm	8,0mm
72.34.0171	80mm	10,5mm
72.34.0172	80mm	13,0mm
72.34.0173	80mm	15,5mm
72.34.0174	85mm	8,0mm
72.34.0175	85mm	10,5mm
72.34.0176	85mm	13,0mm
72.34.0177	85mm	15,5mm

Materiál: UHMWPE



balanSys CR vitamys vložka

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.34.1000	59mm	8,0mm
72.34.1001	59mm	9,0mm
72.34.1002	59mm	10,5mm
72.34.1003	59mm	11,5mm
72.34.1004	59mm	13,0mm
72.34.1005	59mm	15,5mm
72.34.1010	62mm	8,0mm
72.34.1011	62mm	9,0mm
72.34.1012	62mm	10,5mm
72.34.1013	62mm	11,5mm
72.34.1014	62mm	13,0mm
72.34.1015	62mm	15,5mm
72.34.1020	64mm	8,0mm
72.34.1021	64mm	9,0mm
72.34.1022	64mm	10,5mm
72.34.1023	64mm	11,5mm
72.34.1024	64mm	13,0mm
72.34.1025	64mm	15,5mm
72.34.1030	67mm	8,0mm
72.34.1031	67mm	9,0mm
72.34.1032	67mm	10,5mm
72.34.1033	67mm	11,5mm
72.34.1034	67mm	13,0mm
72.34.1035	67mm	15,5mm

Materiál: VEPE

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.34.1040	70mm	8,0mm
72.34.1041	70mm	9,0mm
72.34.1042	70mm	10,5mm
72.34.1043	70mm	11,5mm
72.34.1044	70mm	13,0mm
72.34.1045	70mm	15,5mm
72.34.1050	75mm	8,0mm
72.34.1051	75mm	9,0mm
72.34.1052	75mm	10,5mm
72.34.1053	75mm	11,5mm
72.34.1054	75mm	13,0mm
72.34.1055	75mm	15,5mm
72.34.1060	80mm	8,0mm
72.34.1061	80mm	9,0mm
72.34.1062	80mm	10,5mm
72.34.1063	80mm	11,5mm
72.34.1064	80mm	13,0mm
72.34.1065	80mm	15,5mm
72.34.1070	85mm	8,0mm
72.34.1071	85mm	9,0mm
72.34.1072	85mm	10,5mm
72.34.1073	85mm	11,5mm
72.34.1074	85mm	13,0mm
72.34.1075	85mm	15,5mm



balanSys UC PE vložka

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
77.30.5908	59mm	8,0mm
77.30.5910	59mm	10,5mm
77.30.5913	59mm	13,0mm
77.30.5915	59mm	15,5mm
77.30.5918	59mm	18,0mm
77.30.5920	59mm	20,5mm
77.30.6208	62mm	8,0mm
77.30.6210	62mm	10,5mm
77.30.6213	62mm	13,0mm
77.30.6215	62mm	15,5mm
77.30.6218	62mm	18,0mm
77.30.6220	62mm	20,5mm
77.30.6408	64mm	8,0mm
77.30.6410	64mm	10,5mm
77.30.6413	64mm	13,0mm
77.30.6415	64mm	15,5mm
77.30.6418	64mm	18,0mm
77.30.6420	64mm	20,5mm
77.30.6708	67mm	8,0mm
77.30.6710	67mm	10,5mm
77.30.6713	67mm	13,0mm
77.30.6715	67mm	15,5mm
77.30.6718	67mm	18,0mm
77.30.6720	67mm	20,5mm

Materiál: UHMWPE

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
77.30.7008	70mm	8,0mm
77.30.7010	70mm	10,5mm
77.30.7013	70mm	13,0mm
77.30.7015	70mm	15,5mm
77.30.7018	70mm	18,0mm
77.30.7020	70mm	20,5mm
77.30.7508	75mm	8,0mm
77.30.7510	75mm	10,5mm
77.30.7513	75mm	13,0mm
77.30.7515	75mm	15,5mm
77.30.7518	75mm	18,0mm
77.30.7520	75mm	20,5mm
72.34.0182	80mm	8,0mm
72.34.0183	80mm	10,5mm
72.34.0184	80mm	13,0mm
72.34.0185	80mm	15,5mm
72.34.0186	80mm	18,0mm
72.34.0187	80mm	20,5mm
72.34.0188	85mm	8,0mm
72.34.0189	85mm	10,5mm
72.34.0190	85mm	13,0mm
72.34.0191	85mm	15,5mm
72.34.0192	85mm	18,0mm
72.34.0193	85mm	20,5mm



vitamys®

balanSys UC vitamys vložka

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.34.1100	59mm	8,0mm
72.34.1101	59mm	9,0mm
72.34.1102	59mm	10,5mm
72.34.1103	59mm	11,5mm
72.34.1104	59mm	13,0mm
72.34.1105	59mm	15,5mm
72.34.1106	59mm	18,0mm
72.34.1107*	59mm	20,5mm
72.34.1110	62mm	8,0mm
72.34.1111	62mm	9,0mm
72.34.1112	62mm	10,5mm
72.34.1113	62mm	11,5mm
72.34.1114	62mm	13,0mm
72.34.1115	62mm	15,5mm
72.34.1116	62mm	18,0mm
72.34.1117*	62mm	20,5mm
72.34.1120	64mm	8,0mm
72.34.1121	64mm	9,0mm
72.34.1122	64mm	10,5mm
72.34.1123	64mm	11,5mm
72.34.1124	64mm	13,0mm
72.34.1125	64mm	15,5mm
72.34.1126	64mm	18,0mm
72.34.1127*	64mm	20,5mm
72.34.1130	67mm	8,0mm
72.34.1131	67mm	9,0mm
72.34.1132	67mm	10,5mm
72.34.1133	67mm	11,5mm
72.34.1134	67mm	13,0mm
72.34.1135	67mm	15,5mm
72.34.1136	67mm	18,0mm
72.34.1137*	67mm	20,5mm

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.34.1140	70mm	8,0mm
72.34.1141	70mm	9,0mm
72.34.1142	70mm	10,5mm
72.34.1143	70mm	11,5mm
72.34.1144	70mm	13,0mm
72.34.1145	70mm	15,5mm
72.34.1146	70mm	18,0mm
72.34.1147*	70mm	20,5mm
72.34.1150	75mm	8,0mm
72.34.1151	75mm	9,0mm
72.34.1152	75mm	10,5mm
72.34.1153	75mm	11,5mm
72.34.1154	75mm	13,0mm
72.34.1155	75mm	15,5mm
72.34.1156	75mm	18,0mm
72.34.1157*	75mm	20,5mm
72.34.1160	80mm	8,0mm
72.34.1161	80mm	9,0mm
72.34.1162	80mm	10,5mm
72.34.1163	80mm	11,5mm
72.34.1164	80mm	13,0mm
72.34.1165	80mm	15,5mm
72.34.1166	80mm	18,0mm
72.34.1167*	80mm	20,5mm
72.34.1170	85mm	8,0mm
72.34.1171	85mm	9,0mm
72.34.1172	85mm	10,5mm
72.34.1173	85mm	11,5mm
72.34.1174	85mm	13,0mm
72.34.1175	85mm	15,5mm
72.34.1176	85mm	18,0mm
72.34.1177*	85mm	20,5mm

Materiál: VEPE

*na vyžiadanie



balanSys PS tibiálne plató, cementované

Kat. č.	Mediolaterálne
79.15.0400	59 mm
79.15.0401	62 mm
79.15.0056	64 mm
79.15.0402	67 mm
79.15.0057	70 mm
79.15.0058	75 mm
79.15.0059	80 mm
79.15.0060	85 mm

Materiál: CoCrMo

Komponenty balanSys Mobile Bearing RP

balanSys RP PE vložka



Kat. č.	Femur	Veľkosť	Kat. č.	Femur	Veľkosť
72.34.0200	XS	8,0 mm	78.30.7008	C	8,0 mm
72.34.0201	XS	10,5 mm	78.30.7010	C	10,5 mm
72.34.0202	XS	13,0 mm	78.30.7013	C	13,0 mm
72.34.0203	XS	15,5 mm	78.30.7015	C	15,5 mm
72.34.0206	S	8,0 mm	78.30.7408	D	8,0 mm
72.34.0207	S	10,5 mm	78.30.7410	D	10,5 mm
72.34.0208	S	13,0 mm	78.30.7413	D	13,0 mm
72.34.0209	S	15,5 mm	78.30.7415	D	15,5 mm
78.30.6208	A	8,0 mm	78.30.7808	E	8,0 mm
78.30.6210	A	10,5 mm	78.30.7810	E	10,5 mm
78.30.6213	A	13,0 mm	78.30.7813	E	13,0 mm
78.30.6215	A	15,5 mm	78.30.7815	E	15,5 mm
78.30.6608	B	8,0 mm	72.34.0242	F	8,0 mm
78.30.6610	B	10,5 mm	72.34.0243	F	10,5 mm
78.30.6613	B	13,0 mm	72.34.0244	F	13,0 mm
78.30.6615	B	15,5 mm	72.34.0245	F	15,5 mm

Materiál: UHMWPE, FeCrNiMoMn (Kontrastné guľičky, voliteľné)



vitamys®

balanSys RP vitamys vložka

Kat. č.	Femur	Veľkosť
72.34.1200	XS	8,0 mm
72.34.1201	XS	9,0 mm
72.34.1202	XS	10,5 mm
72.34.1203	XS	11,5 mm
72.34.1204	XS	13,0 mm
72.34.1205	XS	15,5 mm
72.34.1210	S	8,0 mm
72.34.1211	S	9,0 mm
72.34.1212	S	10,5 mm
72.34.1213	S	11,5 mm
72.34.1214	S	13,0 mm
72.34.1215	S	15,5 mm
72.34.1220	A	8,0 mm
72.34.1221	A	9,0 mm
72.34.1222	A	10,5 mm
72.34.1223	A	11,5 mm
72.34.1224	A	13,0 mm
72.34.1225	A	15,5 mm
72.34.1230	B	8,0 mm
72.34.1231	B	9,0 mm
72.34.1232	B	10,5 mm
72.34.1233	B	11,5 mm
72.34.1234	B	13,0 mm
72.34.1235	B	15,5 mm

Kat. č.	Femur	Veľkosť
72.34.1240	C	8,0 mm
72.34.1241	C	9,0 mm
72.34.1242	C	10,5 mm
72.34.1243	C	11,5 mm
72.34.1244	C	13,0 mm
72.34.1245	C	15,5 mm
72.34.1250	D	8,0 mm
72.34.1251	D	9,0 mm
72.34.1252	D	10,5 mm
72.34.1253	D	11,5 mm
72.34.1254	D	13,0 mm
72.34.1255	D	15,5 mm
72.34.1260	E	8,0 mm
72.34.1261	E	9,0 mm
72.34.1262	E	10,5 mm
72.34.1263	E	11,5 mm
72.34.1264	E	13,0 mm
72.34.1265	E	15,5 mm
72.34.1270	F	8,0 mm
72.34.1271	F	9,0 mm
72.34.1272	F	10,5 mm
72.34.1273	F	11,5 mm
72.34.1274	F	13,0 mm
72.34.1275	F	15,5 mm

Materiál: VEPE



balanSys RP tibiálne plató, cementované

Kat. č.	Mediolaterálne
72.34.0059	59 mm
72.34.0060	62 mm
72.34.0061	64 mm
72.34.0062	67 mm
72.34.0063	70 mm
72.34.0064	75 mm
72.34.0065	80 mm
72.34.0066	85 mm

Materiál: CoCrMo



Komponenty balansys PS

balansys PS femur, cementovaný

Kat. č.	Mediolat.	Vel'kosť
79.15.0999	56 mm	XS pravý
79.15.1000	58 mm	S pravý
79.15.0001	60 mm	A pravý
79.15.0002	64 mm	B pravý
79.15.0003	68 mm	C pravý
79.15.0004	72 mm	D pravý
79.15.0005	76 mm	E pravý
79.15.1006	80 mm	F pravý
79.15.1009	56 mm	XS ľavý
79.15.1010	58 mm	S ľavý
79.15.0011	60 mm	A ľavý
79.15.0012	64 mm	B ľavý
79.15.0013	68 mm	C ľavý
79.15.0014	72 mm	D ľavý
79.15.0015	76 mm	E ľavý
79.15.1016	80 mm	F ľavý

Materiál: CoCrMo



balanSys PS PE vložka

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
79.30.9986	59mm	8,0mm
79.30.9987	59mm	10,5mm
79.30.9988	59mm	13,0mm
79.30.9989	59mm	15,5mm
79.30.9990	59mm	18,0mm
79.30.9991	59mm	20,5mm
79.30.9992	59mm	23,0mm
79.30.9993	62mm	8,0mm
79.30.9994	62mm	10,5mm
79.30.9995	62mm	13,0mm
79.30.9996	62mm	15,5mm
79.30.9997	62mm	18,0mm
79.30.9998	62mm	20,5mm
79.30.9999	62mm	23,0mm
79.30.0200	64mm	8,0mm
79.30.0201	64mm	10,5mm
79.30.0202	64mm	13,0mm
79.30.0203	64mm	15,5mm
79.30.0204	64mm	18,0mm
79.30.0205	64mm	20,5mm
79.30.0206	64mm	23,0mm
79.30.0210	67mm	8,0mm
79.30.0211	67mm	10,5mm
79.30.0212	67mm	13,0mm
79.30.0213	67mm	15,5mm
79.30.0214	67mm	18,0mm
79.30.0215	67mm	20,5mm
79.30.0216	67mm	23,0mm

Material: UHMWPE

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
79.30.0010	70mm	8,0mm
79.30.0011	70mm	10,5mm
79.30.0012	70mm	13,0mm
79.30.0013	70mm	15,5mm
79.30.0014	70mm	18,0mm
79.30.0015	70mm	20,5mm
79.30.0016	70mm	23,0mm
79.30.0020	75mm	8,0mm
79.30.0021	75mm	10,5mm
79.30.0022	75mm	13,0mm
79.30.0023	75mm	15,5mm
79.30.0024	75mm	18,0mm
79.30.0025	75mm	20,5mm
79.30.0026	75mm	23,0mm
72.34.0255	80mm	8,0mm
72.34.0256	80mm	10,5mm
72.34.0257	80mm	13,0mm
72.34.0258	80mm	15,5mm
72.34.0259	80mm	18,0mm
72.34.0260	80mm	20,5mm
72.34.0261	80mm	23,0mm
72.34.0262	85mm	8,0mm
72.34.0263	85mm	10,5mm
72.34.0264	85mm	13,0mm
72.34.0265	85mm	15,5mm
72.34.0266	85mm	18,0mm
72.34.0267	85mm	20,5mm
72.34.0268	85mm	23,0mm



vitamys®

balanSys PS vitamys vložka

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.34.1300	59mm	8,0mm
72.34.1301	59mm	9,0mm
72.34.1302	59mm	10,5mm
72.34.1303	59mm	11,5mm
72.34.1304	59mm	13,0mm
72.34.1305	59mm	15,5mm
72.34.1306	59mm	18,0mm
72.34.1307*	59mm	20,5mm
72.34.1310	62mm	8,0mm
72.34.1311	62mm	9,0mm
72.34.1312	62mm	10,5mm
72.34.1313	62mm	11,5mm
72.34.1314	62mm	13,0mm
72.34.1315	62mm	15,5mm
72.34.1316	62mm	18,0mm
72.34.1317*	62mm	20,5mm
72.34.1320	64mm	8,0mm
72.34.1321	64mm	9,0mm
72.34.1322	64mm	10,5mm
72.34.1323	64mm	11,5mm
72.34.1324	64mm	13,0mm
72.34.1325	64mm	15,5mm
72.34.1326	64mm	18,0mm
72.34.1327*	64mm	20,5mm
72.34.1330	67mm	8,0mm
72.34.1331	67mm	9,0mm
72.34.1332	67mm	10,5mm
72.34.1333	67mm	11,5mm
72.34.1334	67mm	13,0mm
72.34.1335	67mm	15,5mm
72.34.1336	67mm	18,0mm
72.34.1337*	67mm	20,5mm

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.34.1340	70mm	8,0mm
72.34.1341	70mm	9,0mm
72.34.1342	70mm	10,5mm
72.34.1343	70mm	11,5mm
72.34.1344	70mm	13,0mm
72.34.1345	70mm	15,5mm
72.34.1346	70mm	18,0mm
72.34.1347*	70mm	20,5mm
72.34.1350	75mm	8,0mm
72.34.1351	75mm	9,0mm
72.34.1352	75mm	10,5mm
72.34.1353	75mm	11,5mm
72.34.1354	75mm	13,0mm
72.34.1355	75mm	15,5mm
72.34.1356	75mm	18,0mm
72.34.1357*	75mm	20,5mm
72.34.1360	80mm	8,0mm
72.34.1361	80mm	9,0mm
72.34.1362	80mm	10,5mm
72.34.1363	80mm	11,5mm
72.34.1364	80mm	13,0mm
72.34.1365	80mm	15,5mm
72.34.1366	80mm	18,0mm
72.34.1367*	80mm	20,5mm
72.34.1370	85mm	8,0mm
72.34.1371	85mm	9,0mm
72.34.1372	85mm	10,5mm
72.34.1373	85mm	11,5mm
72.34.1374	85mm	13,0mm
72.34.1375	85mm	15,5mm
72.34.1376	85mm	18,0mm
72.34.1377*	85mm	20,5mm

Materiál: VEPE

*na vyžiadanie

Komponenty balanSys TiNbN

balanSys femur TiNbN, cementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.23.3401	56 mm	XS ľavý
72.23.3701	58 mm	S ľavý
72.23.4001	60 mm	A ľavý
72.23.4301	64 mm	B ľavý
72.23.4601	68 mm	C ľavý
72.23.4901	72 mm	D ľavý
72.23.5201	76 mm	E ľavý
72.23.5501	80 mm	F ľavý

Materiál: CoCrMo, TiCP povrch

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
72.23.3402	56 mm	XS pravý
72.23.3702	58 mm	S pravý
72.23.4002	60 mm	A pravý
72.23.4302	64 mm	B pravý
72.23.4602	68 mm	C pravý
72.23.4902	72 mm	D pravý
72.23.5202	76 mm	E pravý
72.23.5502	80 mm	F pravý

balanSys PS tibiálne plató TiNbN fixované, cementované



Kat. č.	Mediolaterálne
79.23.0400	59 mm
79.23.0401	62 mm
79.23.0056	64 mm
79.23.0402	67 mm

Materiál: CoCrMo, TiCP povrch

Kat. č.	Mediolaterálne
79.23.0057	70 mm
79.23.0058	75 mm
79.23.0059	80 mm
79.23.0060	85 mm

balanSys PS femur TiNbN, cementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
79.23.1009	56 mm	XS ľavý
79.23.1010	58 mm	S ľavý
79.23.0011	60 mm	A ľavý
79.23.0012	64 mm	B ľavý
79.23.0013	68 mm	C ľavý
79.23.0014	72 mm	D ľavý
79.23.0015	76 mm	E ľavý
79.23.1016	80 mm	F ľavý

Materiál: CoCrMo, TiCP povrch

Kat. č.	Mediolat.	Veľkosť
79.23.0999	56 mm	XS pravý
79.23.1000	58 mm	S pravý
79.23.0001	60 mm	A pravý
79.23.0002	64 mm	B pravý
79.23.0003	68 mm	C pravý
79.23.0004	72 mm	D pravý
79.23.0005	76 mm	E pravý
79.23.1006	80 mm	F pravý

Komponenty balanSys 3-kolíkovéj PLOCHEJ pately



Kat. č.	Priemer Ø
72.34.0049	26 mm
72.34.0050	28 mm
72.34.0051	31 mm
72.34.0052	34 mm
72.34.0053	37 mm

Materiál: UHMWPE, FeCrNiMoMn (kontrastné guličky)

Komponenty balanSys 3-kolíkovéj pately



Kat. č.	Priemer Ø
72.30.0128	28 mm
72.30.0131	31 mm
72.30.0134	34 mm
72.30.0137	37 mm

Materiál: UHMWPE, FeCrNiMoMn (kontrastné guličky)

Príloha

5 – Produktové čísla nástrojov balanSys

Základné nástroje

balanSys sada Basic 71.34.9000A	53
balanSys inštrumentácia základnej skúšobnej sady Basic 71.34.9005A	58

Operačná technika

balanSys LIS 4in1 71.34.9030A	61
-------------------------------	----

Skúšobné nástroje

balanSys skúšobná sada CR/UC	63
balanSys skúšobná sada PS	68
balanSys skúšobná sada RP (voliteľné)	74


Nástroje pately

balanSys patela 3-kolíková, plochá 71.34.0080A	78
balanSys patela 3-kolíková, štandardná 71.34.0081A	78

Pred každým chirurgickým zákrokom sa musia nástroje skontrolovať, či nie sú poškodené alebo zdeformované. Používajte len nepoškodené nástroje. Nepoužívajte skúšobné komponenty so známami poškodenia alebo ryhami.

balanSys sada Basic 71.34.9000A

Žiadny obrázok / 71.34.0545 **balanSys Basic sada veko**

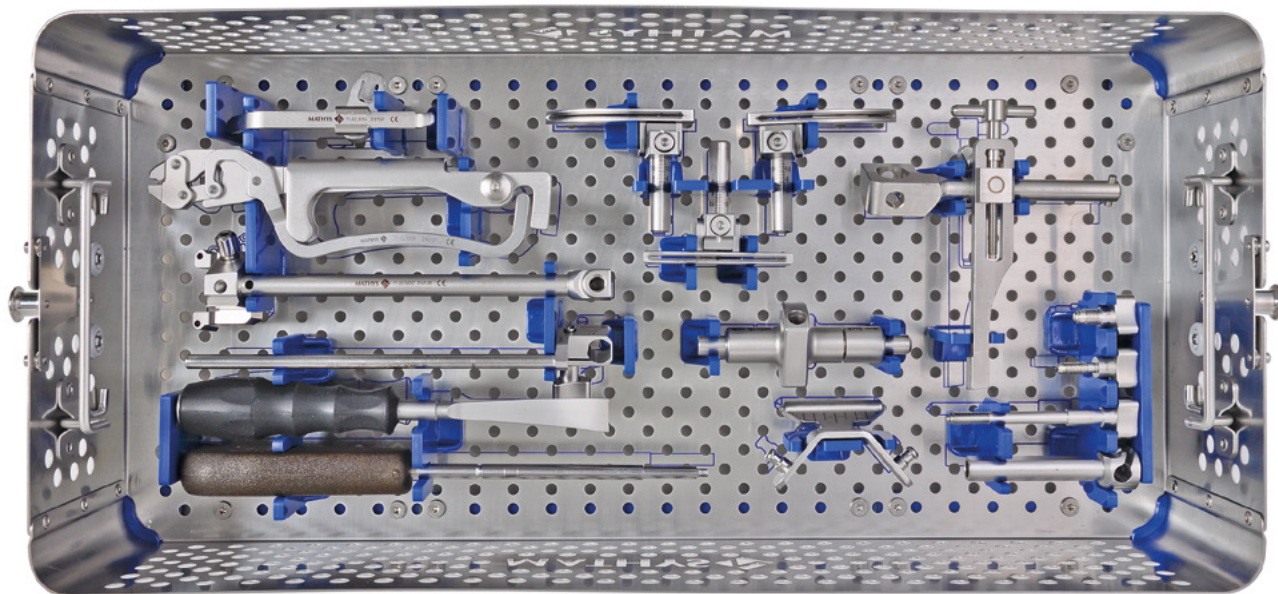

71.34.0546 **balanSys Basic sada kôš**



Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3096	balanSys tibiálny palpátor	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3006	balanSys kliešte	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3032	balanSys Trs. zaciel'. pomôcka proximálna	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3034	balanSys Trs. zaciel'. pomôcka distálna	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0686	balanSys dláto na osteofyty, zahnuté	1

Kat. č.	Popis	Množ.
314.270	skrutkovač, hex., 3,5	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.4018	balanSys tibiálna vod. pom. rezania 1,3	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3083	balanSys Trs. tib. vod. pom. rez. prav LIS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3084	balanSys Trs. tib. vod. pom. rez. ľav. LIS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3043	balanSys Trs. rukoväť pre intramed. tyč	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3035	balanSys Trs. držiak členka	1



Kat. č.	Popis	Množ.
77.02.0041	balanSys Trs. spojovacia skrutka	1


Kat. č.	Popis	Množ.
77.02.0019	balanSys Trs. skrutka	1

Kat. č.	Popis	Množ.
77.02.0043	balanSys Trs. uzamykacia skrutka	1


Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3036	balanSys Trs. distálny konektor	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3041	balanSys Trs. intramed. spojovací článok	1

balanSys sada Basic 71.34.9000A

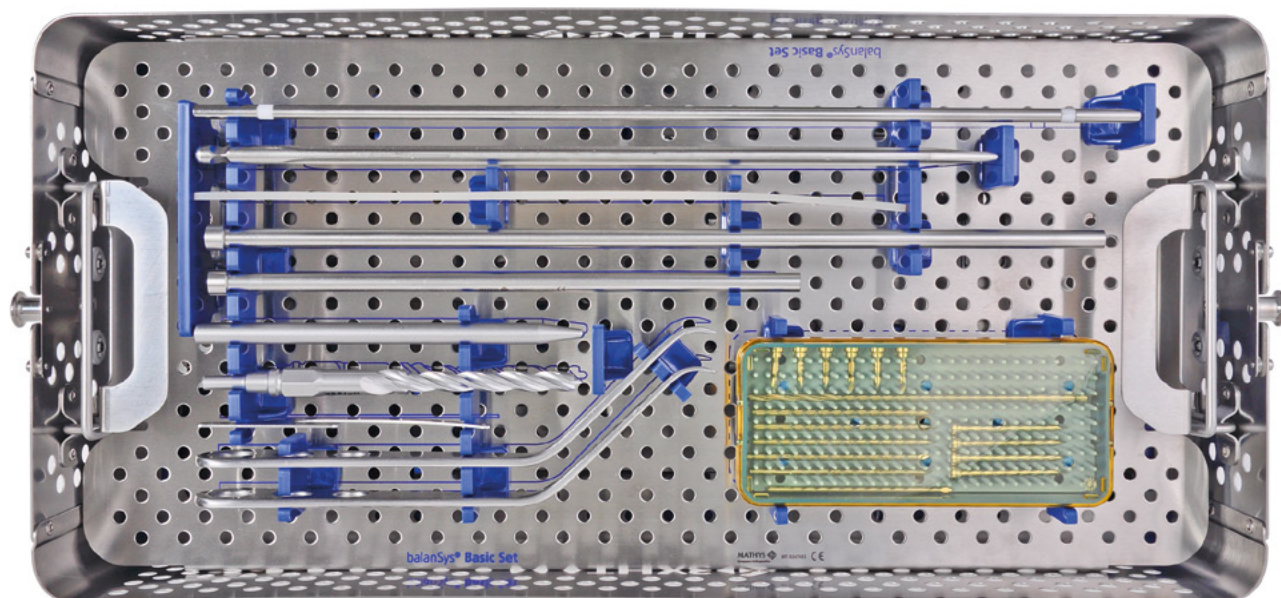

71.34.0547 balanSys sada Basic vložka koša

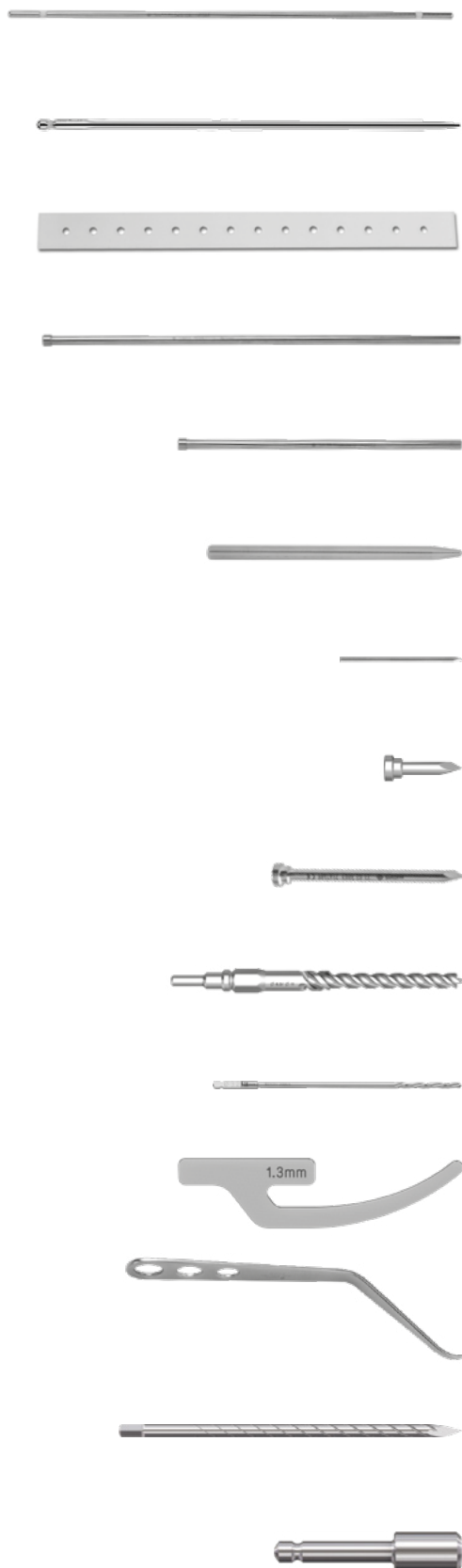

Kat. č.	Popis	Množ.
70.04.0109	balanSys zarovnávací tyčka stredná časť	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3042	balanSys PS intramedulárna tyč	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.1005	balanSys gumička TRS 3x25x300	1

Kat. č.	Popis	Množ.
70.04.0111	balanSys zarovnávací tyčka dlhá	1

Kat. č.	Popis	Množ.
70.04.0110	balanSys zarovnávací tyčka krátka	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3014	balanSys dorážacia/extrakčná tyčka	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3054	balanSys kolík 3,2/80	6

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0108	balanSys kolík s hlavičkou 3,2/20	6

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3003	Kolík s hlavičkou Ø3,2/6,5x52	4

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0100	balanSys vrták 8,5/11 mm	1

Kat. č.	Popis	Množ.
315.310	AO vrták 3,2	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0107	balanSys meracia platnička 1.3	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3005	balanSys kostný retractor	2


Voliteľné nástroje

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0647	Kolík vŕtačky 3,2 mm x 89 mm	6

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0787	Rýchlospojka štvorcová 2,25 (Adaptér na vŕtací kolík)	1

balanSys inštrumentácia základnej skúšobnej sady Basic 71.34.9005A

Žiadny obrázok / 71.34.0203 **balanSys základná skúš. sada č. 1 veko**

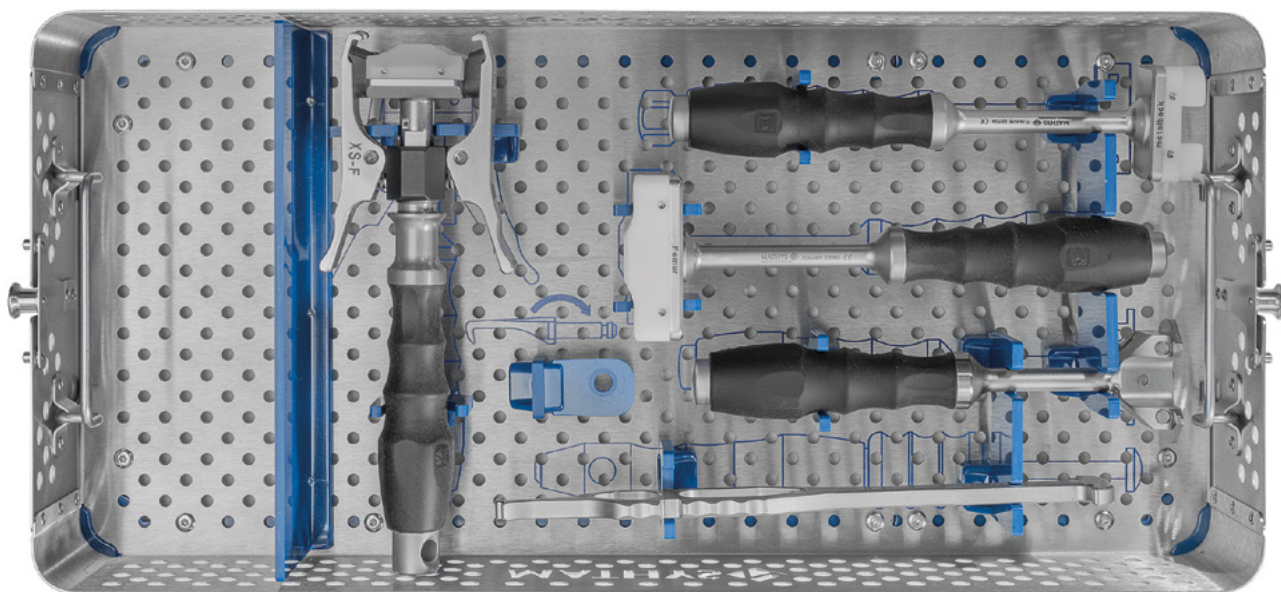

71.34.0204 **balanSys základná skúš. sada č. 1 kôš**



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0744	balanSys držiak femuru XS-F	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0698	balanSys tibiálny dorážač	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0699	balanSys femorálny dorážač	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0240	balanSys polohovač tibiálneho plató	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0788	balanSys retractor femuru	1




Voliteľné nástroje

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0745	balanSys držiak femuru XS-D	1

balanSys inštrumentácia základnej skúšobnej sady Basic 71.34.9005A

Žiadny obrázok / 71.34.0205 **balanSys základná skúš. sada č. 2 veko**

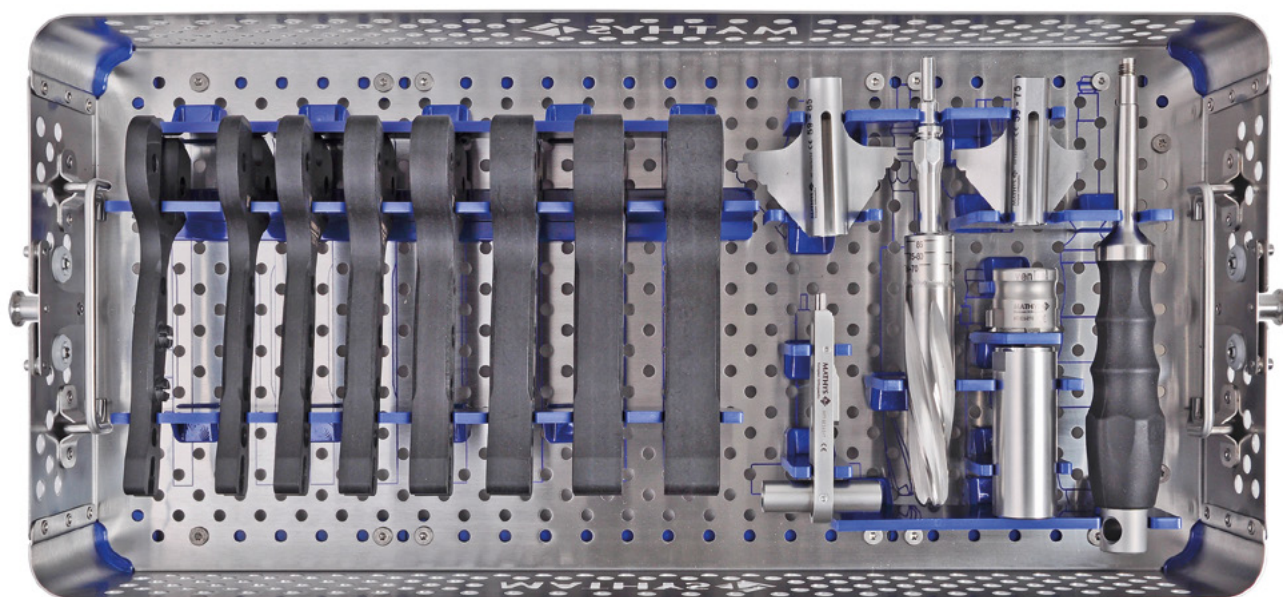

71.34.0206 **balanSys základná skúš. sada č. 2 kôš**



Kat. č.	Popis	Množ.
79.02.0651	balanSys distančný blok femuru 9	1

Kat. č.	Popis	Množ.
79.02.0640	balanSys distančný blok tíbie 8	1
71.34.0947*	balanSys distančný blok tíbie 9	1
79.02.0641	balanSys distančný blok tíbie 10.5	1
71.34.0948*	balanSys distančný blok tíbie 11.5	1
79.02.0642	balanSys distančný blok tíbie 13	1
79.02.0643	balanSys distančný blok tíbie 15.5	1
79.02.0644	balanSys distančný blok tíbie 13/18	1
79.02.0645	balanSys distančný blok tíbie 20.5	1
79.02.0646	balanSys distančný blok tíbie 23	1

* Vložky balanSys PE 9mm a 11,5mm sú dostupné len ako vitamys.



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0198	balanSys dláto s plutvičkou 59–85	1
71.34.0199	balanSys dláto s plutvičkou 59–75	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0197	balanSys vodiaca pomôcka centr. dláta	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0196	balanSys držiak tibiálnej šablóny	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0200	balanSys výstružník	1




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0201	balanSys vodiaca pomôcka výstružníka	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0700	balanSys rukoväť pre tib. rezné dláto	1

balanSys LIS 4in1 71.34.9030A

Žiadny obrázok / 71.34.0162 **balanSys LIS 4in1 veko**

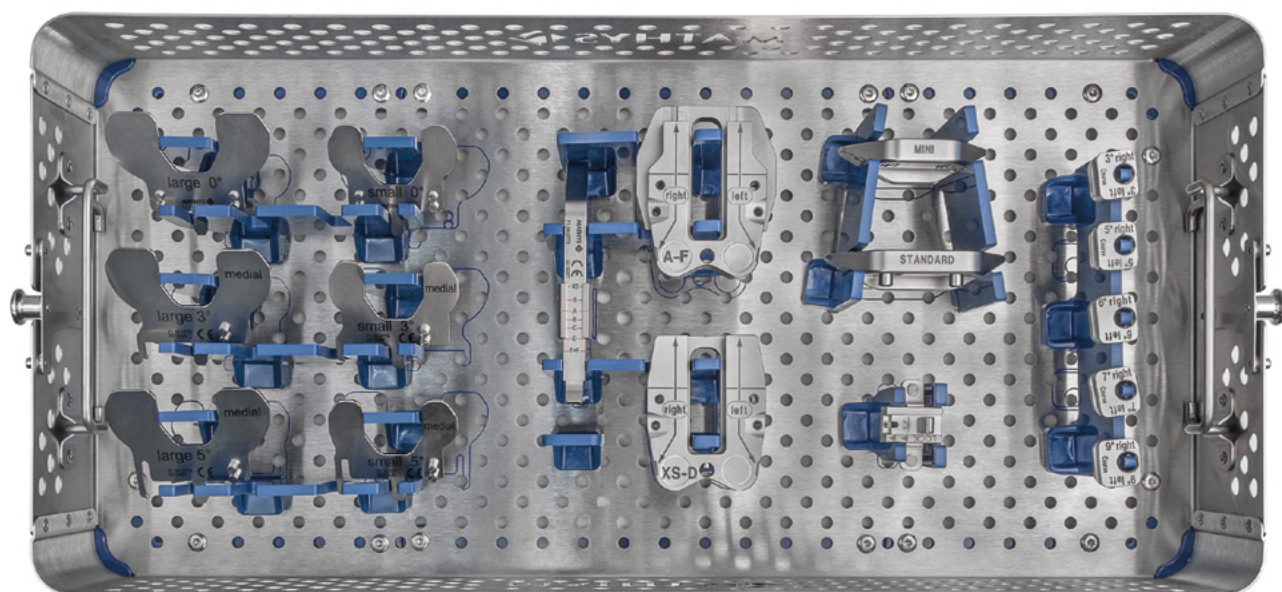

71.34.0163 **balanSys LIS 4in1 kôš**



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0767	balanSys fem. pom. výb. veľk./rot. LIS XS-D	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0768	balanSys fem. pom. výb. veľk./rot. LIS A-F	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0769	balanSys femur rotačné ložisko malé 0°	1
71.34.0770	balanSys femur rotačné ložisko malé 3°	1
71.34.0771	balanSys femur rotačné ložisko malé 5°	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0772	balanSys femur rotačné ložisko veľké 0°	1
71.34.0773	balanSys femur rotačné ložisko veľké 3°	1
71.34.0774	balanSys femur rotačné ložisko veľké 5°	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0775	balanSys mierka veľkosti LIS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0776	balanSys držiak vod. pom. dist. rez. LIS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3091	balanSys blok zarovňavania osi 3° LIS	1
71.02.3092	balanSys blok zarovňavania osi 5° LIS	1
71.34.0777	balanSys blok zarovňavania osi 6° LIS	1
71.02.3093	balanSys blok zarovňavania osi 7° LIS	1
71.02.3094	balanSys blok zarovňavania osi 9° LIS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0121	balanSys vod. pom. dist. rezania STANDARD	1


Voliteľné nástroje

NIE sú súčasťou štandardnej konfigurácie a musia sa objednať osobitne:

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0128	balanSys vod. pom. dist. rezania MINI	1

balanSys skúšobná sada CR/UC č. 1

Žiadny obrázok / 71.34.0241 balanSys skúšobná sada CR/UC č. 1 veko

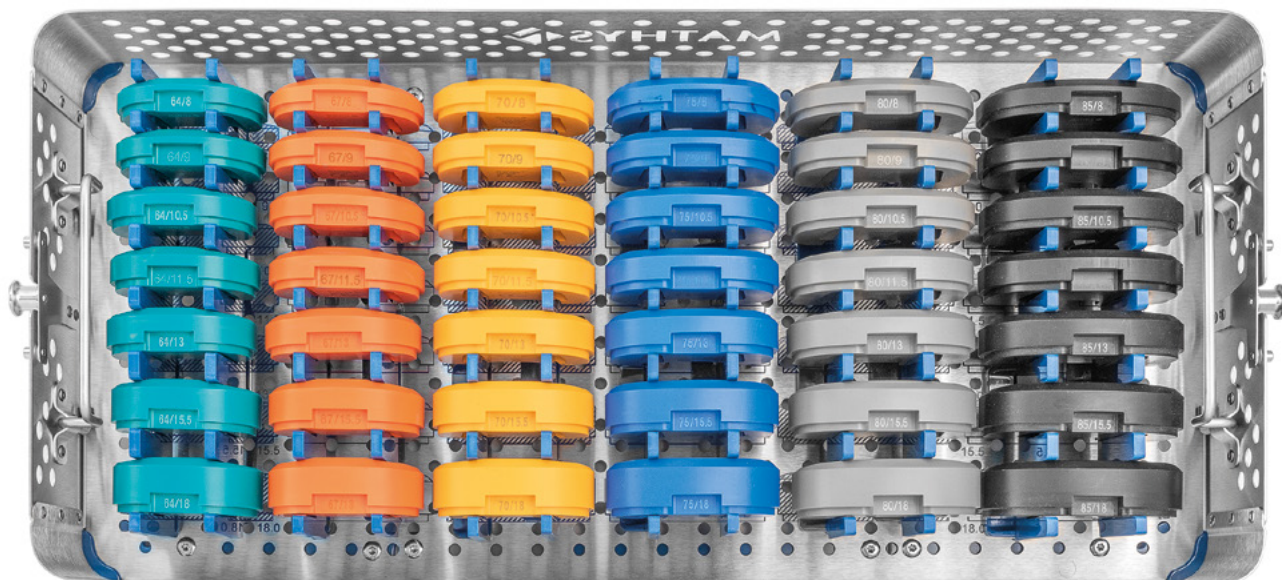

71.34.1075 balanSys skúš. sada 7-CR/UC č. 1 kôš

balanSys skúšobná sada CR/UC

Zvoľte si konfiguráciu vašej veľkosti

Č. sady	Femur	Tíbia
71.34.9050A	A/B/C/D/E	64/67/70/75/80/85
71.34.0789A	XS/S/F	59/62



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0357	balanSys PE skúšobná vložka 59/8	1
71.34.0949*	balanSys PE skúšobná vložka 59/9	1
71.34.0358	balanSys PE skúšobná vložka 59/10.5	1
71.34.0950*	balanSys PE skúšobná vložka 59/11.5	1
71.34.0359	balanSys PE skúšobná vložka 59/13	1
71.34.0360	balanSys PE skúšobná vložka 59/15.5	1
71.34.0361	balanSys PE skúšobná vložka 59/18	1
71.34.0362	balanSys PE skúšobná vložka 59/20.5	1
71.34.0210	balanSys PE skúšobná vložka 62/8	1
71.34.0951*	balanSys PE skúšobná vložka 62/9	1
71.34.0211	balanSys PE skúšobná vložka 62/10.5	1
71.34.0952*	balanSys PE skúšobná vložka 62/11.5	1
71.34.0212	balanSys PE skúšobná vložka 62/13	1
71.34.0213	balanSys PE skúšobná vložka 62/15.5	1
71.34.0214	balanSys PE skúšobná vložka 62/18	1
71.34.0215	balanSys PE skúšobná vložka 62/20.5	1
71.34.0216	balanSys PE skúšobná vložka 64/8	1
71.34.0953*	balanSys PE skúšobná vložka 64/9	1
71.34.0217	balanSys PE skúšobná vložka 64/10.5	1
71.34.0954*	balanSys PE skúšobná vložka 64/11,5	1
71.34.0218	balanSys PE skúšobná vložka 64/13	1
71.34.0219	balanSys PE skúšobná vložka 64/15.5	1
71.34.0220	balanSys PE skúšobná vložka 64/18	1
71.34.0221	balanSys PE skúšobná vložka 64/20.5	1
71.34.0222	balanSys PE skúšobná vložka 67/8	1
71.34.0955*	balanSys PE skúšobná vložka 67/9	1
71.34.0223	balanSys PE skúšobná vložka 67/10.5	1
71.34.0956*	balanSys PE skúšobná vložka 67/11.5	1
71.34.0224	balanSys PE skúšobná vložka 67/13	1
71.34.0225	balanSys PE skúšobná vložka 67/15.5	1
71.34.0226	balanSys PE skúšobná vložka 67/18	1
71.34.0227	balanSys PE skúšobná vložka 67/20.5	1
71.34.0477	balanSys PE skúšobná vložka 70/8	1
71.34.0957*	balanSys PE skúšobná vložka 70/9	1
71.34.0478	balanSys PE skúšobná vložka 70/10.5	1
71.34.0958*	balanSys PE skúšobná vložka 70/11.5	1
71.34.0479	balanSys PE skúšobná vložka 70/13	1
71.34.0480	balanSys PE skúšobná vložka 70/15.5	1
71.34.0481	balanSys PE skúšobná vložka 70/18	1
71.34.0482	balanSys PE skúšobná vložka 70/20.5	1


* Vložky balanSys PE 9mm a 11,5mm sú dostupné len ako vitamys.

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0483	balanSys PE skúšobná vložka 75/8	1
71.34.0959*	balanSys PE skúšobná vložka 75/9	1
71.34.0484	balanSys PE skúšobná vložka 75/10.5	1
71.34.0960*	balanSys PE skúšobná vložka 75/11.5	1
71.34.0485	balanSys PE skúšobná vložka 75/13	1
71.34.0486	balanSys PE skúšobná vložka 75/15.5	1
71.34.0487	balanSys PE skúšobná vložka 75/18	1
71.34.0488	balanSys PE skúšobná vložka 75/20.5	1
71.34.0228	balanSys PE skúšobná vložka 80/8	1
71.34.0961*	balanSys PE skúšobná vložka 80/9	1
71.34.0229	balanSys PE skúšobná vložka 80/10.5	1
71.34.0962*	balanSys PE skúšobná vložka 80/11.5	1
71.34.0230	balanSys PE skúšobná vložka 80/13	1
71.34.0231	balanSys PE skúšobná vložka 80/15.5	1
71.34.0232	balanSys PE skúšobná vložka 80/18	1
71.34.0233	balanSys PE skúšobná vložka 80/20.5	1
71.34.0234	balanSys PE skúšobná vložka 85/8	1
71.34.0963*	balanSys PE skúšobná vložka 85/9	1
71.34.0235	balanSys PE skúšobná vložka 85/10.5	1
71.34.0964*	balanSys PE skúšobná vložka 85/11.5	1
71.34.0236	balanSys PE skúšobná vložka 85/13	1
71.34.0237	balanSys PE skúšobná vložka 85/15.5	1
71.34.0238	balanSys PE skúšobná vložka 85/18	1
71.34.0239	balanSys PE skúšobná vložka 85/20.5	1

* Vložky balanSys PE 9 mm a 11,5 mm sú dostupné len ako vitamys.

balanSys skúšobná sada CR/UC č. 2

Žiadny obrázok / 71.34.0243 balanSys skúšobná sada CR/UC č. 2 veko

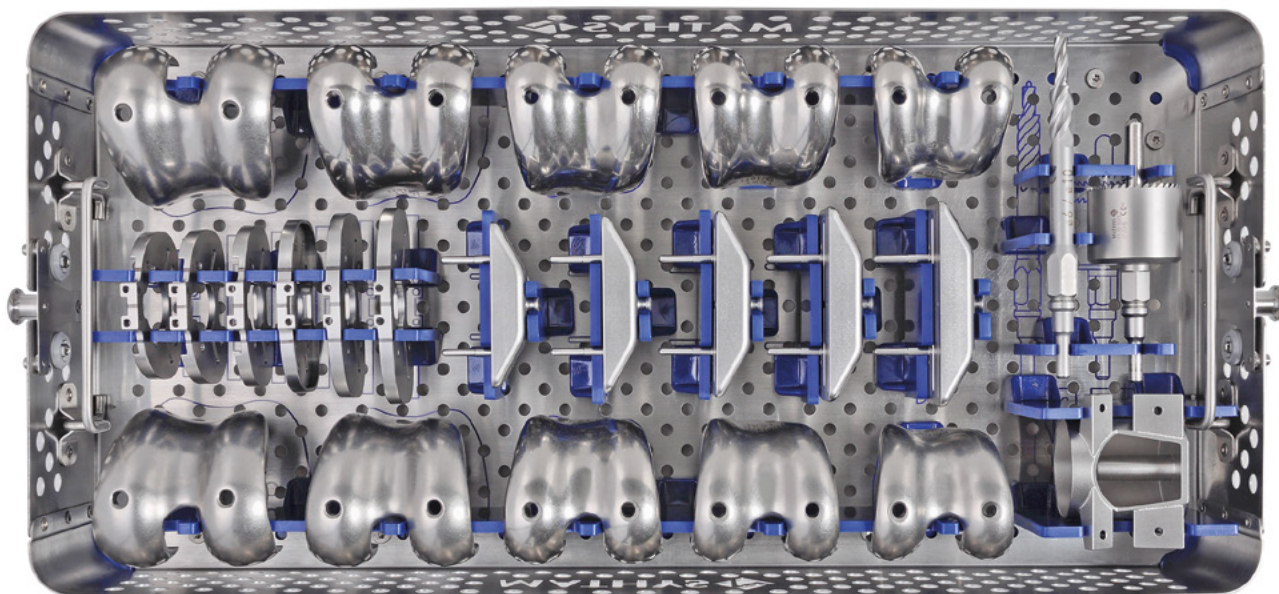

71.34.0244 balanSys skúšobná sada CR/UC č. 2 kôš



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0355	balanSys skúšobný femur XS ľavý	1
71.34.0356	balanSys skúšobný femur XS pravý	1
71.34.0504	balanSys skúšobný femur S ľavý	1
71.34.0505	balanSys skúšobný femur S pravý	1
71.02.4001	balanSys skúšobný femur A ľavý	1
71.02.4002	balanSys skúšobný femur A pravý	1
71.02.4301	balanSys skúšobný femur B ľavý	1
71.02.4302	balanSys skúšobný femur B pravý	1
71.02.4601	balanSys skúšobný femur C ľavý	1
71.02.4602	balanSys skúšobný femur C pravý	1
71.02.4901	balanSys skúšobný femur D ľavý	1
71.02.4902	balanSys skúšobný femur D pravý	1
71.02.5201	balanSys skúšobný femur E ľavý	1
71.02.5202	balanSys skúšobný femur E pravý	1
71.34.0371	balanSys skúšobný femur F ľavý	1
71.34.0372	balanSys skúšobný femur F pravý	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0353V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD XS	1
71.34.0122V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD S	1
71.34.0123V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD A	1
71.34.0124V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD B	1
71.34.0125V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD C	1
71.34.0126V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD D	1
71.34.0127V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD E	1
71.34.0370V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD F	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0535	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 59	1
71.34.0536	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 62	1
71.34.0537	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 64	1
71.34.0538	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 67	1
71.34.0539	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 70	1
71.34.0540	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 75	1
71.34.0541	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 80	1
71.34.0542	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 85	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3023	balanSys trochleárny výstružník	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3024	balanSys trochleárna objímka	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0023	balanSys vrták so stopkou 6	1

Voliteľné nástroje


NIE sú súčasťou štandardnej konfigurácie a musia sa objednať osobitne:



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0363	balanSys 4in1 rezný blok MINI XS	1
71.34.0129	balanSys 4in1 rezný blok MINI S	1
71.34.0130	balanSys 4in1 rezný blok MINI A	1
71.34.0131	balanSys 4in1 rezný blok MINI B	1
71.34.0132	balanSys 4in1 rezný blok MINI C	1
71.34.0133	balanSys 4in1 rezný blok MINI D	1
71.34.0134	balanSys 4in1 rezný blok MINI E	1
71.34.0373	balanSys 4in1 rezný blok MINI F	1

balanSys skúšobná sada PS

Žiadny obrázok / 71.34.0286 balanSys skúšobná sada PS č. 1 veko

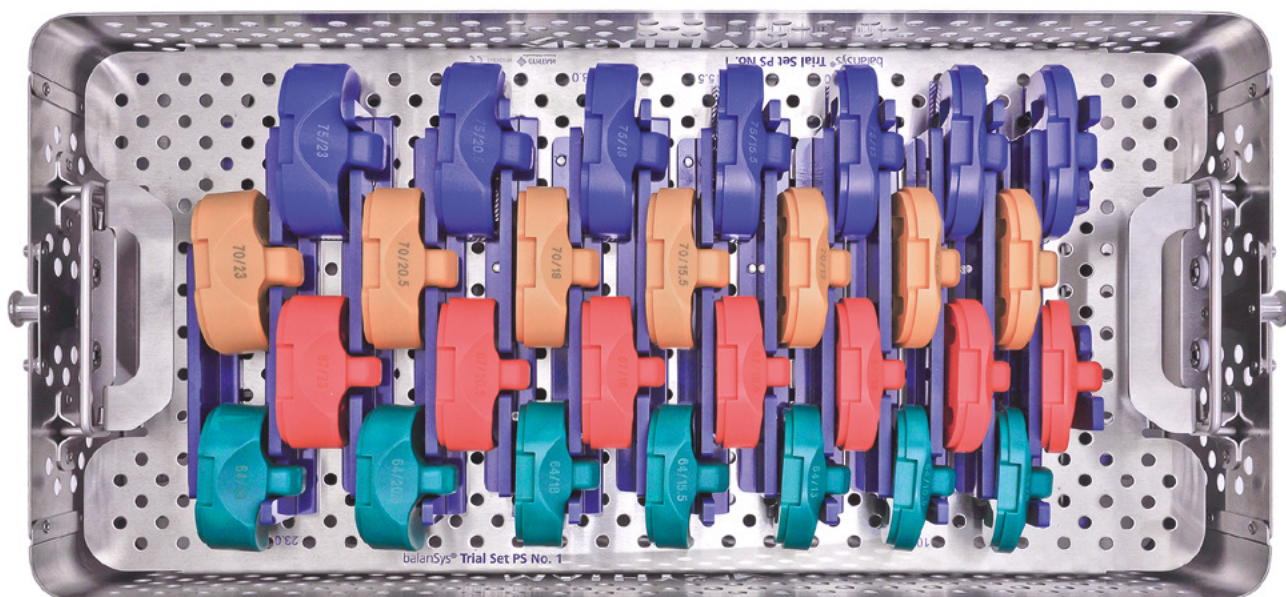

71.34.0288 balanSys skúš. sada PS č. 1 vložka koša

balanSys skúšobná sada PS

Zvoľte si konfiguráciu vašej veľkosti

Č. sady	Femur	Tíbia
71.34.9070A	A/B/C/D/E	64/67/70/75/80/85
71.34.0790A	XS/S/F	59/62




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0384	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/8	1
71.34.0965*	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/9	1
71.34.0385	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/10.5	1
71.34.0966*	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/11.5	1
71.34.0386	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/13	1
71.34.0387	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/15.5	1
71.34.0388	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/18	1
71.34.0389	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/20.5	1
71.34.0503	balanSys PS PE skúšobná vložka 59/23	1
71.34.0249	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/8	1
71.34.0967*	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/9	1
71.34.0250	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/10.5	1
71.34.0968*	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/11.5	1
71.34.0251	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/13	1
71.34.0252	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/15.5	1
71.34.0253	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/18	1
71.34.0254	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/20.5	1
71.34.0255	balanSys PS PE skúšobná vložka 62/23	1
71.34.0256	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/8	1
71.34.0969*	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/9	1
71.34.0257	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/10.5	1
71.34.0970*	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/11.5	1
71.34.0258	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/13	1
71.34.0259	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/15.5	1
71.34.0260	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/18	1
71.34.0261	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/20.5	1
71.34.0262	balanSys PS PE skúšobná vložka 64/23	1
71.34.0263	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/8	1
71.34.0971*	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/9	1
71.34.0264	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/10.5	1
71.34.0972*	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/11.5	1
71.34.0265	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/13	1
71.34.0266	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/15.5	1
71.34.0267	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/18	1
71.34.0268	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/20.5	1
71.34.0269	balanSys PS PE skúšobná vložka 67/23	1

* Vložky balanSys PE 9 mm a 11,5 mm sú dostupné len ako vitamys.

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0489	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/8	1
71.34.0973*	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/9	1
71.34.0490	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/10.5	1
71.34.0974*	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/11.5	1
71.34.0491	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/13	1
71.34.0492	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/15.5	1
71.34.0493	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/18	1
71.34.0494	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/20.5	1
71.34.0495	balanSys PS PE skúšobná vložka 70/23	1
71.34.0496	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/8	1
71.34.0975*	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/9	1
71.34.0497	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/10.5	1
71.34.0976*	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/11.5	1
71.34.0498	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/13	1
71.34.0499	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/15.5	1
71.34.0500	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/18	1
71.34.0501	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/20.5	1
71.34.0502	balanSys PS PE skúšobná vložka 75/23	1
71.34.0270	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/8	1
71.34.0977*	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/9	1
71.34.0271	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/10.5	1
71.34.0978*	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/11.5	1
71.34.0272	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/13	1
71.34.0273	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/15.5	1
71.34.0274	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/18	1
71.34.0275	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/20.5	1
71.34.0276	balanSys PS PE skúšobná vložka 80/23	1
71.34.0277	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/8	1
71.34.0979*	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/9	1
71.34.0278	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/10.5	1
71.34.0980*	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/11.5	1
71.34.0279	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/13	1
71.34.0280	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/15.5	1
71.34.0281	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/18	1
71.34.0282	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/20.5	1
71.34.0283	balanSys PS PE skúšobná vložka 85/23	1

* Vložky balanSys PE 9 mm a 11,5 mm sú dostupné len ako vitamys.

balanSys skúšobná sada PS

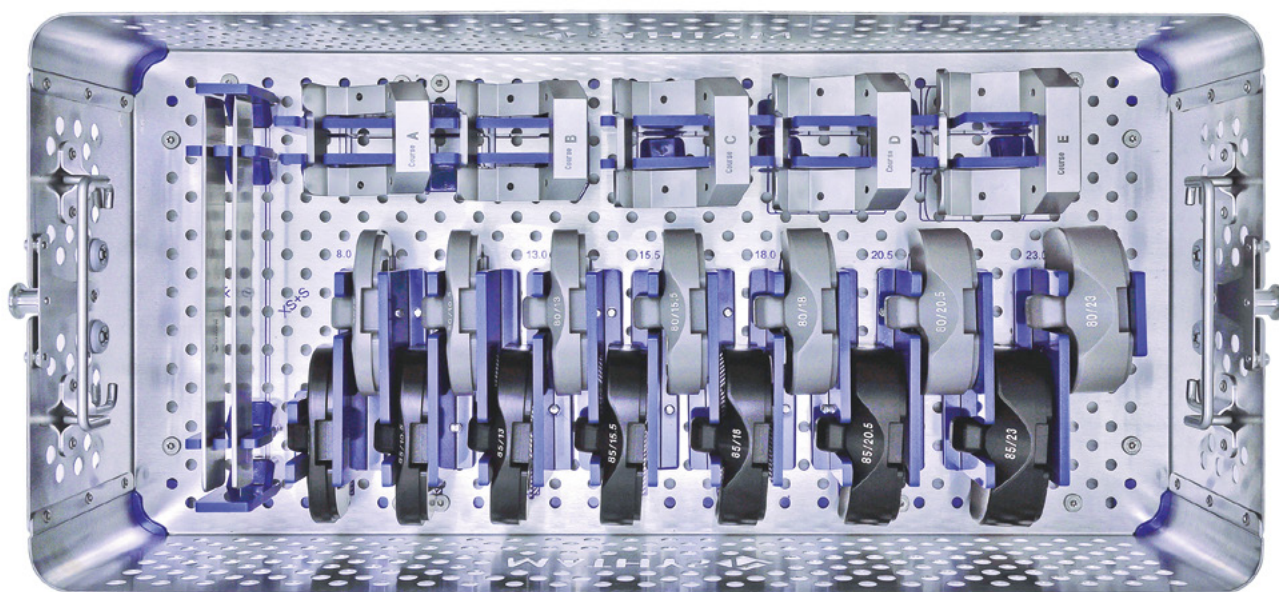

71.34.0287 balanSys skúšobná sada PS č. 1 kôš




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0690	balanSys dláto 22 mm XS/S	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0691	balanSys dláto 25 mm A–F	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0390	balanSys PS femur box vod. pom. rezania XS	1
71.34.0284	balanSys PS femur box vod. pom. rezania S	1
79.02.0265	balanSys PS femur box vod. pom. rezania A	1
79.02.0266	balanSys PS femur box vod. pom. rezania B	1
79.02.0267	balanSys PS femur box vod. pom. rezania C	1
79.02.0268	balanSys PS femur box vod. pom. rezania D	1
79.02.0269	balanSys PS femur box vod. pom. rezania E	1
71.34.0401	balanSys PS femur box vod. pom. rezania F	1

balanSys skúšobná sada PS

Žiadny obrázok / 71.34.0289 balanSys skúšobná sada PS č. 2 veko

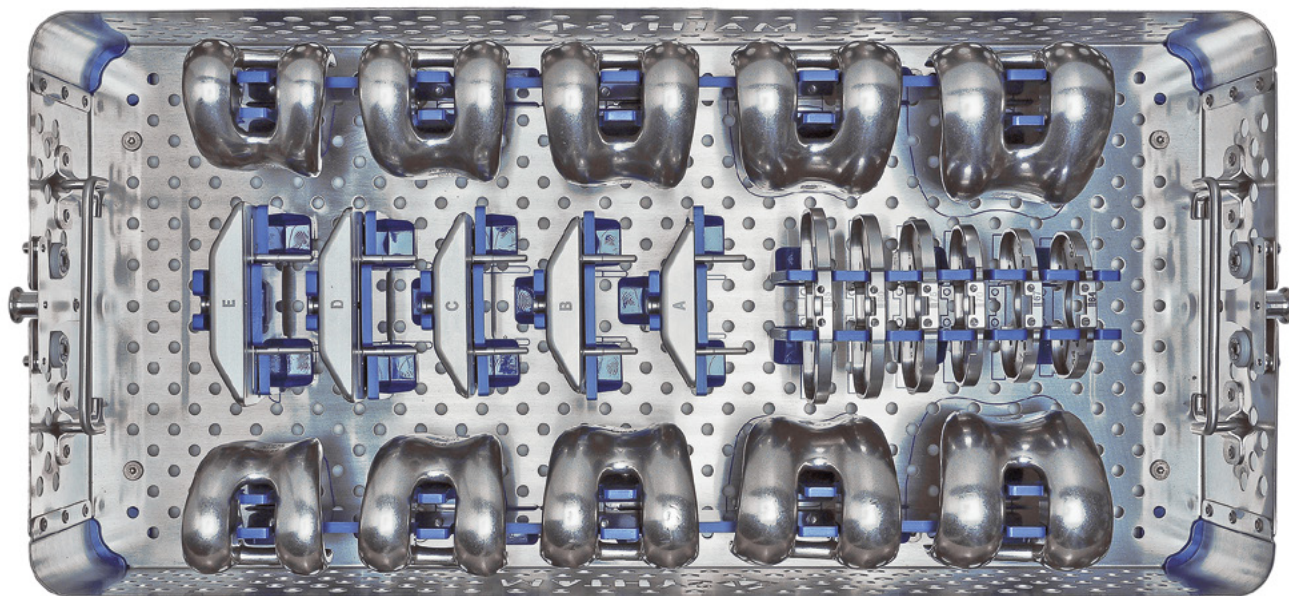

71.34.0290 balanSys skúšobná sada PS č. 2 kôš



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0383	balanSys PS skúšobný femur XS pravý	1
71.34.0382	balanSys PS skúšobný femur XS ľavý	1
71.34.0248	balanSys PS skúšobný femur S pravý	1
71.34.0247	balanSys PS skúšobný femur S ľavý	1
79.02.0040	balanSys PS skúšobný femur A pravý	1
79.02.0041	balanSys PS skúšobný femur A ľavý	1
79.02.0042	balanSys PS skúšobný femur B pravý	1
79.02.0043	balanSys PS skúšobný femur B ľavý	1
79.02.0044	balanSys PS skúšobný femur C pravý	1
79.02.0045	balanSys PS skúšobný femur C ľavý	1
79.02.0046	balanSys PS skúšobný femur D pravý	1
79.02.0047	balanSys PS skúšobný femur D ľavý	1
79.02.0048	balanSys PS skúšobný femur E pravý	1
79.02.0049	balanSys PS skúšobný femur E ľavý	1
71.34.0400	balanSys PS skúšobný femur F pravý	1
71.34.0399	balanSys PS skúšobný femur F ľavý	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0353V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD XS	1
71.34.0122V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD S	1
71.34.0123V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD A	1
71.34.0124V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD B	1
71.34.0125V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD C	1
71.34.0126V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD D	1
71.34.0127V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD E	1
71.34.0370V	balanSys 4in1 rezný blok STANDARD F	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0535	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 59	1
71.34.0536	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 62	1
71.34.0537	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 64	1
71.34.0538	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 67	1
71.34.0539	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 70	1
71.34.0540	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 75	1
71.34.0541	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 80	1
71.34.0542	balanSys CR/PS tibiálna šablóna 85	1

Voliteľné nástroje


NIE sú súčasťou štandardnej konfigurácie a musia sa objednať osobitne:



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0363	balanSys 4in1 rezný blok MINI XS	1
71.34.0129	balanSys 4in1 rezný blok MINI S	1
71.34.0130	balanSys 4in1 rezný blok MINI A	1
71.34.0131	balanSys 4in1 rezný blok MINI B	1
71.34.0132	balanSys 4in1 rezný blok MINI C	1
71.34.0133	balanSys 4in1 rezný blok MINI D	1
71.34.0134	balanSys 4in1 rezný blok MINI E	1
71.34.0373	balanSys 4in1 rezný blok MINI F	1

balanSys skúšobná sada RP 71.34.9060A (voliteľné)

Žiadny obrázok / 71.34.1056 leggera sada veko

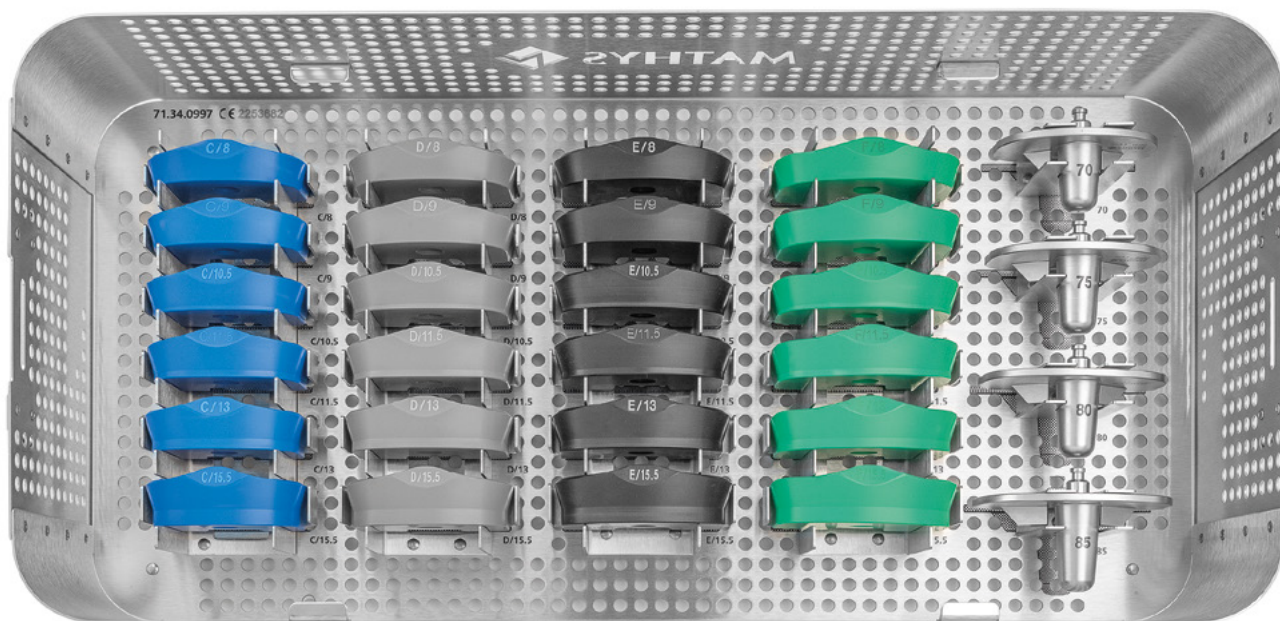

71.34.0997 balanSys skúšobná sada 6-RP kôš




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0297	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 70	1
71.34.0298	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 75	1
71.34.0299	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 80	1
71.34.0300	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 85	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0574	balanSys RP PE skúšobná vložka C/8	1
71.34.0989*	balanSys RP PE skúšobná vložka C/9	1
71.34.0575	balanSys RP PE skúšobná vložka C/10,5	1
71.34.0990*	balanSys RP PE skúšobná vložka C/11.5	1
71.34.0576	balanSys RP PE skúšobná vložka C/13	1
71.34.0577	balanSys RP PE skúšobná vložka C/15.5	1
71.34.0580	balanSys RP PE skúšobná vložka D/8	1
71.34.0991*	balanSys RP PE skúšobná vložka D/9	1
71.34.0581	balanSys RP PE skúšobná vložka D/10,5	1
71.34.0992*	balanSys RP PE skúšobná vložka D/11.5	1
71.34.0582	balanSys RP PE skúšobná vložka D/13	1
71.34.0583	balanSys RP PE skúšobná vložka D/15.5	1
71.34.0586	balanSys RP PE skúšobná vložka E/8	1
71.34.0993*	balanSys RP PE skúšobná vložka E/9	1
71.34.0587	balanSys RP PE skúšobná vložka E/10.5	1
71.34.0994*	balanSys RP PE skúšobná vložka E/11.5	1
71.34.0588	balanSys RP PE skúšobná vložka E/13	1
71.34.0589	balanSys RP PE skúšobná vložka E/15.5	1
71.34.0429	balanSys RP PE skúšobná vložka F/8	1
71.34.0995*	balanSys RP PE skúšobná vložka F/9	1
71.34.0430	balanSys RP PE skúšobná vložka F/10.5	1
71.34.0996*	balanSys RP PE skúšobná vložka F/11.5	1
71.34.0431	balanSys RP PE skúšobná vložka F/13	1
71.34.0432	balanSys RP PE skúšobná vložka F/15.5	1

* Vložky balanSys PE 9 mm a 11,5 mm sú dostupné len ako vitamys.

balanSys skúšobná sada RP 71.34.9060A (voliteľné)

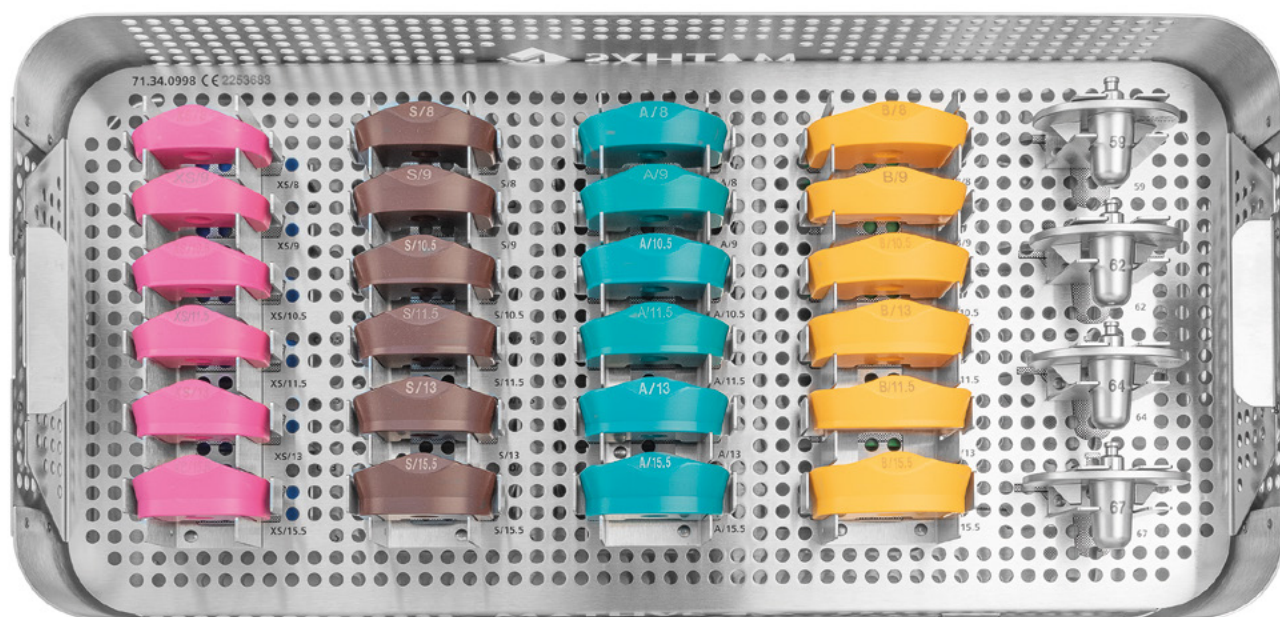

71.34.0998 balanSys skúšobná sada 6-RP vložka



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0418	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 59	1
71.34.0294	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 62	1
71.34.0295	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 64	1
71.34.0296	balanSys RP skúšobné tibiálne plató 67	1


Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0413	balanSys RP PE skúšobná vložka XS/8	1
71.34.0981*	balanSys RP PE skúšobná vložka XS/9	1
71.34.0414	balanSys RP PE skúšobná vložka XS/10.5	1
71.34.0982*	balanSys RP PE skúšobná vložka XS/11.5	1
71.34.0415	balanSys RP PE skúšobná vložka XS/13	1
71.34.0416	balanSys RP PE skúšobná vložka XS/15.5	1
71.34.0301	balanSys RP PE skúšobná vložka S/8	1
71.34.0983*	balanSys RP PE skúšobná vložka S/9	1
71.34.0302	balanSys RP PE skúšobná vložka S/10.5	1
71.34.0984*	balanSys RP PE skúšobná vložka S/11.5	1
71.34.0303	balanSys RP PE skúšobná vložka S/13	1
71.34.0304	balanSys RP PE skúšobná vložka S/15.5	1
71.34.0562	balanSys RP PE skúšobná vložka A/8	1
71.34.0985*	balanSys RP PE skúšobná vložka A/9	1
71.34.0563	balanSys RP PE skúšobná vložka A/10.5	1
71.34.0986*	balanSys RP PE skúšobná vložka A/11.5	1
71.34.0564	balanSys RP PE skúšobná vložka A/13	1
71.34.0565	balanSys RP PE skúšobná vložka A/15.5	1
71.34.0568	balanSys RP PE skúšobná vložka B/8	1
71.34.0987*	balanSys RP PE skúšobná vložka B/9	1
71.34.0569	balanSys RP PE skúšobná vložka B/10.5	1
71.34.0988*	balanSys RP PE skúšobná vložka B/11.5	1
71.34.0570	balanSys RP PE skúšobná vložka B/13	1
71.34.0571	balanSys RP PE skúšobná vložka B/15.5	1

* Vložky balanSys PE 9 mm a 11,5 mm sú dostupné len ako vitamys.

balanSys patela 3-kolíková, plochá
71.34.0080A

Žiadny obrázok / 71.34.0082

balanSys veko 3-kolík. pately, plochej

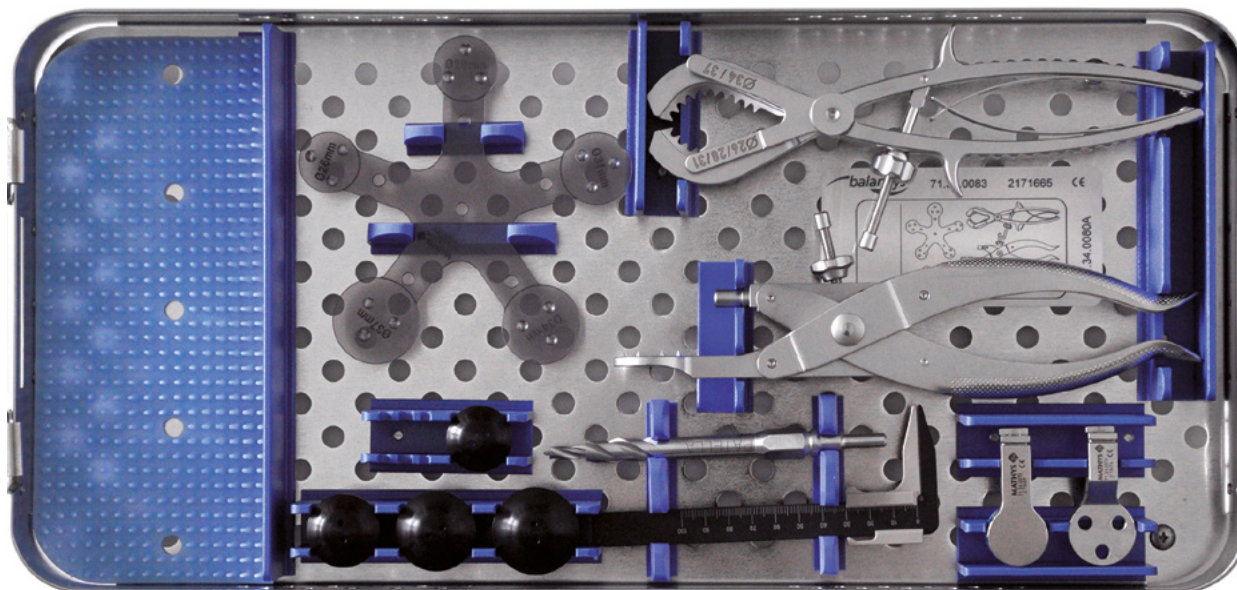


balanSys patela 3-kolíková, štandardná
71.34.0081A

Žiadny obrázok / 71.34.0084


balanSys veko pately 3-kol., STANDARD

71.34.0083 balanSys kôš pately 3-kolík., plochá

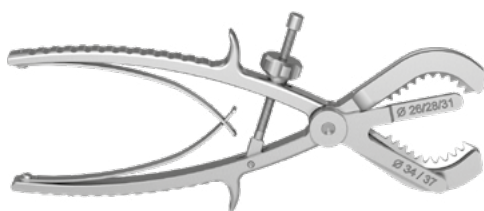

Kat. č.	Popis
71.34.0071	balanSys patelové resekč. kliešte ploché

71.34.0085 balanSys kôš pately 3-kol., STANDARD

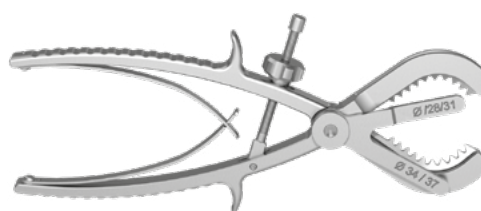

Kat. č.	Popis
71.34.0070	balanSys patel. resek. kliešte vyvýšené



Kat. č.	Popis
71.34.0708	balanSys skúš. patela 3-kolík. plochá 26
71.34.0075	balanSys skúš. patela 3-kolík. plochá 28
71.34.0076	balanSys skúš. patela 3-kolík. plochá 31
71.34.0077	balanSys skúš. patela 3-kolík. plochá 34
71.34.0078	balanSys skúš. patela 3-kolík. plochá 37



Kat. č.	Popis
71.02.3063	balanSys skúšobná patela 3-kolíková 28
71.02.3064	balanSys skúšobná patela 3-kolíková 31
71.02.3065	balanSys skúšobná patela 3-kolíková 34
71.02.3066	balanSys skúšobná patela 3-kolíková 37



Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.2201	balanSys patelové univerzálne kliešte	1




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0074	balanSys patel. vod. pom. vrt. ku kliešťom	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0073	balanSys patelová cement. pom. ku klieš.	1




Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3061	Vrták 5,5	1

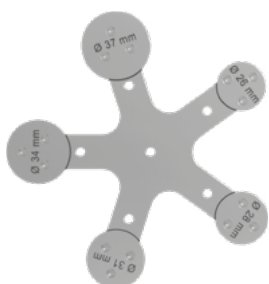

Voliteľné nástroje

NIE sú súčasťou štandardnej konfigurácie a musia sa objednať osobitne:

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0079	balanSys patelová pom. výberu veľkosti	1

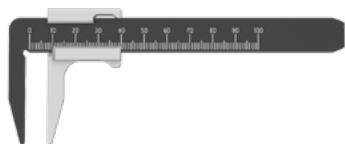


Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3002	balanSys patelové posuvné meradlo	1

Príloha


6 – Produktové čísla meracích šablón balanSys

balanSys BICON Knee System 330.030.034

Vhodné pre CR, UC a RP

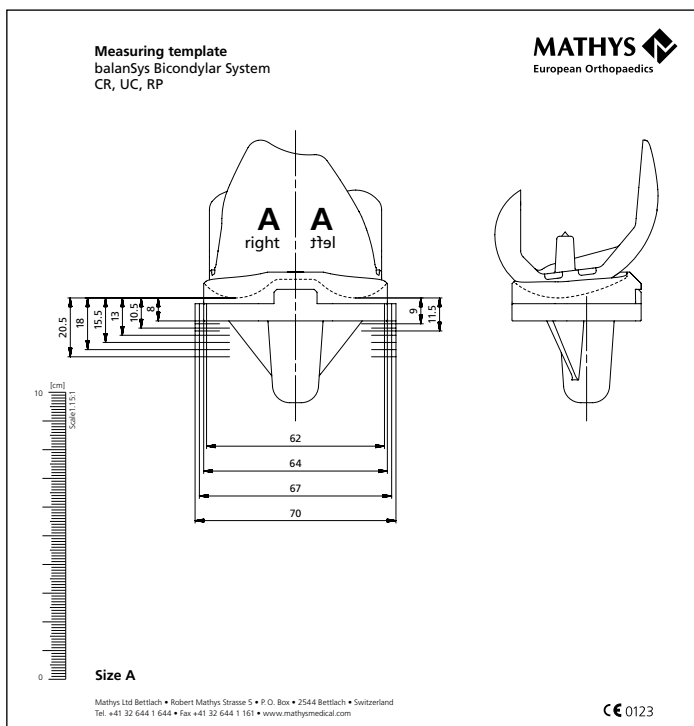

balanSys PS Knee System 330.030.035

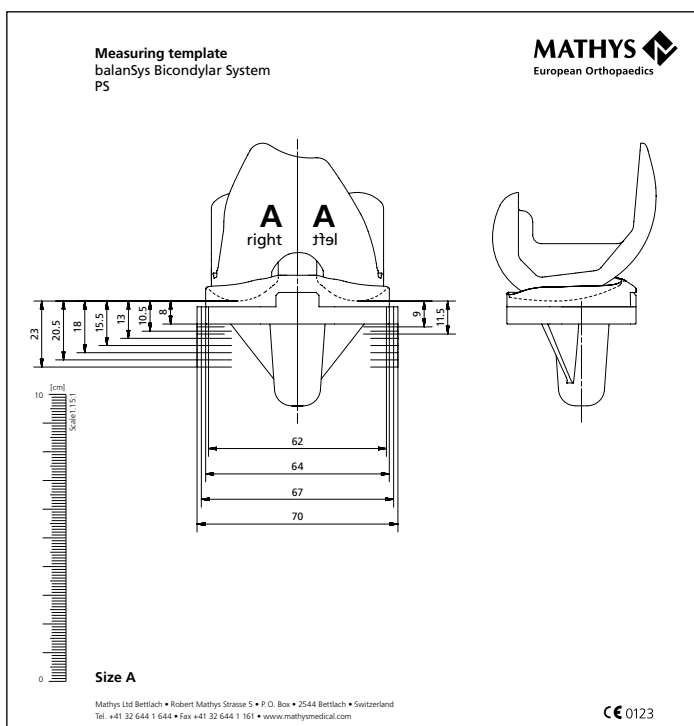

Symbody a skratky



Výrobca



Správne



Nesprávne



Pozor

CR	Zachovávajúci skrížený väz (Cruciate Retaining)
UC	Ultra kongruentný (Ultra Congruent)
PS	Posteriórne stabilizovaný (Posterior Stabilized)
RP	Rotačná platforma (Rotating Platform)
ACL	Predný skrížený väz (Anterior Cruciate Ligament)
PCL	Zadný skrížený väz (Posterior Cruciate Ligament)
MCL	Mediálny kolaterálny väz (Medial Collateral Ligament)
LCL	Laterálny kolaterálny väz (Lateral Collateral Ligament)
TRS	Tibiálny referenčný systém (Tibia Reference System)
IFU	Návod na použitie (Instruction For Use)

Poznámky

[illegible]

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

