

## Programma di revisione d'anca Mathys

### Altri prodotti da revisione



#### Testa da Revisione *ceramys*®

- Da applicare su un cono usato
- Compatibile con UHMWPE, HXLPE (vitamys) e ceramiche Mathys
- Teste da 28, 32 e 36 mm abbinare ad adattatori in titanio con diverse lunghezze: S, M, L e XL



#### *cyclOS*® – Granuli e Putty

- Più di 30 anni di esperienza clinica con beta fosfato tricalcico puro
- Sintetico al 100% – nessun rischio di trasmissione di agenti infettivi
- Sostituti ossei riassorbibili e (*cyclOS* Putty)

**MATHYS**   
European Orthopaedics

**MATHYS**   
European Orthopaedics

## Programma di revisione d'anca Mathys

<b>Australia</b>	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Lane Cove West, NSW 2066 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	<b>Japan</b>	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
<b>Austria</b>	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	<b>New Zealand</b>	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
<b>Belgium</b>	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	<b>Netherlands</b>	Mathys Orthopaedics B.V. 3905 PH Veenendaal Tel: +31 318 531 950 info.nl@mathysmedical.com
<b>France</b>	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	<b>P. R. China</b>	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
<b>Germany</b>	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44791 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com Hotline: +49 1801 628497 (MATHYS)  «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com  «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	<b>Switzerland</b>	Mathys Ltd Bettlach 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 644 info@mathysmedical.com
		<b>United Kingdom</b>	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Mathys dispone di speciali set di strumenti che concede in prestito per facilitare la rimozione di uno stelo o di un cotile da sostituire.

Per maggiori dettagli contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

... together with passion!

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide...

## Programma di revisione d'anca Mathys

Il nuovo programma di revisione d'anca Mathys offre un'intera gamma di prodotti per gli interventi di revisione dell'anca. Questa brochure illustra i possibili difetti ossei del femore (classificazione Paprosky) abbinati al rispettivo stelo da revisione Mathys. Essa comprende anche diversi prodotti per la revisione acetabolare ed altri prodotti ancora per le revisioni in generale.

## Programma di revisione d'anca Mathys

**Legenda**

- Indicazioni
- Controindicazioni
- Indicazioni limitata

## Programma di revisione d'anca Mathys

### Revisione femorale



**Paprosky II**

Difetto limitato alla metafisi con osso della diafisi intatto. Il calcare è completamente mancante.



**Paprosky IIIa**

I difetti interessano la metafisi e il punto di giunzione con la diafisi.



**Paprosky IIIb**

Difetti estesi della metafisi e del punto di giunzione con la diafisi.



**Paprosky IV**


Danno metadiafisario femorale esteso, con corticali sottili e canali allargati.



**twinSys® Lungo**

- Tripla conicità per una fissazione stabile
- Collare prossimale per evitare l'affondamento
- Fessura distale per un inserimento più semplice

Paprosky II IIIa IIIb IV

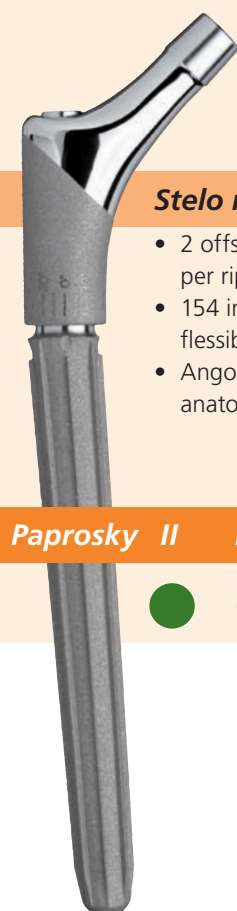

**Stelo modulare da revisione**

- 2 offset, anteversione regolabile per ripristinare l'anatomia
- 154 impianti diversi per un'ottima flessibilità intraoperatoria
- Angolo del cono 4° per un adattamento anatomico ottimale

Paprosky II IIIa IIIb IV




**Stelo lungo Centris®**

- Stelo originale Charnley-Kerboull con cono da 12/14
- Ampia gamma di taglie
- Risultati eccellenti a lungo termine

Paprosky II IIIa IIIb IV



### Revisione acetabolare

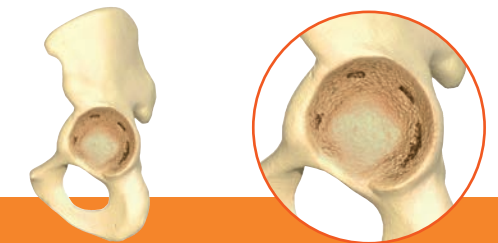

**Cotile seleXys® PC**

- Possibilità di svariati inserti per situazioni e preferenze diverse: inserti standard e con spalla in UHMWPE e HXLPE (vitamys), ceramys
- Fori per viti pre-chiusi

**Cotile da Revisione RM Classic**

- Percentuale di sopravvivenza del 94,4% dopo 20 anni – sicuro ed affidabile! <sup>1</sup>
- Elasticità simile all'osso per un perfetto trasferimento del carico ed un'ottima osteointegrazione
- I 2 perni e l'opzione delle 9 viti sono garanzia di una fissazione stabile e duratura

**CCE & CCB**

- Più di 20 anni di esperienza clinica
- Concepito per un posizionamento semplice
- Pubblicazioni scientifiche disponibili

<sup>1</sup> Ihle M, Mai S, Pfluger D, Siebert W (2008), J Bone Joint Surg Br. 90(10):1284-90